

Phonak Audeo Fit™

Produktinformasjon



Vår nyeste innovasjon i Paradise-serien, Audeo Fit, har pulsmåler som kan registrere kroppens helseopplysninger og som brukeren kan se i myPhonak-appen. Ved å registrere puls, skritt og aktivitetsnivåer, kan disse høreapparatene fremme sunne vaner og skape en større følelse av velvære. Phonak Audeo Fit-høreapparater passer for lett til stort hørselstap og støttes av den innovative teknologien til Phonak Paradise-plattformen. Disse høreapparatene er løsningen for de brukerne som er opptatt av helseopplysningene sine.

Du finner mer informasjon på www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Produktbeskrivelse



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

Flerfunksjonsknapp		•
Bluetooth®		•
Vannavstøtende belegg		•
IP-rangering		IP68 ¹
Mål	L x B x D	30,6 x 12,3 x 8,1 mm
	Vekt	2,23 g
Ladetider ²	0 % til 100 %	3 t
	0 % til 80 %	1,5 t
	30 min tilpasning	10 min
M Receiver		
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)		114
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	51
Frekvensområde (Hz)	2 cc coupler	<100 – >8000
P Receiver		
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)		122
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	59
Frekvensområde (Hz)	2 cc coupler	<100 – 6300

Kassefarger



P1
Sand Beige



P4
Chestnut



P6
Silver Gray

¹ IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.
² Faktisk ladetid avhenger av gjenværende batterilevetid, men vil ikke overskride 3 timer.

Funksjonsnivåer

	Premium	Advanced	Funksjoner	Premium	Advanced
AutoSense OS™ 4.0	Premium	Advanced	UltraZoom	•	•
Komfort i ekko	•		Dynamic Noise Cancellation	•	
Tale i bil	•		Speech Enhancer	•	
Tale i høy støy	•		EchoBlock	•	
Musikk	•	•	Tap Control		
Komfort i støy	•	•	- Siri / Google Assistant	•	•
Tale i støy	•	•	- Sette streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•
Stille situasjoner	•	•	- Godta/avslutte samtale	•	•
Medier, tale + mikrofon	•	•	StereoZoom	•	•
Medier, musikk + mikrofon	•	•	WindBlock	•	•
Tilleggsprogrammer			SoundRelax	•	•
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	Motion Sensor Hearing	•	•
Komfort i ekko	•		DuoPhone	•	•
Tale i høy støy	•	•	Real Ear Sound	•	•
Tale i 360°	•	•	Innstilling for Roger and directional	•	•
Tale i støy	•	•	SoundRecover2	•	•
Stille situasjoner	•	•	WhistleBlock	•	•
Komfort i støy	•	•	NoiseBlock	•	•
Musikk	•	•	RogerDirect™	•	•
Akustisk telefon	•	•	Brukerbasert fininnstilling	•	•
Tilpasset program	•	•	QuickSync	•	•
Streamingprogrammer			AOV	•	•
RogerDirect + mikrofon	•	•	Tinnituskontroll	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	auto Acclimatization	•	•
Telefonsamtale + mikrofon	•	•	Environmental balance	•	•
			Fininnstilling av kanaler	20	20

Helsefunksjoner

	Audéo Fit	Paradise oppladbare RIC-høreapparater
Separat brukstid for hvert høreapparat	•	•
Gjennomsnittlig kombinert brukstid for bilaterale høreapparater	•	•
Gjennomsnittlig brukstid i forskjellige lydombgivelser	•	•
Skritt	•	•
Aktivitetsnivåer	•	•
Distanse gått eller løpt	•	
Puls	•	
Valgfritt mål for brukstid	•	•
Valgfritt mål for skritt	•	•

Tilpasning


Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

Phonak Target	7.3 eller nyere
Noahlink Wireless	•

Akustisk sammenkobling*

	M Sensor Receiver	P Sensor Receiver
Lengde		
Tilgjengelig for venstre og høyre i fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)	•	•
Dome		
Cap dome	•	
Open dome Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)	•	
Vented dome clear Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)	•	
cShell		
Akryl	•	•
Tilpasningsområder		

* Kun 8-pinnars Sensor Receiver og Sensor cShell fungerer med Audeo Fit.

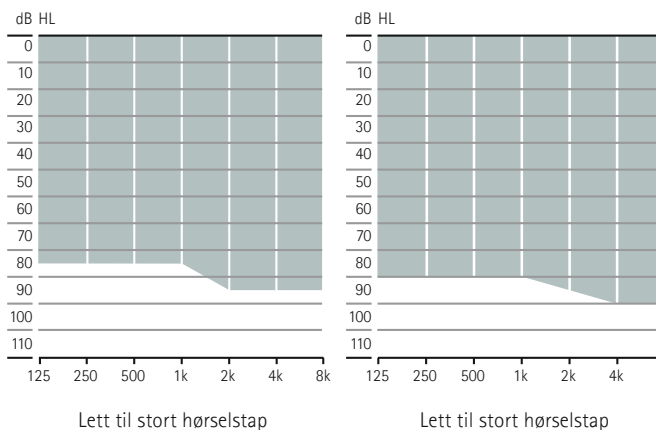

Phonak Audéo Fit Trial™

De nye høreapparatene Phonak Audéo P Fit Trial kan raskt settes til ønsket funksjonsnivå for å passe til din anbefaling. Begge nivåer av teknologi i ett Phonak Audéo P Fit Trial-høreapparat gir deg mange muligheter for å levere hørselsløsningen ved første avtale, eller for å overlape under reparasjoner.

Ladealternativer for Phonak Audéo Fit



Phonak Charger Case Combi

Phonak Charger Case Combi består av lader, tørkesett og beskyttende etui i ett. I tillegg ligger det et rengjøringsverktøy i den robuste og sprutsikre kassen.



Phonak Power Pack

For å lade oppladbare høreapparater når du er på farten, kan Phonak Power Pack enkelt festes på bunnen av Phonak Charger Case Combi.

Phonak Audéo Fit Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler / streaming av lyd

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70
Trådløst tilbehør	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
RogerDirect™	•
Apper	
myPhonak	•

Du finner mer informasjon på www.phonakpro.com/audeoparadise

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på www.phonakpro.com/roger

Du finner mer informasjon på www.phonakpro.com/smartapps

life is on


Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.

www.phonak.no



027-0656-10|V1.00|2022-01|NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits

