



PHONAK
life is on

A Sonova brand

Phonak Sky™ Link M.

Informacje o produkcie

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty



Opis produktu




Sky Link M

Rozmiar baterii		Bateria 13
Przycisk wielofunkcyjny		•
Cewka indukcyjna (T-cewka)		•
Technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2		•
Powłoka hydrofobowa		•
Stopień ochrony IP		IP68 ¹
Wymiary	Długość x szerokość x wysokość	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 cala)
	Masa	4,40 g

		HE11	HE11 680
Maks. poziom wyjściowy (dB SPL)	Sprzęgacz 2 cm3	139	133
Maks. wzmacnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm3	81	75
Pasma przenoszenia (Hz)		< 100 – > 5000	< 100 – > 5000
Pobór prądu (mA)		2,1	2,0

Zakres dopasowania

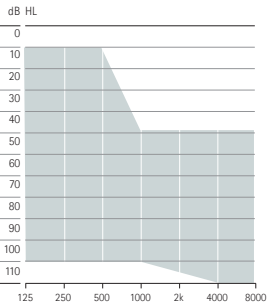

Ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego; wszystkie konfiguracje audiometryczne

Kolory obudów i rożków

Obudowa



P1

Piaskowy



P4

Kasztanowy



P8

Aksamitna
czerni



Q3

Pirat
z Karaibów



T3

Drogocenny
róż



M7

Błękit oceanu

Rożek



R1

Zielony



R2

Żółty



R3

Różowy



R4

Pomarańczowy



Q6

Niebieski



13

Przezroczysty



Q7

Fioletowy

¹ IP68 oznacza, że aparat słuchowy jest odporny na działanie wody i pyłu. Przeszedł testy na zanurzenie w słodkiej wodzie o głębokości 1 m przez 60 minut oraz 8 godzin w komorze pyłowej, jak to określa norma IEC60529.

Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.

Poziomy możliwości

AutoSense Sky OS 3.0

Spokojne sytuacje	•
Mowa w hałasie	•
Komfort w hałasie	•
Muzyka	•
Mowa w dużym hałasie	•
Mowa w samochodzie	•
Komfort w pogłosie	•
Media-mowa + mik	•
Media-muzyka + mik	•

Programy dodatkowe

Maks. liczba dodatkowych prog.	4
Komfort w pogłosie	•
Mowa w dużym hałasie	•
Mowa z 360°	•
Mowa w hałasie	•
Spokojne sytuacje	•
Komfort w hałasie	•
Kompatybilne z funkcją off-ear*	•
Muzyka	•
Telefon akustyczny	•
Program indywidualny	•

Programy strumieniowe

RogerDirect + mik	•
PartnerMic™ + mik	•
Rozmowa telefoniczna + mik	•

Funkcje

UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Dopasowanie do Preferencji	•
Użytkownika	•
Real Ear Sound	•
Kanały dokładnego strojenia	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Akustycznie optymalizowana wentylacja	•
Auto aklimatyzacja	•
Balans środowiskowy	•
RogerDirect™	•
Roger i ustawienia kierunkowe	•

* Do użytku tylko w przypadku dopasowań bimodalnych

Phonak Trial™

Jeśli wymagane jest urządzenie na okres próbny, zaleca się skorzystanie z urządzenia Phonak Sky M-SP Trial. Urządzenie testowe nie jest kompatybilne z procesorem mowy AB.

Kompatybilność

Sky Link M można używać:

- do dopasowania jednousznego
- do dopasowania obuusznego z dwoma aparatami słuchowymi Sky Link M
- do dopasowanie bimodalnego z procesorem mowy Advanced Bionics Sky CI M90

Dopasowanie

Program do dopasowania aparatów słuchowych Phonak Target	Wersja 7.0 lub nowsza
Advanced Bionics Target CI	•
Urządzenie do programowania Noahlink	•
Wireless, Noahlink Wireless 2	•
NOAHLINK	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Połączenia akustyczne

Wyjście dźwięku	Standardowy rożek	Model z filtrem (HE 11 680), dostępny w wersji przezroczystej i w 6 dodatkowych kolorach z palety dla dzieci (patrz strona 2)
		Model bez filtra (HE 11), dostępny w wersji przezroczystej i 6 dodatkowych kolorach z palety pediatrycznej
	Rożek z zabezpieczeniem	Model mini z filtrem (HE 11 680), dostępny w wersji przezroczystej i w 6 dodatkowych kolorach z palety pediatrycznej (patrz strona 2)
		Model mini bez filtra (HE 11), dostępny w wersji przezroczystej i 6 dodatkowych kolorach z palety pediatrycznej
	SlimTube 4.0	Dostępny dla lewej i prawej strony i w pięciu różnych długościach (00, 0, 1, 2, 3)
Część uszna dla SlimTube	SDS 4.0	Nakładka typu Power i inne nakładki SDS 4.0 dostępne w trzech rozmiarach (S, M, L)
	SlimTip	Akryl
		Silikon
Część uszna dla rożka	Earmold	
	Uniwersalna wkładka	

Portfolio urządzeń do komunikacji bezprzewodowej

	Sky Link-M
Akcesoria bezprzewodowe	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Pilot do aparatów słuchowych Phonak	•
RemoteControl	
Roger	
Mikrofony Roger	•
Aplikacje do obsługi aparatów słuchowych	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

myPhonak Junior jest kompatybilny ze Sky Link M tylko w przypadku użycia w konfiguracji jednousznej lub w połączeniu z innym Sky Link M.



life is on

Od 1947 roku marka Phonak angażuje się w ochronę jakości życia poprzez otwieranie nowych możliwości akustycznych. Od początku działalności, kierowaliśmy się głębokim przekonaniem, że dobre słyszenie jest równoznaczne z dobrym samopoczuciem i dlatego ma ono zasadnicze znaczenie dla doświadczania życia w pełni. W istocie zmysł słuchu jest bezpośrednio powiązany z samopoczuciem emocjonalnym, poznawczym, fizycznym i społecznym. Zarówno dziś, jak i w przyszłości, staramy się oferować najszerokie portfolio innowacyjnych rozwiązań słuchowych. Wraz z naszymi protetykami słuchu skupiamy się na tym, co najważniejsze: poprawie rozumienia mowy, zmianie życia ludzi i pozytywnym wpływie na całe społeczeństwo.

phonak.com



027-0606-16(V3.00/2024-08)NLG © 2020-2024 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria

