



Phonak Virto™ 1.

Informações do produto para modelos sem conectividade

Desenvolvido com tecnologia inovadora da plataforma Phonak Infinio, os aparelhos auditivos Virto I são a escolha para os usuários que preferem uma solução discreta e personalizada.



Descrição do produto

	 Virtuo I-10 NW O 190/170/150/130	 Virtuo I-Titanium 190/170
Potência		
M	•	•
P	•	•
SP	•	•
Configuração de hardware/opções/tecnologia		
Tamanho da bateria	10	10
Material da caixa (para ITEs)	Acrílico	Titânio ¹
Classificação IP	IP68 ²	IP68 ²
Tecnologia do microfone	Omni	Omni
Bobina de indução	Opcional	Opcional
Botão (programa/volume)	Opcional	Opcional
Controle de volume (roda)	Opcional	
EasyPhone (para telefones acústicos)	•	Opcional
MiniControl (para alterar o programa ou volume)	•	•

Cores

Cores do faceplate



26
Rosa



14³
Bege



22
Cacau



28³
Marrom



06
Preto

Cor da caixa (para ITEs) de titânio



Cinza
titânio

Cores da caixa (para ITEs) de acrílico



26
Rosa



14
Bege



22
Cacau



28
Marrom



06
Preto



R
Vermelho transparente



B
Azul transparente



21
Transparente

¹ Disponível com duas superfícies diferentes: aspereza padrão ou retenção extra (ERS)

² IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água potável durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, conforme definido na norma IEC 60529.

³ Virtuo I-10 NW O apenas

Níveis de desempenho

AutoSense OS™ 6.0	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Música	•	•		
Fala no carro	•	•	•	
Conforto no ruído	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	4	4	4	4
Fala no carro	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Telefone via bobina T ± mic	•	•	•	•
Bobina T pública ± mic	•	•	•	•

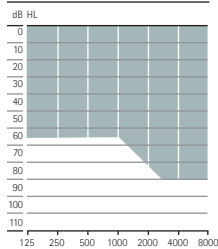
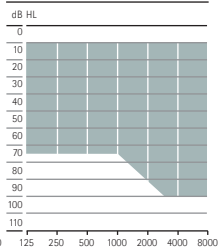
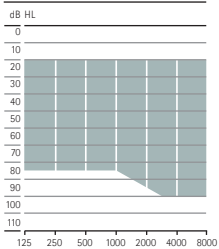
Características	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Realce de fala	•			
SoundRelax	•	•	•	
Compatibilidade Roger ¹	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Aclimatização	•	•	•	•
Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
VAO	•	•	•	•
Canais de ajuste fino	20	20	16	12

¹ Disponível via Roger Neckloop quando a opção de bobina telefônica estiver instalada



Ajuste

	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	10.0 ou superior
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Acoplamento acústico

		M	P	SP
Potência máxima de saída (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	109	115	119
Ganho máximo (dB)	Acoplador de 2 cc	40	50	60
Faixa de frequência (Hz)	Acoplador de 2 cc	< 100–7000	< 100–6700	< 100–7000
Consumo de energia (mA)		1.1	1.2	1.1
Faixa de adaptação		 <p>Para perda auditiva leve a moderada, todas as configurações audiométricas</p>	 <p>Para perda auditiva leve a moderadamente severa, todas as configurações audiométricas</p>	 <p>Para perda auditiva moderada a severa, todas as configurações audiométricas</p>

Estilos de caixa (para ITEs)

	 Virto I-10 NW O	 Virto I-Titanium
IIC	•	•
CIC	•	•
MC	•	
ITC	•	
HS	•	
FS	•	

Para obter mais informações, acesse www.phonak.com/virto-infinio

Para obter mais informações sobre os microfones Roger, acesse www.phonak.com/roger



Portfólio de comunicação sem fio

	Virto I-10 NW O I90/I70/I50/I30	Virto I-Titanium I90/I70
Roger		
Roger Neckloop	●*	●*

* Disponível se a bobina de indução estiver instalada

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias da nossa fundação, a nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras.

E, juntamente com os nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

phonak.com



7 1613389177 010011

027-0710-43/V3.00/2025-01/zm © 2025 Sonova AG All rights reserved

