

Phonak Naída™ L ●

Informações do produto

Phonak Naída Lumity é o portfólio abrangente de soluções BTE para perdas auditivas leves a profundas.

Com a Phonak SmartSpeech™ Technology, os aparelhos auditivos Naída L são a escolha para os usuários que precisam de soluções poderosas na nossa plataforma mais avançada, Phonak Lumity.



Descrição do produto



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30



Naída L-SP
Naída L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

Tamanho da bateria		675	13	Recarregável interna
Bobina de indução		•	•	
Compatibilidade com CROS L				•
Bluetooth®		•	•	•
Revestimento hidrofóbico		•	•	•
Classificação IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensões	C x L x P	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")
	Peso	4,60 g/0,162 oz	4,40 g/0,155 oz	3,68 g/0,130 oz
Tempos de carregamento ²	0% a 100%			3 h
	0% a 80%			1,5 h
	Ajuste de 30 min.			10 min.

	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	Tubo fino 4.0	HE11 680	Tubo fino 4.0
Tensão Saída máxima de potência (dB SPL) Acoplador de 2cc	141	134	139	133	135	130	129
Ganho máx. (dB) Acoplador de 2cc	84	78	81	75	70	68	69
Faixa de frequência (Hz)	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4900	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100

Faixa de adaptação

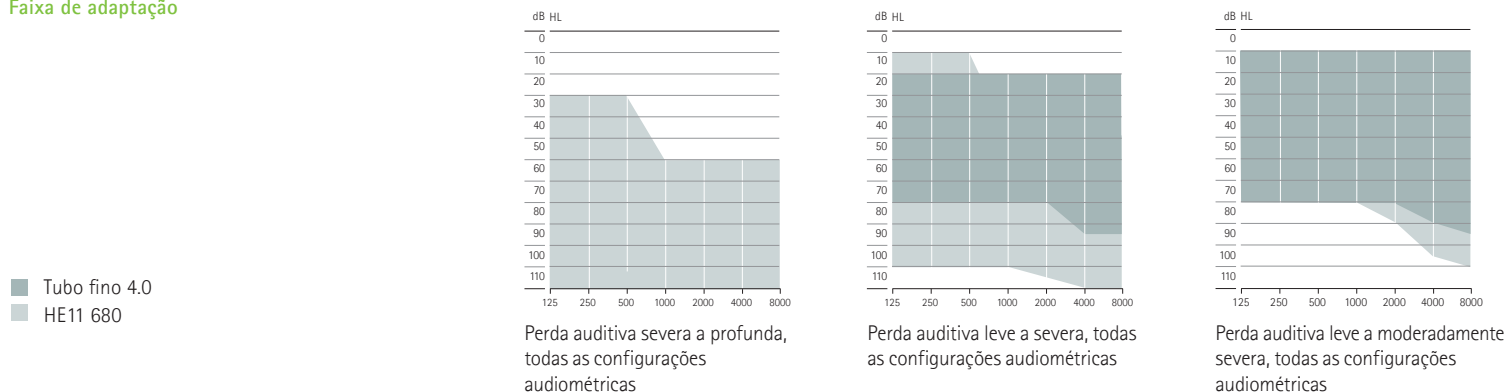

Cores da caixa



H0
Bege



P1
Bege Praia



P3
Madeira de Sândalo



P4
Castanho



P5
Champanhe



P6
Prata



P7
Cinza Grafite



P8
Preto Veludo

¹ IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua em 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.
² O tempo de carregamento real depende da duração restante da bateria e pode ser afetado pelas condições de temperatura.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

Níveis de desempenho

AutoSense OS™ 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Fala no ruído forte	•			
Fala no carro	•			
Conforto no eco	•			
Música	•	•		
Conforto no ruído	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Transmissão sem fio de fala + mic	•	•	•	•
Transmissão sem fio de música + mic	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	4	4	4	4
Conforto no eco	•			
Fala no ruído forte	•	•		
Fala em 360°	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Telefone via bobina T ± mic¹	•	•	•	•
Bobina T pública ± mic¹	•	•	•	•
Programas de transmissão				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
Chamada telefônica + mic	•	•	•	•

Características	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
SpeechSensor	•			
Realce de fala	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancelador dinâmico de ruído	•	•		
Sensor de movimento para a audição²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Controle por toque²				
– Siri/Google Assistant	•	•		
– Pausar/retomar uma transmissão	•	•		
– Aceitar/finalizar uma chamada telefônica	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ e configuração Direcional	•	•	•	•
Broadband Booster³	•	•	•	•
Funcionalidades de saúde²⁴	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Tinnitus Balance⁵	•	•	•	•
Auto aclimatização	•	•	•	•
Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
VAO	•	•	•	•
Canais de ajuste fino	20	20	16	12

1 Não disponível para o Phonak Naída L-PR

2 Disponível somente para o Phonak Naída L-PR

3 Disponível somente para o Phonak Naída L-UP

4 Disponível em combinação com o myPhonak

5 Não disponível para o Phonak Naída L-UP

Ajuste

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 ou superior	9.1 ou superior	9.0 ou superior
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•	•
NOAHLink	•	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	•	

Vedação acústica

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Saída de som	Gancho	Com filtro (HE11 680), transparente	•	•	•
	Gancho	Sem filtro (HE11), transparente	•	•	
	Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo em cinco comprimentos diferentes (00, 0, 1, 2, 3)		•	•
Peça para o Tubo fino	Oliva	Oliva mini		•	•
		Oliva aberta Disponível em três tamanhos (P, M, G)		•	•
		Oliva ventilada Disponível em três tamanhos (P, M, G)		•	•
		Oliva Power Disponível em três tamanhos (P, M, G)		•	•
	MicroMolde	Acrílico		•	•
		Silicone		•	•
Peça para o gancho	Molde		•	•	•

Phonak Naída L Trial

Os aparelhos auditivos Phonak Naída L Trial podem ser rapidamente configurados no nível de desempenho desejado a fim de atender às suas necessidades. Isso lhe permite proporcionar ao seu paciente a solução auditiva ideal logo na primeira consulta ou de oferecer um produto em substituição quando o aparelho auditivo do paciente estiver sendo consertado. Os dispositivos Naída L trial também incluem um receptor Roger pré-instalado para fácil demonstração e teste com qualquer microfone Roger.

Opções de carregamento do Phonak Naída L-PR

O Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR possui todas as características do Lumity que você adora, bem como o benefício da capacidade de recarga. Os usuários podem desfrutar de um dia inteiro de audição, incluindo transmissão sem fio*.

* Duração esperada da bateria de 16 horas, incluindo 4 horas de transmissão BT clássico e 4 horas de transmissão do TV Connector.



Versões Bluetooth® do Phonak Naída L

Chamadas diretas/transmissão de áudio

Tecnologia Bluetooth 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

Portfólio de comunicação sem fio

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-SP Naída L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Acessórios sem fio			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak Remote Control	•	•	•
Roger			
Microfones Roger	•	•	•
Aplicativos			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Para obter mais informações, visite www.phonak.com/naida-lumity

Para obter mais informações sobre os microfones Roger, visite www.phonak.com/roger

Para obter mais informações sobre o myPhonak e o myPhonak Junior, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias da nossa fundação, a nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



027-0699-43/V3.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved

