



PHONAK
life is on

Uma marca Sonova

Phonak Sky™ Link M.

Informações do produto



Descrição do produto




Sky Link M

Tamanho da bateria	13
Botão multifunção	•
Bobina de indução	•
Tecnologia Bluetooth® 4.2 sem fio	•
Revestimento hidrofóbico	•
Classificação IP	IP68¹
Dimensões	C x L x P
	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")
Peso	4,40 g/0,155 oz

		HE11	HE11 680
Máx. máx. de saída (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	139	133
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	81	75
Faixa de frequência (Hz)		<100->5000	<100->5000
Consumo de energia (mA)		2,1	2,0

Faixa de adaptação

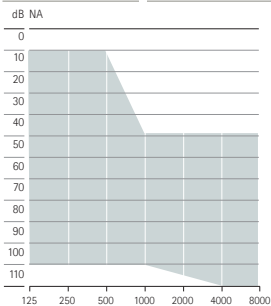

Perda auditiva leve a severa, todas as configurações audiométricas

HE11 680

Cores de caixa e gancho

Caixa



P1
Bege Praia



P4
Castanho



P8
Preto Veludo



Q3
Azul Caribe



T3
Rosa Precioso



M7
Oceano Azul

Gancho



R1
Verde



R2
Amarelo



R3
Rosa



R4
Laranja



Q6
Azul



13
Transparente



Q7
Roxo

¹ IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua em 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

Níveis de desempenho

AutoSense Sky OS 3.0

Situações silenciosas	•
Fala no ruído	•
Conforto no ruído	•
Música	•
Fala no ruído forte	•
Fala no carro	•
Conforto no eco	•
Transmissão sem fio de fala + mic	•
Transmissão sem fio de música + mic	•

Programas adicionais

Máx. de programas adicionais	4
Conforto no eco	•
Fala no ruído forte	•
Fala em 360°	•
Fala no ruído	•
Situações silenciosas	•
Conforto no ruído	•
Processador de som fora do ouvido*	•
Música	•
Telefone acústico	•
Programa personalizado	•

Programas de transmissão

RogerDirect + mic	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•
Chamada telefônica + mic	•

* Usado apenas em ajustes bimodais

Características

UltraZoom	•
SNR - Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Ajuste das preferências do usuário	•
Real Ear Sound	•
Canais de ajuste fino	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Ventilação acusticamente otimizada	•
auto Aclimatização	•
Balanceamento ambiental	•
RogerDirect™	•
Configuração Roger e direcionalidade	•

Ajuste

Phonak Target	7.0 ou superior
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•
NOAHLINK	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Vedação acústica

Saída de som	Gancho padrão	Com filtro (HE 11 680) transparente e 6 cores pediátricas adicionais (consultar a página 2)
		Sem filtro (HE 11) transparente e 6 cores pediátricas adicionais
	Gancho inviolável	Mini com filtro (HE 11 680) transparente e 6 cores pediátricas adicionais (consultar a página 2)
		Mini sem filtro (HE 11) transparente e 6 cores pediátricas adicionais
	Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo com cinco comprimentos diferentes (00, 0, 1, 2, 3)
Peça para tubo fino	SDS 4.0	Oliva Power e todas as outras olivas SDS 4.0 disponíveis em três tamanhos (P, M, G)
	microMolde	Acrílico
		Silicone
Peça para gancho	Molde	
	Oliva universal	

Phonak Trial™

Se for necessário um dispositivo de teste, recomenda-se o dispositivo Phonak Sky M-SP Trial. Esse dispositivo de teste não é compatível com o processador de som da AB.

Compatibilidade

O Sky Link M pode ser usado:

- como um ajuste monoaural
- como um ajuste binaural com dois aparelhos auditivos Sky Link M
- como um ajuste bimodal com um processador de som Sky CI M90 da Advanced Bionics

Portfólio de comunicação sem fio

	Sky Link-M
Acessórios sem fio	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak Remote Control	•
Roger	
Microfones Roger	•
Aplicativos	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

O myPhonak Junior é compatível com o Sky Link M somente se usado em uma configuração monoaural ou pareado com outro Sky Link M.



life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias da nossa fundação, a nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com os nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

phonak.com

027-0606-43/V3.00/2024-08/NLG © 2020-2024 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suíça

 **CE**
0459

