

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Informações do produto

O Phonak Terra+ e o Phonak Terra oferecem um conjunto equilibrado de recursos para proporcionar uma experiência auditiva personalizada com RIC e BTE.



Descrição do produto



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Tamanho da bateria		Recarregável interna	312	312	13	675
Bobina telefônica				•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Revestimento hidrofóbico		•	•	•	•	•
Classificação IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensões	C x L x P	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28")	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")
	Peso	2,2 g (0,08 oz)	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)
Tempos de carregamento ²	0% a 100%	3 h				
	0% a 80%	1,5 h				
	Ajuste de 30 min.	15 min				

Cores da caixa

Terra+



H0
Bege



P1
Bege Praia



P3
Madeira de
Sândalo



P6
Prata



P8
Preto Veludo

Terra



H0
Bege



P3
Madeira de
Sândalo



P6
Prata



P8
Preto Veludo

¹ IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido na norma IEC60529.


² O tempo de carregamento real depende da duração restante da bateria, mas não deverá exceder 3 horas.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

Vedação acústica – aparelhos auditivos RIC

Comprimento	Receptor S	Receptor M	Receptor P	Receptor UP
Disponível em quatro comprimentos diferentes (0, 1, 2, 3), esquerdo e direito	•	•	•	•
Oliva				
Oliva mini	•	•	•	
Oliva aberta Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•	•	
Oliva ventilada Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•	•	
Oliva Power Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•	•	
MicroMolde*				
Acrílico	•	•	•	
Silicone	•	•	•	
Microcaixa cShell				
Acrílico	•	•	•	•
Titânio	•	•	•	•
Dados do acoplador de 2cc				
Nível máx. de saída (dB NPS)	111	114	122	132
Ganho máx. (dB)	47	51	59	71
Faixa de frequência (Hz)	<100 a >8000	<100 a >8000	<100 a 6300	<100 a 6100

Faixas de adaptação

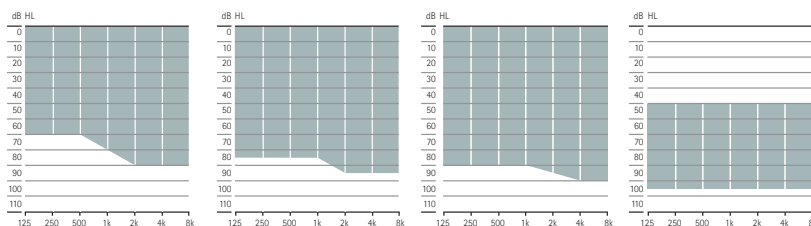

Perda auditiva leve a moderadamente severa.

Perda auditiva leve a severa.

Perda auditiva leve a severa.

Perda auditiva moderada a profunda.

* Disponível com opção de maior comprimento no canal

Opção de carregamento do Phonak Terra+ RIC-R



Phonak Charger Ease

Vedação acústica – aparelhos auditivos BTE

Saída de som

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Gancho padrão	Com filtro (HE11 680), transparente	•	•	•
	Sem filtro (HE11), transparente		•	•
Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo em cinco comprimentos diferentes (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	

Peça para o Tubo fino

Oliva	Oliva mini	•	•	
	Oliva aberta	Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•
	Oliva ventilada	Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•
	Oliva Power	Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•
MicroMolde	Acrílico	•	•	
	Silicone	•	•	


Peça para o gancho

Molde		•	•	•
-------	--	---	---	---

Dados do acoplador de 2cc

		HE11 680	Tubo fino 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Nível máx. de saída (dB NPS)	acoplador de 2cc	128	122	133	139	134	141
Ganho máx. (dB)	acoplador de 2cc	63	58	75	81	78	84
Faixa de frequência (Hz)		<100 a >7800	<100 a >8000	<100 a >5700	<100 a >4900	<100 a >4700	<100 a >4700
Consumo de energia (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Faixas de adaptação

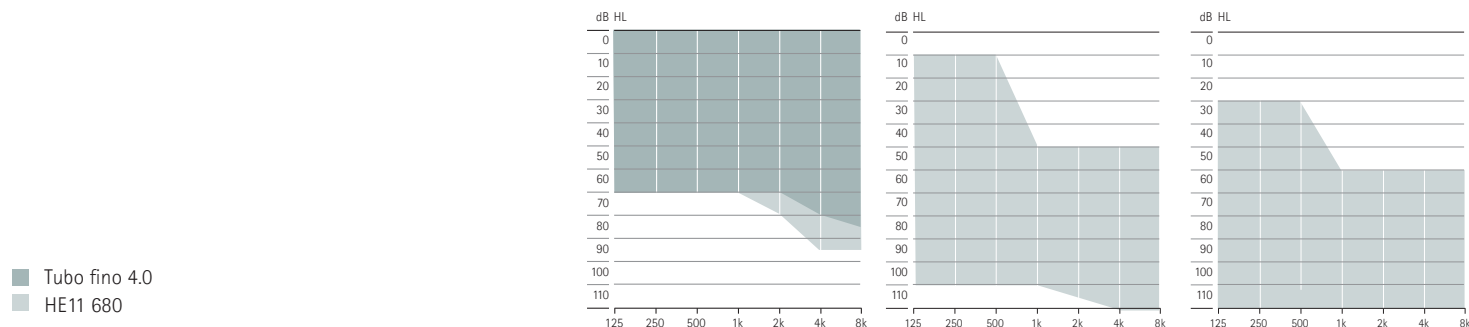

Perda auditiva leve a moderada, todas as configurações audiométricas

Perda auditiva leve a severa, todas as configurações audiométricas

Perda auditiva severa a profunda, todas as configurações audiométricas

Níveis de desempenho

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0		
Fala no ruído	•	•
Situações silenciosas	•	•
AutoSense OS 5.0 (transmissão)		
Transmissão sem fio de fala + mic	•	•
Transmissão sem fio de música + mic	•	
Programas adicionais		
Máx. de programas adicionais	4	4
Fala no ruído	•	•
Situações silenciosas	•	•
Conforto no ruído	•	
Música	•	
Telefone acústico	•	•
Programa personalizado	•	•
Telefone via bobina ± mic ²	•	•
Bobina pública ± mic ²	•	•
Programas de transmissão		
PartnerMic + mic	•	
Chamada telefônica + mic	•	•

Recursos

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
UltraZoom	•	•
Amplificador de faixa de frequência estendida ¹	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•
Auto Acimatização	•	•
Equilíbrio ambiental	•	•
SoundRecover2	•	
SoundRecover	•	•
WhistleBlock	•	•
NoiseBlock	•	•
QuickSync	•	•
VAO	•	•
Canais de ajuste fino	10	8

¹ Disponível somente para o Phonak Terra+ BTE-UP e o Phonak Terra BTE-UP
² Disponível somente para produtos BTE

Portfólio de comunicação sem fio

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Acessórios sem fio		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak Remote Control	•	
Aplicativos		
myPhonak	•	

Ajuste

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 ou superior	9.1 ou superior	9.1 ou superior	9.1 ou superior	9.1 ou superior
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

Para obter mais informações, visite www.phonak.com/terra

Para obter mais informações sobre o myPhonak, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias de nossa fundação, nossa empresa era impulsionada por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir melhor significa viver melhor e, portanto, é essencial para viver a vida ao máximo. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje, como no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



7 613389 724097

027-0706-43M3.00/10-2024/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved