

Phonak Marvel™ trådlösa tillbehör

Produktinformation



Phonak TV Connector är en lättinstallerad och lättanvänd lösning för Phonak Marvel hörapparater. Den har proprietär Phonak AirStream™-teknik och kan leverera ljudkvalitet i högsta klass från valfri TV och ljudsystem. Dessutom har den direktanslutning till iOS- och Android-telefoner, vilket låter användaren få ut ännu mer från sin Marvel hörapparat med Phonak Remote app.

TV Connector – den lättanvända streamern för TV och musik



TV Connector ansluts enkelt till TV och andra ljudkällor och har direkt anslutning till Phonak Marvelhörapparater. Den är skapad för att förenkla installation och användning och erbjuder bästa möjliga ljudkvalitet i stereo med hjälp av AirStream™ - teknik. TV Connector kan streama ljudsignaler över ett avstånd på upp till 15 meter till ett obegränsat antal lyssnare samtidigt.


Funktionsöversikt

- Streaming till båda hörapparaterna i stereo
- AirStream-teknologi för bättre ljudkvalitet, lägsta fördröjning och enklare anslutning
- "Ett klick" för att ansluta alla kompatibla hörapparater inom räckvidd utan att röra hörapparaten
- Simultan streaming till ett obegränsat antal användare samtidigt
- Den kan monteras bakom TV:n för mer diskretion

Kompatibilitet

- TV Connector är kompatibel med alla Phonak trådlösa hörapparater med direktanslutning.

Använd så här

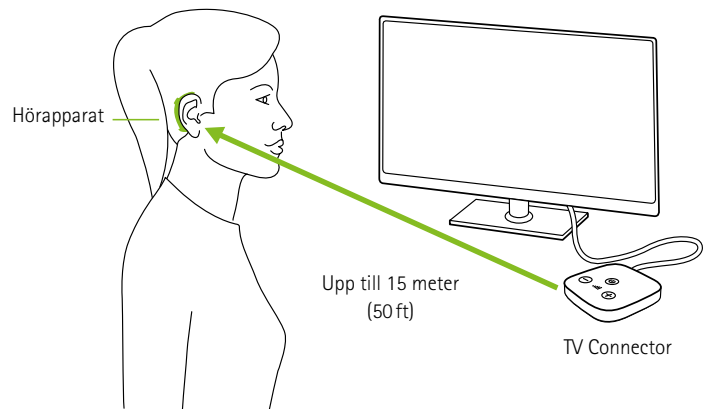

Om du vill se videoklipp om hur man använder och ställer in TV Connector, se www.phonakpro.se/TVConnector

Teknisk information



- 1 Anslut-knapp
- 2 Indikatorljus (LED)
- 3 microUSB-strömkabel
- 4 Ljudkontakt för optisk kabel (Toslink) eller analog 3,5 mm-kontakt
- 5 Strömknapp
- 6 Knappar för volym upp och ner (kalibrering)

Liten storlek (L: 63 mm x B: 63 mm x H:12 mm)

Phonak Remote – den lättanvända fjärrkontrollssappen




Phonak Remote app är skapad för att förbättra användbarheten när man använder en fjärrkontroll. Det är en enkel kontroll för funktionerna i hörapparaterna som visas i mobiltelefonen utan något extra tillbehör.

Funktionsöversikt

- Justering av volymen i hörapparaterna på båda sidor eller individuellt på varje sida
- Programlista med direktval av tillgängliga lyssningsprogram
- Möjlighet att anpassa namnet på de tillgängliga lyssningsprogrammen i appen
- Val av tillgängliga ljudkällor anslutna till hörapparaterna
- Enkel justering av omgivningsbalans i hörapparaten vid streaming från en ljudkälla
- Separat justering av volymnivå för Tinnitusbrus, när det finns tillgängligt i hörapparaten
- Kontrollera genomsnittlig användningstid för anslutna hörapparater i appen
- Batteristatus (laddningsbara hörapparater)
- Konfiguration av Automatiskt på när den inte laddar (laddningsbara hörapparater)


Om du vill se videos om hur man använder och ställer in Phonak Remote App på din telefon, se www.phonakpro.se/remoteapp

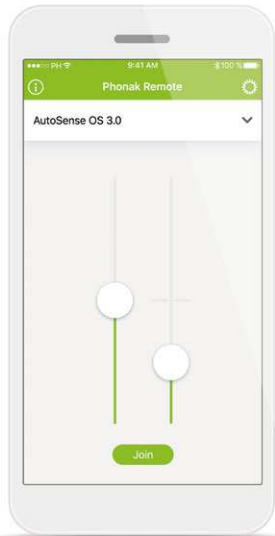


Volymjustering
för varje sida



Omgivningsbalans
vid ljudstreaming

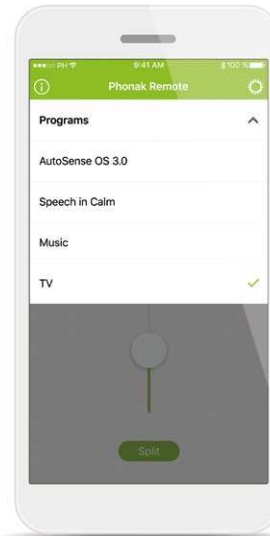

Programval
och anpassning

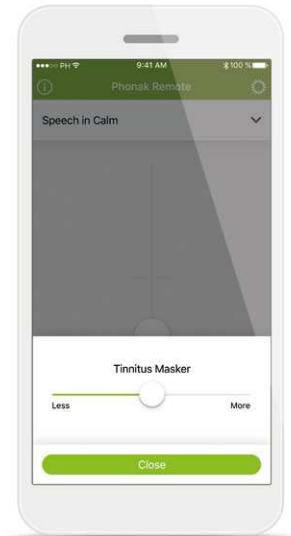

Intensitet för tinnitusbrus

Kompatibilitet

- Phonak Remote App är kompatibel med Phonak hörapparater med Bluetooth®-anslutning.
- Phonak Remote kan användas till telefoner med Bluetooth® Low Energy (BT-LE) och är kompatibel med iPhone 5s och senare telefoner med iOS Version 10.2 eller senare.
- Phonak Remote kan användas med Android-telefoner som har certifierats med Google Mobile Services med stöd för Bluetooth 4.2 och Android OS 6.0 och senare.

Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se