

# Phonak Audeo™ L ●

## Produktinformation

Phonak Audeo L är ett omfattande RIC-sortiment för lätta till mycket grava hörselnedsättningar. Phonak Audeo L omfattar tre modeller, tre funktionsnivåer och fem externa hörtelefoner, inklusive ActiveVent™.

Phonak Audeo L drivs med innovativ teknik på plattformen Phonak Lumity och är en hörapparat för klienter som föredrar hörapparater av RIC-typ.





# Produktbeskrivning



Audéo L-R  
Audéo L-R Trial  
L90/L70/L50

Audéo L-RT  
Audéo L-RT Trial  
L90/L70/L50

Audéo L-RL  
Audéo L-RL Trial  
L90/L70/L50

Flerfunktionsknapp		•	•	•
Telespole			•	
Bluetooth®		•	•	•
Hydrofobisk yta		•	•	•
IP-klass		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Mått	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm	30,3 x 12,6 x 8,1 mm	29,5 x 12,9 x 9 mm
	Vikt	2,2 g	2,6 g	2,8 g
Laddningstider <sup>2</sup>	0 % till 100 %	3 timmar	3 timmar	3 timmar
	0 % till 80 %	1,5 timmar	1,5 timmar	2 timmar
	30 min. anpassning	15 minuter	15 minuter	20 minuter

## S Receiver

Max Utnivå (dB SPL)	2cc coupler	111	111	111
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	47	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000

## M Receiver

Maximal utnivå (dB SPL)	2cc coupler	114	114	114
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	51	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000

## MAV Receiver

Maximal utnivå (dB SPL)	2cc coupler	119	119	119
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	50	50	50
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000

## P Receiver

Maximal utnivå (dB SPL)	2cc coupler	122	122	122
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	59	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300

## UP Receiver

Max Utnivå (dB SPL)	2cc coupler	132	132	132
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	71	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100

# Färger



P1  
Sand Beige



H0  
Beige



P3  
Sandalwood



P4  
Chestnut



P5  
Champagne



P6  
Silver Gray



P7  
Graphite Gray



P8  
Velvet Black

<sup>1</sup> IP68 indikerar att hörsapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

<sup>2</sup> Faktisk laddningstid beror på kvarstående batteritid, men överskrider inte 3 timmar.



# Funktionsnivåer

	Premium	Avancerad	Standard
<b>AutoSense OS™ 5.0</b>			
Komfort i eko	•		
Tal i bil	•		
Tal i starkt buller	•		
Musik	•	•	
Komfort i buller	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Mediatalk + mikrofon	•	•	•
Mediamusik + mikrofon	•	•	•
<b>Övriga program</b>			
Max. ytterligare program	4	4	4
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller	•	•	
Tal i 360°	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
<b>Streamingprogram</b>			
RogerDirect + mikrofon	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•

	Premium	Avancerad	Standard	
<b>Funktioner</b>				
SmartSpeech™ Technology	SpeechSensor	•		
	Speech Enhancer	•		
	StereoZoom 2.0	•	•	
	Dynamic Noise Cancellation	•	•	
	Motion Sensor Hearing	•	•	•
	RogerDirect™	•	•	•
	Streaming med Roger och riktmik	•	•	•
	UltraZoom	•	•	•
	EchoBlock	•		
	Tryckkontroll			
	- Siri/Google-assistent	•	•	
	- Pausa/återuppta streaming	•	•	
	- Ta emot/avsluta telefonsamtal	•	•	
	SoundRelax	•	•	
	DuoPhone	•	•	•
	Real Ear Sound	•	•	•
	Hälsfunktioner	•	•	•
	WindBlock	•	•	•
	Brukarbaserad fininställning	•	•	•
	Tinnitusbalans	•	•	•
Autoacklimatisering	•	•	•	
Omgivningsbalans	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	
WhistleBlock	•	•	•	
NoiseBlock	•	•	•	
QuickSync	•	•	•	
AOV	•	•	•	
Kanal för fininställning	20	20	16	

## Anpassning


	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 eller senare	8.0 eller senare	8.0 eller senare
Noahlink Wireless	•	•	•



# Akustisk koppling

Längd	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP Receiver
Finns i fyra olika längder (0, 1, 2, 3), vänster och höger	•	•	•	•	•
<b>Dome</b>					
Cap dome	•	•		•	
Öppen dome Finns i tre storlekar (S, M, L)	•	•		•	
Ventilerad dome Finns i tre storlekar (S, M, L)	•	•		•	
Power dome Finns i tre storlekar (S, M, L)	•	•		•	
<b>SlimTip*</b>					
Akryl	•	•		•	
Silikon	•	•		•	
Titanium AV			•		
Universal AV Finns i fyra former (A, B, C, D)			•		
<b>cShell</b>					
Akryl	•	•		•	•
Titanium	•	•		•	•
<b>Anpassningsområden</b>					

\*Finns med alternativ för extra kanallängd

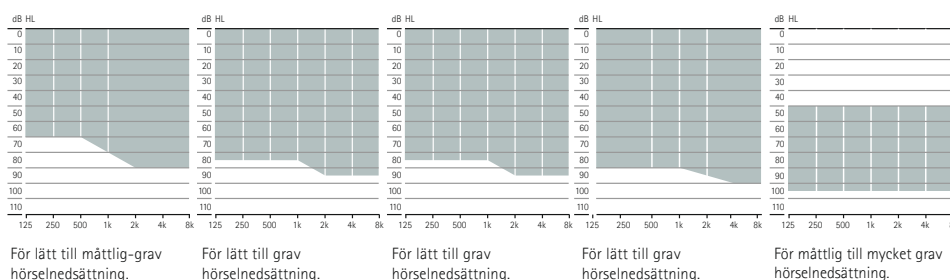

## SmartSpeech™ Technology

SmartSpeech Technology representerar Phonaks engagemang i att utveckla funktioner som förbättrar taluppfattningen och minskar lyssningsansträngningen i olika lyssningsmiljöer<sup>1</sup>. Övriga funktioner inkluderar Speech Enhancer, Dynamic Noise Cancellation och Motion Sensor Hearing. Med Phonak Audéo™ Lumity introducerar vi två nya funktioner: StereoZoom 2.0 och SpeechSensor utöver de befintliga fördelarna med ActiveVent™ och RogerDirect™.

## Phonak Audéo L Trial™

Phonak Audéo L Trial går snabbt att ställa in på önskad funktionsnivå. Alla tekniska nivåer i en Phonak Audéo L Trial ger dig möjlighet att tillhandahålla rätt funktionsnivå på en gång eller en hörapparat vid t.ex. reparation.

<sup>1</sup> Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, hämtade från www.phonakpro.com/ evidence i februari 2022.

Latzel, M. och Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News under utveckling. Förväntas under sommaren 2022.

Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411.

## Laddare till Phonak Audéo L



### Phonak Charger Ease

Phonak Charger Ease är en kompakt laddare med magneter i laddningsspårerna som gör det lätt att sätta i och ta bort Audéo L-R och RT. Den har en vanlig USB-C-laddningsport som lyser upp när ström tillförs.



### Phonak Charger Case Go och Phonak Life Charger

Det finns ytterligare två laddare tillgängliga för Audéo L-RL. Phonak Charger Case Go har ett inbyggt batteri som kan ladda två hörapparater upp till tre gånger. Båda laddarna har en vanlig USB-C-laddningsport och LED-lampan på baksidan lyser upp när ström tillförs.

## Phonak Audéo L Bluetooth®-versioner

Direktstreaming av ljud/samtal

Trådlös Bluetooth® 4.2-teknik och de flesta äldre telefoner med Bluetooth

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

## Trådlöst kommunikationssortiment

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50
<b>Trådlösa tillbehör</b>			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•
<b>Roger</b>			
RogerDirect™	•	•	•
<b>Appar</b>			
myPhonak	•	•	•

Mer information finns på [www.phonakpro.se/audeolumity](http://www.phonakpro.se/audeolumity)

Mer information om Roger-mikrofoner finns på [www.phonakpro.se/roger](http://www.phonakpro.se/roger)

Mer information om eSolutions finns på [www.phonakpro.se/smartapps](http://www.phonakpro.se/smartapps)



## life is on

Vår drivkraft har sedan 1947 varit att förbättra livskvaliteten för alla med nedsatt hörsel genom att öppna nya akustiska världar. Vi på Phonak är övertygade om att höra bättre bidrar till att man mår bättre och att god hörsel därmed är väsentlig för att leva livet fullt ut. Hörseln är direkt kopplad till socialt, känslomässigt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda ett brett utbud av innovativa hörsellösningar. Tillsammans med våra audionomer fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast – att förbättra taluppfattning, påverka människors liv och ha en positiv inverkan på samhället som helhet.

[www.phonak.se](http://www.phonak.se)



027-0667-09/V3.00/2022-08/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved