

Phonak Sky™ L.

Produktinformation

Phonak Sky Lumity är ett omfattande sortiment av bakom-örat apparater för barn med lätt till mycket grav hörselnedsättning.

Sky L använder Phonak SmartSpeech™ Technology och är ett bra val för barn på vår mest avancerade plattform Phonak Lumity.



Produktbeskrivning



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50



Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50


Batteristorlek		312	Inbyggt uppladdningsbart	13	675
Pediatrika LED-mönster		•	•	•	•
Telespole		•		•	•
Kompatibilitet med CROS L			•		
Bluetooth®		•	•	•	•
Hydrofobiskt hölje		•	•	•	•
IP-klass		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Mått	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3 mm	36,7 x 16,4 x 8,5 mm	40,0 x 16,9 x 8,5 mm	42,6 x 18,8 x 8,6 mm
	Vikt	2,18 g	3,68 g	4,40 g	4,60 g
Laddningstider ²	0 % till 100 %		3 tim		
	0 % till 80 %		1,5 tim		
	30 min.				
	anpassning		10 min.		

		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Max. utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	128	122	130	129	139	133	141	134
Max. förstärkning (dB)	2 cc coupler	63	58	68	69	81	75	84	78
Frekvensområde (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8 000	<100 - > 5 700	<100 - > 7 100	<100 - >4900	<100 - > 5 700	<100 - > 4 700	<100 - > 4 700
Strömförbrukning (mA)		1.6	1.6			2.1	2.2	3.3	2.8


Anpassningsområden

■ DSL pediatrikt Anpassningsområde
■ APD/NAL-anpassningsområde


HE11 680

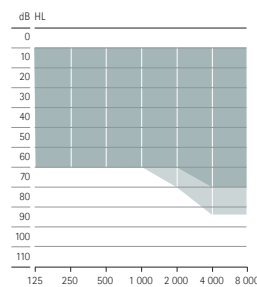


HE11 680

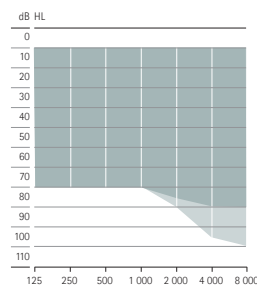


HE11 680

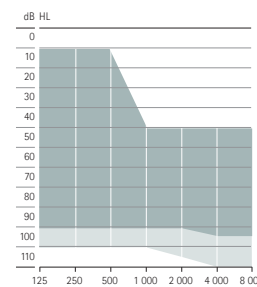


HE11 680

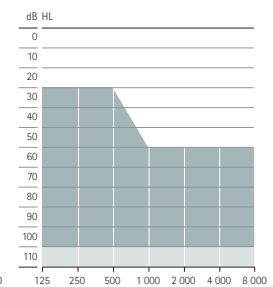


SlimTube 4.0

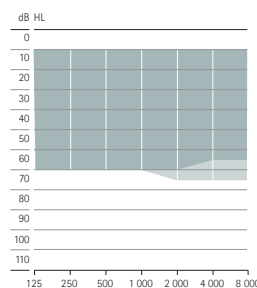

SlimTube 4.0

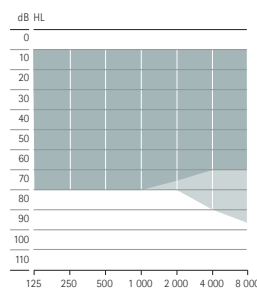

SlimTube 4.0

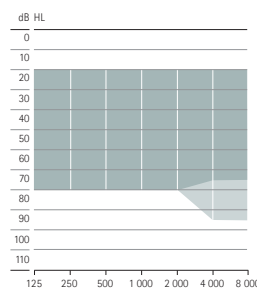

Grav till mycket grav
hörselnedsättning³

Lätt till måttlig
hörselnedsättning³

Lätt till måttligt grav
hörselnedsättning³

Lätt till grav
hörselnedsättning³

1 IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i 8 timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

2 Faktiskt laddningstid beror på den kvarstående batteritiden och kan påverkas av temperaturförhållanden.

3 När DSL-anpassningsformeln används.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

Funktionsnivåer

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Avancerad L70	Standard L50
Tal i starkt buller	•		
Tal i bil	•		
Komfort i eko	•		
Musik	•	•	
Komfort i buller	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Media tal + mik.	•	•	•
Media musik + mik.	•	•	•
Övriga program			
Max. ytterligare program	4	4	4
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller	•	•	
Tal i 360°	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
Telefon via t-spole	•	•	•
± mikrofon ¹			
Offentlig t-spole ± mikrofon ¹	•	•	•
Streamingprogram			
RogerDirect™ + mikrofon	•	•	•
Phonak PartnerMic™	•	•	•
+ mikrofon			
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•

Funktioner	Premium L90	Avancerad L70	Standard L50
SpeechSensor	•		
Speech Enhancer	•		
StereoZoom 2.0	•	•	
Dynamic Noise Cancellation	•	•	
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•
RogerDirect	•	•	•
EchoBlock	•		
Tryckkontroll ²			
- Siri/Google-assistent	•	•	
- Pausa/återuppta streaming	•	•	
- Ta emot/avsluta telefonsamtal	•	•	
SoundRelax	•	•	
DuoPhone	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Roger™ och riktmikrofon	•	•	•
UltraZoom	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•
WindBlock	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
AutoAcklimatisering	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
QuickSync	•	•	•
AOV	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	20	16

SmartSpeech Technology

¹ Ej tillgängligt för Phonak Sky L-PR

² Endast tillgängligt för Phonak Sky L-PR

³ Endast tillgängligt för Phonak Sky L-UP

Anpassning

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Phonak Target	9.1 eller senare	9.0 eller senare	9.1 eller senare	9.0 eller senare
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHlink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Akustisk koppling

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Ljudutgång					
Standardslangfäste	Dämpad (HE11 680), genomskinlig och ytterligare 6 barnvänliga färger	•	•	•	•
	Odämpad (HE 11) endast i genomskinlig färg			•	•
Barnsäkert slangfäste (mini)	Dämpad (HE11 680), genomskinlig och ytterligare 6 färger	•	•	•	•
	Odämpad (HE 11) endast i genomskinlig färg			•	•
SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster och höger samt i fem olika längder (00,0,1,2,3)	•	•	•	
Öroninsats för SlimTube					
Dome	Cap dome	•	•	•	
	Öppen dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	•	
	Ventilerad dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	•	
	Power dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)	•	•	
SlimTip	Akryl	•	•	•	
	Silikon	•	•	•	
Öroninsats för slangfäste					
Öroninsats		•	•	•	•

Färger på höljet och slangfästet

Hölje



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Slangfäste



R1
Green



R2
Yellow



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blue



Q7
Purple



13
Transparent

Laddare till Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR har Lumity-funktionerna samt fördelen att de är laddningsbara.

Dina klienter får en hel dag av lyssnande, inklusive streaming*.

* Förväntad batteritid på 16 timmar inklusive 10 timmars Roger- eller ljudstreaming.



Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial hörapparaterna kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Det innebär att du kan optimera dina klienters hörapparater redan vid det första besöket eller ge dem en ersättningshörapparat när deras hörapparat repareras. Sky L Trial inkluderar också en förinstallerad Rogermottagare för enkel demonstration och utprovning av valfri Rogermikrofon.

Phonak Sky L Bluetooth® versioner

Direktstreaming av ljud/samtal

Trådlös Bluetooth 4.2-teknik och många äldre telefoner med Bluetooth

Trådlöst kommunikationssortiment

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50
Trådlösa tillbehör				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
Rogermikrofoner	•	•	•	•
App				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Mer information: www.phonak.se/sky-lumity

Mer information om Roger-mikrofoner: www.phonak.se/roger-foer-skola

Mer information om myPhonak Junior: www.phonak.se/myphonak-junior

life is on

Sedan 1947 har Phonak arbetat för att förbättra livskvalitet genom att öppna upp nya akustiska världar. Redan när företaget grundades så drevs vi av en formativ övertygelse: Att höra bra är lika med att må bra och är därmed avgörande för att leva sitt liv fullt ut. Hörsel kan faktiskt direkt kopplas till socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Vårt mål, idag och i framtiden, är att kunna erbjuda det bredaste sortimentet med innovativa hörsellösningar. Tillsammans med våra audionomer fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast: att förbättra taluppfattningen, förändra människors liv och ha en positiv inverkan på samhället som helhet.

www.phonak.se



027-0697-09|V1.00|2024-02|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved