

Phonak Bolero™ Marvel



Love at first sound

För mer information, besök www.phonakpro.se

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Med Phonak Bolero Marvel introducerar vi multifunktionella hörapparater som förmedlar en kärlek till ljudet

Love at first sound... varje dag!

När vi säger "love at first sound" menar vi inte bara första gången dina klienter använder Phonak Bolero Marvel, utan varje gång de använder den. När du anpassar Marvel hörapparater kan de förvänta sig **oslagbar ljudkvalitet på en gång**.

Den nya generationens Phonakteknik känner igen och anpassar sig automatiskt till fler lyssningssituationer än någonsin¹. Med AutoSense OS™ 3.0 och Binaural VoiceStream Technology™ i alla modeller, får dina klienter bättre taluppfattning i bullriga miljöer och mindre lyssningsansträngning.

Sammanfattning:


- Exceptionell ljudkvalitet från första början²
- Förbättrad taluppfattning i bullrig miljö³
- Minskad lyssningsansträngning i buller⁴
- Bästa möjliga ljudkvalitet vid streaming⁵

Kraften hos laddningsbar teknik

Phonak är en pionjär inom laddningsbar teknik i hörapparatbranschen med introduktionen av laddningsbara litium-jonbatterier. Marvel hörapparater finns också med denna teknik. Det går snabbt att ladda dem och batterierna håller länge. De aktiveras automatiskt när du tar bort dem från laddaren och slås av när du sätter dem tillbaka i laddaren. Dina klienter får obegränsat hörande och streaming hela dagen.


Sammanfattning:

- Lätt att använda - inget mer krångel med batteribyten!
- Hörande hela dagen, inklusive streaming
- Supersnabb laddning
- Batterierna håller i upp till 6 år

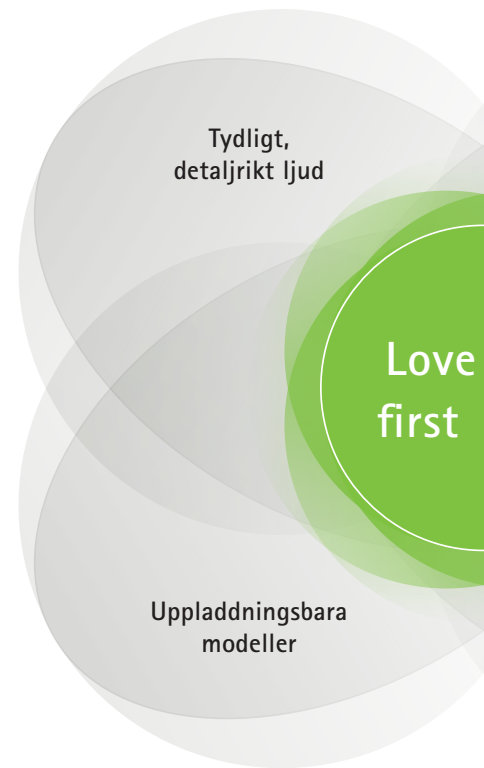

Vad är det som gör Marvel så fantastisk?

Phonak Bolero Marvel kan **anslutas till mobiltelefoner med iOS® eller Android™ eller andra telefoner med Bluetooth®** för att streama olika typer av ljud till båda öronen. Dina klienter kan ringa helt hands-free med hörapparaternas inbyggda mikrofoner. Dessutom kan de höra ljudaviseringar via hörapparaterna. Marvel har ljud i stereokvalitet för streaming av musik, filmer, ljudböcker, podcasts med mera.

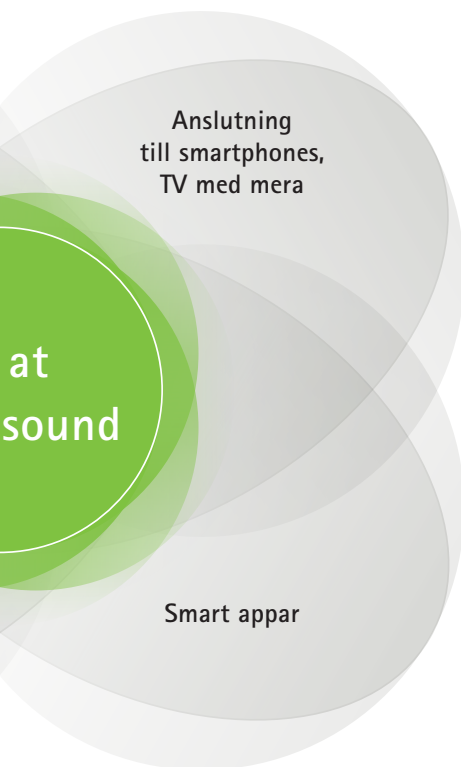

Phonak Bolero Marvel har dessutom vår egen AirStream™ Technology **som ger streaming med ljudkvalitet i toppklass från TV och stereosystem.**⁵ Dina klienter kan se på TV med Phonak TV Connector, en enkel lösning utan installation. Det är precis som att använda trådlösa hörlurar, om inte bättre, eftersom Marvel kan skilja mellan tal- och musiks signaler i överföringen och justera ljudet automatiskt för bästa möjliga kvalitet.

Sammanfattning:

- Anslutning till mobiltelefoner – iOS och Android
- Kan anslutas till vardagselektronik
- Hörapparaterna kan användas som trådlösa stereohörlurar
- Extra lång streamingtid tack vare AirStream Technology

Roger™ tekniken ger bättre hörsel funktion i buller och på avstånd.⁶ Phonak Bolero Marvel har RogerDirect™ som möjliggör streaming med Rogertechnik direkt till Marvel hörapparater utan att behöva ansluta en extern mottagare.

Sammanfattning:

- Marvel och Roger, den optimala lösningen för krävande lyssningssituationer
- Utformad för att förbättra taluppfattningen i buller och på avstånd
- Diskreta och attraktiva lösningar

App-solut fantastisk!

Phonaks nya digitala tjänsteplattform har utformats för att förbättra din klients personliga lyssningsbehov. Via appen myPhonak kan dina klienter med den avancerade fjärrkontrollsfunktionen ändra inställningarna i hörapparaten efter sina individuella behov.

Sammanfattning:

- Ljudjustering i realtid
- Fjärrsupport via realtidsvideo (ej tillgängligt i Sverige)

Telefonsamtal kan vara krävande, särskilt med bakgrundsbuller. Med Phonaks myCall-to-Text-app kan dina kunder höra samtalen i sina Marvel hörapparater och läsa i realtid vad personen i den andra telefonen säger (ej tillgänglig i Sverige). En gratisversion av appen myCall-to-Text är tillgänglig (dock ej i Sverige). Prova den nu!

Produktbeskrivning




Bolero M-M
Bolero M-M Trial
M90/M70/M50




Bolero M-PR
Bolero M-PR Trial
M90/M70/M50

Batteristorlek		312			
Multifunktionsknapp		•		•	
Telespole		•		•	
Bluetooth®		•		•	
Nanohölje		•		•	
IP-klass		IP68 ⁷		IP68 ⁷	
Mått	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3		36,7 x 16,4 x 8,5	
	Vikt	2,18 g		3,71 g	
Laddningstider ⁸	0% till 100%			3 tim	
	0% till 80%			1,5 tim	
	30 min. anpassning			10 min.	
		SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680
Max utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	122	128	127	130
Max förstärkning (dB)	2 cc coupler	58	63	60	66
Frekvensområde (Hz)		<100 - >6500	<100 - >8000	<100 - >7000	<100 - >6800
Strömförbrukning (mA)		1,5	1,6		

Anpassningsområde

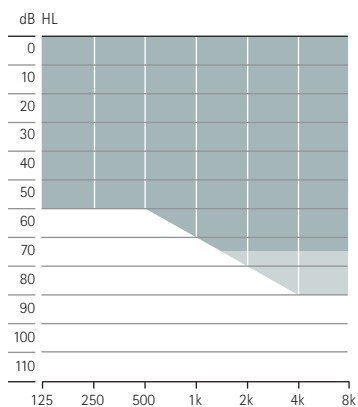

Lätt till måttligt grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

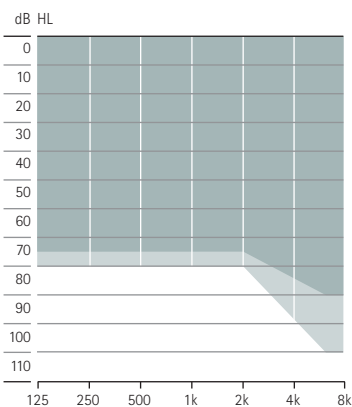

Lätt till grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Färger



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



T7
Alpine White



HO
Beige

⁷ IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt vatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

⁸ Faktisk laddningstid beror på kvarstående batteritid, men överskrider inte 3 timmar.

Funktionsnivåer

AutoSense OS™ 3.0	Premium M90	Avancerad M70	Standard M50
Lugna situationer	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Tal i starkt buller ³	•		
Tal i bil	•		
Komfort i eko	•		
Media tal + mikrofon	•	•	•
Media musik + mikrofon	•	•	•
Övriga program			
Max. ytterligare program	3	3	3
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller	•	•	
Tal i 360°	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
Streamingprogram			
RogerDirect + mikrofon	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•

Funktioner	Premium M90	Avancerad M70	Standard M50
UltraZoom	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•
DuoPhone	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	16	12
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
WindBlock	•	•	
EchoBlock	•		
SoundRelax	•	•	
QuickSync	•	•	•
Akustiskt optimerad ventilation	•	•	•
Tinnitusbalans	•	•	•
autoAcklimatisering	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
Inställning för Roger och riktmik	•	•	•

Anpassning

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50
Phonak Target	6.1 eller senare	6.1 eller senare
Noahlink Wireless	•	•

1 Rodrigues, T. och Lieve, S (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new och enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hämtad från www.phonakpro.com/evidence, den 17 oktober, 2018.
 2 Jansen, S. och Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, hämtad från www.phonakpro.com/evidence, den 17 oktober, 2018.
 3 Stewart, E., Rakita, L. och Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, hämtad från www.phonakpro.com/evidence, den 26 februari, 2019.
 4 Winneke, A., Latzel, M. och Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, hämtad från www.phonakpro.com/evidence den 17 oktober 2018.
 5 Legarth, S., Latzel, M. och Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, hämtad från www.phonakpro.com/evidence den 17 oktober 2018.
 6 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

Akustisk koppling

Ljudutgång

Slangfäste	Dämpat (HE11 680) transparent
SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster och höger samt i fem olika längder (00, 0, 1, 2, 3)

Öroninsats för tunn ljudslang

Dome	Cap dome	
	Öppen dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
	Ventilerad dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
	Power dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
SlimTip	Akryl	
	Silikon	
	Titan	

Öroninsats för slangfäste

Öroninsats	
Universell insats	

Phonak Bolero M Trial™

De nya Phonak Bolero M Trial hörapparaterna kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Det innebär att du kan optimera dina klienters hörsellösning redan vid det första besöket eller ge dem en ersättningshörapparat när deras hörapparat repareras.

Phonak Charger BTE RIC

För laddning av de uppladdningsbara hörapparaterna Bolero Marvel och Audéo Marvel. Laddaren har plats för öroninsatser, laddningsplats där två hörapparater kan laddas samtidigt, en USB-C-strömkontakt och ett indikatorljus.



Phonak Bolero Marvel Bluetooth®-versioner

Direktstreaming av samtal/ljud

Bluetooth® 4.2 trådlös teknik och många äldre telefoner med Bluetooth

Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Trådlöst kommunikationssortiment

	Bolero M-M Bolero M-M Trial M90/M70/M50	Bolero M-PR Bolero M-PR Trial M90/M70/M50
Trådlösa tillbehör		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic™	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger™		
Roger™ mikrofoner	•	•
App		
myPhonak	•	•
Phonak Guide	•	•
MyCall-to-Text (ej tillgänglig i Sverige)	•	•

För information om Bolero Marvel besök www.phonakpro.se/boleromarvel

För information om Rogermikrofoner, besök www.phonakpro.se/roger

För information om Phonakappar besök www.phonakpro.se/smartapps

Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. Vi har brunnit för detta uppdrag i över 70 år och utvecklat banbrytande hörsellösningar som hjälper människor att lyckas socialt och emotionellt. Life is on.

www.phonakpro.se