

# Phonak Naída™ Marvel



Love at first sound

För mer information, besök [www.phonakpro.se](http://www.phonakpro.se)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# Med Phonak Naída Marvel introducerar vi multifunktionella hörapparater som förmedlar en kärlek till ljudet

När vi säger "love att first sound" menar vi inte bara första gången dina klienter använder Phonak Naída Marvel utan varje gång de använder den. Från det ögonblick du först anpassar hörapparaterna så kan de förvänta sig oslagbar hörselnsfunktion.

Den nya generationens Phonakteknik känner igen och anpassar sig automatiskt till fler lyssningssituationer än någonsin.<sup>1</sup> Med AutoSense OS™ 3.0 och Binaural VoiceStream Technology™, får dina klienter bättre minnesåterskapning och minskad lyssningsansträngning i buller.<sup>2</sup>


## Sammanfattning:

- Bättre talupfattning i buller med Roger<sup>3</sup>
- Minskad lyssningsansträngning i buller\*<sup>2</sup>
- Bättre minnesåterskapning i buller\*<sup>2</sup>
- Världens första super power hörapparat med klassificering av ljudsignaler<sup>1</sup>

## Pålitlig

Naída är den mest betrodda hörapparaten.<sup>4</sup> Tack vare ingenjörskonst på högsta nivå och innovativ design kan Naída Marvel ge all kraft som behövs för att hantera en grav till mycket grav hörselnedsättning. Sedan lanseringen av vår första hörapparat 1978 så har vi kontinuerligt skapat hörsellösningar för att förbättra människors liv. Naída M-SP innehåller Marvelteknik, och är en avancerad hörapparat med teknik som ger den kraft som behövs för grava hörselnedsättningar.

Människor med grav till mycket grav hörselnedsättning är väldigt beroende av sina hörapparater och kräver en apparat som de kan lita på. Det robusta höljet gör att dina klienter kan fortsätta att utöva sina dagliga aktiviteter och vara säkra på att hörapparaterna kommer att fungera väl och klara även de svåraste lyssningssituationerna.

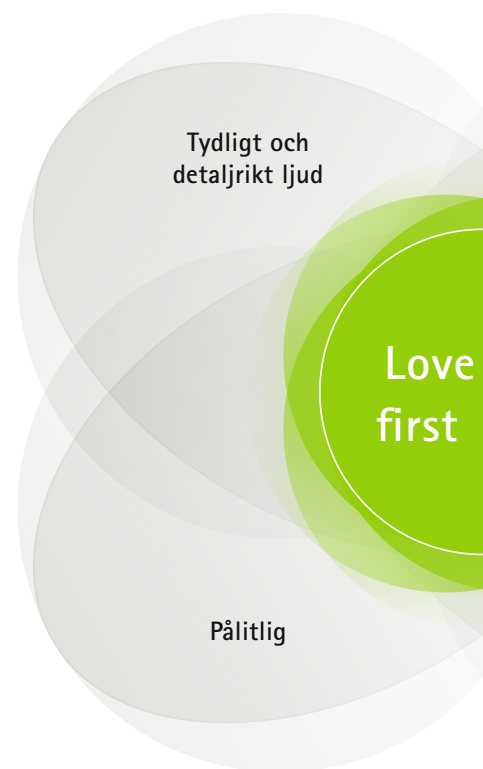


# Produktbeskrivning



**Naída M-SP**  
**Naída M-SP Trial**  
 M90/M70/M50

Batteristorlek		13
Flerfunktionsknapp		•
Telespole		•
Bluetooth®		•
Nanohölje		•
IP-klass		IP68 <sup>5</sup>
Mått	L x B x D	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33)
	Vikt	4,4 g
		<b>HE11</b> <b>HE11 680</b>
Max utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	139      133
Max förstärkning (dB)	2 cc coupler	81      75
Frekvensområde (Hz)		<100 - >5000      <100 - >5000
Strömförbrukning (mA)		2,1      2,0

## Anpassningsområde

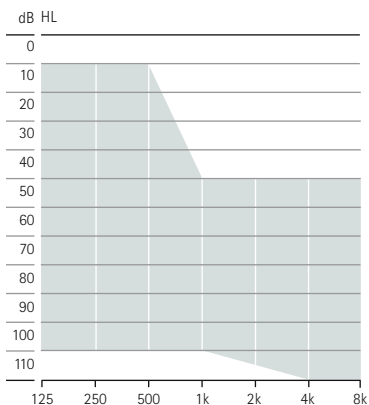

Måttlig till mycket grav hörselnedsättning,  
 alla audiometriska konfigurationer

■ HE11 680

# Färger



**P1**  
Sand Beige



**P3**  
Sandalwood



**P4**  
Chestnut



**P5**  
Champagne



**P6**  
Silver Gray



**P7**  
Graphite Gray



**P8**  
Velvet Black



**T7**  
Alpine White



**HO**  
Beige

# Funktionsnivåer

	Premium M90	Avancerad M70	Standard M50
<b>AutoSense OS 3.0</b>			
Lugna situationer	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	
Tal i starkt buller.	•		
Tal i bilen	•		
Komfort i eko	•		
Media tal + mik.	•	•	•
Media musik + mik.	•	•	•
<b>Övriga program</b>			
Max. ytterligare program	3	3	3
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller.	•	•	
Tal i 360°	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
<b>Streamingprogram</b>			
RogerDirect + mikrofon	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•

<b>Funktioner</b>	Premium M90	Avancerad M70	Standard M50
UltraZoom	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•
DuoPhone	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	16	12
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
WindBlock	•	•	
EchoBlock	•		
SoundRelax	•	•	
QuickSync	•	•	•
Akustiskt optimerad ventilation	•	•	•
Tinnitusbalans	•	•	•
autoAcklimatisering	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
Inställning för Roger och riktmik	•	•	•

# Anpassning

Naída M-SP  
Naída M-SP Trial  
M90/M70/M50

Phonak Target	6.2 eller senare
Noahlink Wireless	•
Noahlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

# Akustisk koppling

Ljudutgång	Slangfäste	Dämpad (HE11 680) eller odämpad (HE11), transparent	
	SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster och höger samt i fem olika längder (00, 0, 1, 2, 3)	
Öroninsats för tunn ljudslang	Dome	Cap dome	
		Öppen dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
		Ventilerad dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
		Power dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
	SlimTip	Akryl	
		Silikon	
Titanium			
Öroninsats för slangfäste	Öroninsats		
	Universell insats		

## Phonak Trial™

De nya Phonak Naída M Trial hörapparaterna kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Det innebär att du kan optimera dina klienters hörapparater redan vid det första besöket eller ge dem en ersättningshörapparat när deras hörapparat repareras.

- 1 Rodrigues, T., & Liebe, S. (2018). AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hämtad från [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence), den 19 februari, 2020.
- 2 Winneke, A., Latzel, M. och Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuskriptet under förberedelse. Förväntas början av 2020.
- 3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210.
- 4 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Kontakta [marketinsight@phonak.com](mailto:marketinsight@phonak.com) om du vill ha ytterligare information. Baserad på en Customer Satisfaction Survey 2017.
- 5 IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt vatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

All användning av sådana märken av Sonova AG sker under licens.

iOS är ett varumärke som tillhör Cisco Technology, Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.

# Phonak Naída Marvel Bluetooth®-versioner

---

## Direktstreaming av ljud

---

Bluetooth® 4.2 trådlös teknik och många äldre telefoner med Bluetooth

---

Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

## Trådlöst kommunikationssortiment

		Naída M-SP Naída M-SP Trial M90/M70/M50
Trådlösa tillbehör	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	Roger-mikrofoner	•
App	myPhonak	•
	Phonak Guide	•


Mer information om Naída Marvel finns på [www.phonakpro.se/naidamarvel](http://www.phonakpro.se/naidamarvel)

Mer information om Roger-mikrofoner finns på [www.phonakpro.se/roger](http://www.phonakpro.se/roger)

Mer information om Phonak-appar finns på [www.phonakpro.se/smartapps](http://www.phonakpro.se/smartapps)

## Vad är det som gör Marvel så fantastisk?

Naída Marvel är världens första super power bakom-örat med handsfreesamtal som streamar ljud direkt till iOS, Android eller andra Bluetooth-aktiverade enheter. Dina klienter kan ringa handsfree via hörapparatens inbyggda mikrofoner. Dessutom kan de höra ljudaviseringar i hörapparaterna. Naída har även ljud i stereokvalitet för streaming av musik, filmer, ljudböcker, poddar med mera.

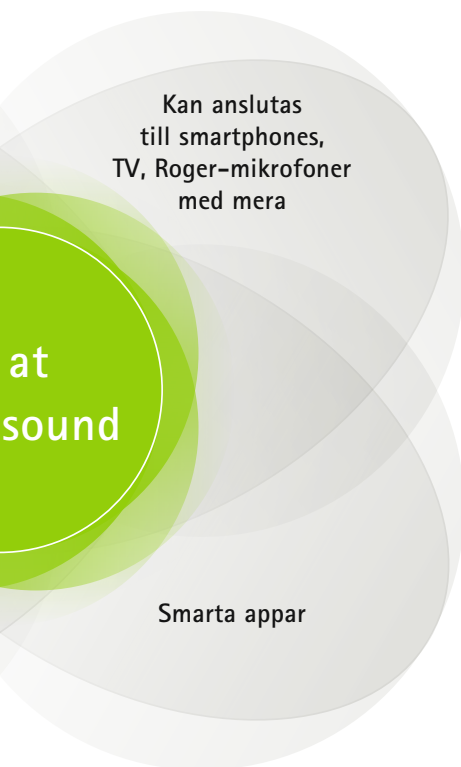

Naída har vår egen AirStream™ Technology för streaming från TV och ljudsystem. Dina klienter kan se på TV och film med TV Connector, en enkel lösning utan installation. Det är precis som att använda trådlösa hörlurar, om inte bättre. Marvel hörapparater kan skilja mellan tal- och musiksignaler i överföringen och justera ljudet automatiskt för bästa möjliga kvalitet.

### Sammanfattning:

- Anslutning till mobiltelefoner – iOS och Android
- Kan anslutas till vardagselektronik
- Hörapparaterna kan användas som trådlösa stereohörlurar
- Extra lång streamingtid tack vare AirStreamTechnology

Roger™-tekniken ger bättre hörsel-funktion i buller och på avstånd.<sup>3</sup> Phonak Naída Marvel har RogerDirect™ som möjliggör streaming med Roger-teknik direkt till Marvel hörapparater utan att behöva ansluta en extern mottagare.

### Sammanfattning:

- Marvel och Roger, den optimala lösningen för krävande lyssningssituationer
- Gjord för att förbättra taluppfattningen i buller och på avstånd
- Diskreta och attraktiva lösningar

## App-solut fantastisk!

Phonaks nya digitala tjänsteplattform har utformats för att förbättra din klients personliga lyssningsbehov. Med **myPhonak-appen** kan dina klienter ändra inställningarna i hörapparatens efter sina behov individuella behov.

### Sammanfattning:

- Ljudjustering och anpassning i realtid

# Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

[www.phonakpro.se](http://www.phonakpro.se)