

Phonak Sky™ Link M.

Produktinformation



Produktbeskrivning




Sky Link M

Batteristorlek	13
Flerfunktionsknapp	•
Telespole	•
Bluetooth® 4.2 trådlös teknik	•
Hydrofobiskt hölje	•
IP-klass	IP68 ¹
Mått	L x B x D
	40,0 x 16,9 x 8,5 mm
	Vikt
	4,40 g

		HE11	HE11 680
Max. utnivå (dB SPL)	2cc coupler	139	133
Max. förstärkning (dB)	2cc coupler	81	75
Frekvensområde (Hz)		<100->5 000	<100->5 000
Strömförbrukning (mA)		2,1	2,0

Anpassningsområde

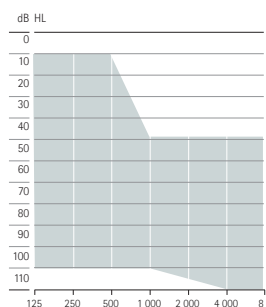

Lätt till grav hörselnedsättning,
alla audiometriska konfigurationer

■ HE11 680

Färger på höljet och slangfästet

Hölje



P1

Sand Beige



P4

Chestnut



P8

Velvet Black



Q3

Caribbean
Pirate



T3

Precious Pink



M7

Ocean Blue

Slangfäste



R1

Green



R2

Yellow



R3

Pink



R4

Orange



Q6

Blå



13

Transparent



Q7

Purple

¹ IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt sötvatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i 8 timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

Funktionsnivåer

AutoSense Sky OS 3.0

Lugna situationer	•
Tal i buller	•
Komfort i buller	•
Musik	•
Tal i starkt buller	•
Tal i bil	•
Komfort i eko	•
Media tal + mik.	•
Media musik + mik.	•

Övriga program

Max. ytterligare program	4
Komfort i eko	•
Tal i starkt buller	•
Tal i 360°	•
Tal i buller	•
Lugn situation	•
Komfort i buller	•
Ljudprocessor från örat*	•
Musik	•
Akustisk telefon	•
Individuellt program	•

Streamingprogram

RogerDirect + mikrofon	•
Phonak PartnerMic™ + mikrofon	•
Telefonsamtal + mikrofon	•

* Används endast i bimodala anpassningar

Funktioner

UltraZoom	•
SNR-Boost	•
DuoPhone	•
SoundRecover2	•
Brukarbaserad fininställning	•
Real Ear Sound	•
Kanaler för fininställning	20
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
WindBlock	•
EchoBlock	•
SoundRelax	•
QuickSync	•
Akustiskt optimerad vent	•
Autoacklimatisering	•
Omgivningsbalans	•
RogerDirect™	•
Inställning för Roger och riktmi	•

Anpassning

Phonak Target	7.0 eller senare
Advanced Bionics Target CI	•
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•
NOAHlink	•
HI-PRO, HI-PRO2	•

Akustisk koppling

Ljudutgång	slangfäste standard	Dämpat (HE 11 680) transparent och sex extra färger för barn (se sidan 2) Odämpat (HE 11) transparent och sex extra färger för barn
	Barnsäkert slangfäste	Mini dämpat (HE 11 680) transparent och sex extra färger för barn (se sidan 2) Mini odämpat (HE 11) transparent och sex extra färger för barn
	SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster och höger samt i fem olika längder (00, 0, 1, 2, 3)
Öroninsats till tunn ljudslang	SDS 4.0	Power dome och alla andra domes SDS 4.0 finns i tre storlekar (S, M, L)
	SlimTip	Akryl Silikon
Öroninsats till slangfäste	Individuellt tillverkad öroninsats	
	Universell insats	

Phonak Trial™

Om en testapparat behövs rekommenderas Phonak Sky M-SP Trial. Denna testapparat är inte kompatibel med AB-ljudprocessorn.

Kompatibilitet

Sky Link M kan användas:

- som en monaural anpassning
- som en binaural anpassning med två Sky Link M hörapparat
- som bimodal anpassning med en Advanced Bionics Sky CI M90 ljudprocessor

Trådlöst kommunikationssortiment

	Sky Link-M
Trådlösa tillbehör	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
Rogermikrofoner	•
Appar	
myPhonak Junior	•
AB Remote	•

myPhonak Junior är kompatibel med Sky Link M, endast monaural konfiguration eller tillsammans med en annan Sky Link M.

life is on

Sedan 1947 har Phonak arbetat för att förbättra livskvalitet genom att öppna upp nya akustiska världar. Redan när företaget grundades så drevs vi av en formativ övertygelse: Att höra bra är lika med att må bra och är därmed avgörande för att leva sitt liv fullt ut. Hörsel kan faktiskt direkt kopplas till socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande. Idag precis som i framtiden, är vårt mål att kunna erbjuda det bredaste sortimentet med innovativa hörsellösningar. Tillsammans med våra audionomer så fortsätter vi att fokusera på det som är viktigast: att förbättra taluppfattning, ändra människors liv och ha en positiv inverkan på samhället i sin helhet.

phonak.se

