

Phonak Sky™ Marvel



Love at first sound

För mer information, besök www.phonakpro.se

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Sky Marvel använder branschledande teknik som ger optimalt ljud med hög komfort, säkerhet och pålitlighet för alla delar av barnets liv.

Med det nya Sky Marvel-sortimentet introducerar vi en unik kombination av helt nya tekniska innovationer och viktiga barnspecifika funktioner. Vi vill inte ge barnen något annat än de allra bästa lösningarna för tal- och språkutveckling, taluppfattning och användarvänlighet. Sky Marvel har utformats för att optimera såväl mängden ljud som dess kvalitet och hjälper barnet att utvecklas socialt, emotionellt och kognitivt med kärlek från det allra första ljudet.

Klart och tydligt ljud

Världens första operativsystem som har utvecklats särskilt för barn

AutoSense Sky OS 3.0 har utformats för att känna igen krävande lyssningssituationer som barn ställs inför i sin vardag och ge rätt kombination av adaptiv bullerhantering för ökad komfort och minskad lyssningströtthet.¹ Med Sky Marvel introducerar vi AutoSense Sky OS 3.0, som nu även kan klassificera streamingsignaler. Tack vare detta får barnet höra tydligt och detaljrikt ljud när tal streamas och optimal ljudkvalitet vid musikstreaming.

Kan anslutas till smartphones, Roger™-mikrofoner med mera

Streamar direkt från både iOS® och Android™

Till skillnad från andra pediatrika hörapparater kan Sky Marvel anslutas direkt till praktiskt taget alla mobiltelefoner och Bluetooth®-aktiverade enheter. Den stöder parkoppling med två enheter och streamar ljud till båda öronen. I en värld där modern teknik är en central del av ett barns sociala liv och utbildning, möjliggör Sky Marvel intuitiv åtkomst och streaming med stereoljudkvalitet för tal, appar, musik, ljudböcker med mera.



¹ Feilner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids – Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, hämtad från www.phonakpro.com/evidence, den 19 augusti, 2019.
iOS är ett varumärke som tillhör Cisco Technology, Inc./Android är ett varumärke som tillhör Google, LLC.



Streamar direkt från Roger-mikrofoner

Med RogerDirect™ har barnen tillgång till Roger-teknik utan att behöva en extern mottagare. Roger-mottagare kan installeras trådlöst i Sky Marvel, vilket tar bort problemet med mottagarkompatibilitet. Den här oslagbara kombinationen erbjuds nu i det minsta paketet någonsin, vilket ger barn enklare tillgång till fler ord och fler samtal.² Sky med Roger är nu upp till 42% mindre och 32% lättare än den tidigare generationen.*

Uppladdningsbar

Sky M-PR laddas på bara 3 timmar och ger en hel dags lyssnande med 10 timmars Roger- eller mediastreaming.** Föräldrar, vårdnadshavare, lärare och barn kan vara trygga med att hörapparaten kommer att ha ström hela tiden.

Barnspecifik design

Branschledande pålitlighet

Med Sky Marvel kan barnen leka och utforska världen fritt, även om det blir lite blött. Marvel-hörapparater har tåliga höljen som skyddar mot vatten och damm (IP68-märkning).***

Barnsäkra funktioner

Unga lyssnare skyddas med ett barnsäkert slangfäste och en ny barnsäker batterilucka, så att batterierna förblir i hörapparaten och inte hamnar i små händer och munnar. Med Sky M-PR går det inte att ta ur och svälja de inbyggda uppladdningsbara litiumjonbatterierna.

Nya indikatorljus

Sky Marvel har ett nydesignat indikatorljus som är lätt att använda, diskret och som tydligt bekräftar hörapparatus status.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G. och Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

* Jämförelse mellan Sky M-M och Sky B-P + Roger 18 (designintegrerad mottagare)

** Faktisk laddningstid beror på den kvarstående batteritiden, men överskrider inte 3 timmar.

*** IP68 anger att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den tål att sänkas ner i vatten på 1 meters djup utan avbrott i 60 minuter och i en dammkammare i 8 timmar enligt standarden IEC 60529.


Produktbeskrivning



Sky M-M
Sky M-M Trial
M90/M70/M50

Batteri	312		
Flerfunktionsknapp	•		
Telespole	•		
Bluetooth®	•		
Nanohölje	•		
IP-klass	IP68		
Mått (L x B x D)	mm	31,3 x 14,1 x 7,3	
	tum	1,23 x 0,56 x 0,29 tum	
Vikt	g/oz	2,18/0,077	
Laddningstider	0 % till 100 %		
	0 % till 80 %		
	30 min. anpassning		
Maximal utnivå (2cc coupler)	SlimTube 4.0	HE11 680	
	dB SPL	122	128
	dB	58	63
Frekvensområde	Hz	<100 – 6500	<100 – 8000
Strömförbrukning	mA	1,5	1,6

Anpassningsområden

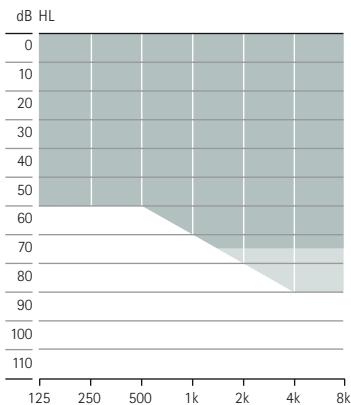


Lätt till måttligt grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer



Sky M-PR
Sky M-PR Trial
M90/M70/M50

Batteri	Inbyggt uppladdningsbart		
Flerfunktionsknapp	•		
Telespole	•		
Bluetooth®	•		
Nanohölje	•		
IP-klass	IP68		
Mått (L x B x D)	mm	36,7 x 16,4 x 8,5	
	tum	1,44 x 0,65 x 0,33 tum	
Vikt	g/oz	3,71/0,131	
Laddningstider	0 % till 100 %	3 tim	
	0 % till 80 %	1,5 tim	
	30 min. anpassning	10 min.	
Maximal utnivå (2cc coupler)	SlimTube 4.0	HE11 680	
	dB SPL	127	130
	dB	60	66
Frekvensområde	Hz	<100 – 7000	<100 – 6800
Strömförbrukning	mA	2,1	2,0

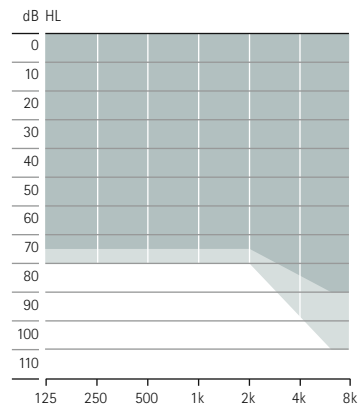


Lätt till grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer



Sky M-SP
Sky M-SP Trial
M90/M70/M50

Batteri	13		
Flerfunktionsknapp	•		
Telespole	•		
Bluetooth®	•		
Nanohölje	•		
IP-klass	IP68		
Mått (L x B x D)	mm	40 x 16,9 x 8,5	
	tum	1,57 x 0,67 x 0,33 tum	
Vikt	g/oz	4,4/0,155	
Laddningstider	0 % till 100 %		
	0 % till 80 %		
	30 min. anpassning		
Maximal utnivå (2cc coupler)	HE11	HE11 680	
	dB SPL	139	133
	dB	81	75
Frekvensområde	Hz	<100 – 5000	<100 – 5000
Strömförbrukning	mA	2,1	2,0

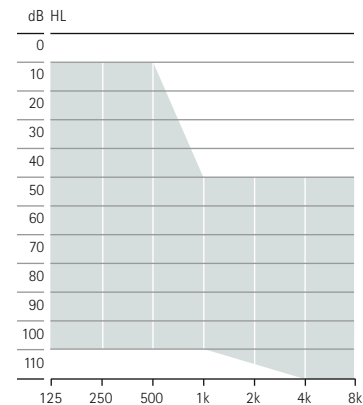

Lätt till mycket grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer


■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Färger på hölje och slangfäste

Hölje



Slangfäste

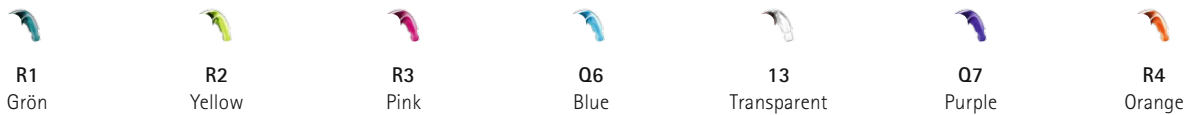

Funktionsnivåer

	Premium M90	Avancerad M70	Standard M50
AutoSense Sky OS 3.0			
Lugna situationer	•	•	•
Tal i buller	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	
Tal i starkt buller ³	•		
Tal i bilen	•		
Komfort i eko	•		
Media tal + mik.	•	•	•
Media musik + mik.	•	•	•
Övriga program			
Max. ytterligare program	3	3	3
Komfort i eko	•		
Tal i starkt buller.	•	•	
Tal i 360°	•	•	
Tal i buller	•	•	•
Lugna situationer	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•
Musik	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•
Individuellt program	•	•	•
Streamingprogram			
RogerDirect + mikrofon	•	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	•

	Premium M90	Avancerad M70	Standard M50
Funktioner			
UltraZoom	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•
DuoPhone	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•
Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•
Kanaler för fininställning	20	16	12
WhistleBlock	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•
WindBlock	•	•	
EchoBlock	•		
SoundRelax	•	•	
QuickSync	•	•	•
Akustiskt optimerad ventilation	•	•	•
autoAcklimatisering	•	•	•
Omgivningsbalans	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•
Inställning för Roger och riktmik	•	•	•

Anpassning

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50
Phonak Target	6.1 eller senare	6.1 eller senare	6.2 eller senare
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO och HI-PRO 2			•

Akustisk koppling

Ljudutgång	Standardslangfäste	Dämpat (HE 11 680) transparent och 6 extra färger för barn (se sidan 4) för Sky M-M och Sky M-PR Odämpat (HE 11) endast i transparent färg för Sky M-SP	
	Barnsäkert slangfäste	Minislangfäste dämpat (HE 11 680) transparent och 6 extra färger för barn (se sidan 4) för Sky M-M och Sky M-PR Minislangfäste odämpat (HE 11) endast i transparent färg för Sky M-SP	
	SlimTube 4.0	Tillgänglig som vänster och höger samt i fem olika längder (00, 0, 1, 2, 3)	
Öroninsats för SlimTube	Dome	Cap dome	
		Öppen dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
		Ventilerad dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
		Power dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
	SlimTip™	Akryl	
		Silikon	
		Titanium	
Öroninsats för slangfäste	Öroninsats		
	Universell insats		

Phonak Sky Marvel Trial

De nya Phonak Sky M Trial hörapparaterna kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Flera tekniska nivåer i en Phonak Sky M Trial hörapparat ger dig många alternativ för att ge rätt hörsellösning på en gång eller tillhandahålla en hörapparat t ex under reparation.

Phonakladdare till bakom-örat- och RIC-modeller

Denna laddare är lämplig för alla uppladdningsbara Marvel-hörapparater av bakom-örat- och RIC-modell. Den har plats för vanliga öroninsatser, en USB-C-laddningskontakt och ett indikatorljus.



Bluetooth®-versioner av Phonak Sky™ M

Direktstreaming av ljud

Bluetooth® 4.2 trådlös teknik och många äldre telefoner med Bluetooth

Trådlöst kommunikationsortiment

		Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50
Trådlösa tillbehör	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Roger-mikrofoner	•	•	•

Du hittar mer information på:



www.phonakpro.se/skymarvel



www.phonakpro.se/roger

Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonakpro.se