

Phonak Audeo Fit™

Produktinformation



Vår senaste innovation på Paradise-plattformen, Audeo Fit, har en hjärtfrekvenssensor som kan registrera hälsodata som visas i myPhonak app. Genom att registrera hjärtfrekvens, steg och aktivitetsnivåer kan de här hörapparaterna uppmuntra till hälsosamma vanor och ge ett ökat välbefinnande. Phonak Audeo Fit lämpar sig för lätt till grav hörselnedsättning och innehåller den innovativa tekniken i Phonak Paradise-plattformen. Audeo Fit är hörapparaterna för de som vill ha kontroll över sina hälsodata.

Mer information finns på www.phonakpro.se

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Produktbeskrivning



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

Flerfunktionsknapp		•
Bluetooth®		•
Hydrofobisk yta		•
IP-klass		IP68 ¹
Mått	L x B x D	30,6 x 12,3 x 8,1 mm
	Vikt	2,23 g
Laddningstider ²	0 % till 100 %	3 timmar
	0 % till 80 %	1,5 timmar
	30 min. anpassning	10 min.
M hörtelefon		
Maximal utnivå (dB SPL)		114
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	51
Frekvensområde (Hz)	2cc coupler	<100 - >8000
P hörtelefon		
Maximal utnivå (dB SPL)		122
Max förstärkning (dB)	2cc coupler	59
Frekvensområde (Hz)	2cc coupler	<100 - 6300

Färger



P1
Sand Beige



P4
Chestnut



P6
Silver Gray

¹ IP68 indikerar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät. Den har blivit godkänd i test där den varit kontinuerligt nedsänkt i 1 meter djupt vatten under 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529.

² Faktisk laddningstid beror på kvarstående batteritid, men överskrider inte 3 timmar.

Funktionsnivåer

	Premium	Avancerad	Funktioner	Premium	Avancerad
AutoSense OS™ 4.0	Premium	Avancerad	UltraZoom	•	•
Komfort i eko	•		Dynamic Noise Cancellation	•	
Tal i bil	•		Speech Enhancer	•	
Tal i starkt buller	•		EchoBlock	•	
Musik	•	•	Tryckkontroll		
Komfort i buller	•	•	- Siri/Google Assistant	•	•
Tal i buller	•	•	- Pausa/återuppta streaming	•	•
Lugna situationer	•	•	- Acceptera /avsluta telefonsamtal	•	•
Mediatalk + mikrofon	•	•	StereoZoom	•	•
Mediamusik + mikrofon	•	•	WindBlock	•	•
Övriga program			SoundRelax	•	•
Max. ytterligare program	4	4	Motion Sensor Hearing	•	•
Komfort i eko	•		DuoPhone	•	•
Tal i starkt buller	•	•	Real Ear Sound	•	•
Tal i 360°	•	•	Inställning för Roger och riktmik	•	•
Tal i buller	•	•	SoundRecover2	•	•
Lugna situationer	•	•	WhistleBlock	•	•
Komfort i buller	•	•	NoiseBlock	•	•
Musik	•	•	RogerDirect™	•	•
Akustisk telefon	•	•	Brukarbaserad fininställning	•	•
Individuellt program	•	•	QuickSync	•	•
Streamingprogram			AOV	•	•
RogerDirect + mikrofon	•	•	Tinnitusbalans	•	•
PartnerMic + mikrofon	•	•	autoAcklimatisering	•	•
Telefonsamtal + mikrofon	•	•	Omgivningsbalans	•	•
			Kanaler för fininställning	20	20

Hälsfunktioner

	Audéo Fit	Paradise laddningsbara RIC
Separat användningstid för varje hörapparat	•	•
Genomsnittlig kombinerad användningstid för båda hörapparaterna	•	•
Genomsnittlig användningstid i olika ljudmiljöer	•	•
Steg	•	•
Aktivitetsnivåer	•	•
Gång- och löpdistan	•	
Hjärtfrekvens	•	
Eget mål för användningstid	•	•
Eget mål för steg	•	•

Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
 iOS är ett varumärke som tillhör Cisco, Inc.
 Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Anpassning


Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

Phonak Target	7.3 eller senare
Noahlink Wireless	•

Akustisk koppling*

Längd	M Sensor hörtelefon	P Sensor hörtelefon
Finns i fyra olika längder (0, 1, 2, 3), vänster och höger	•	•
Dome		
Cap dome	•	
Open dome Finns i tre storlekar (S, M, L)	•	
Vented dome clear Finns i tre storlekar (S, M, L)	•	
cShell		
Akryl	•	•
Anpassningsområden		

* Endast 8-stifts Sensor hörtelefonen och cShell fungerar med Audeo Fit.

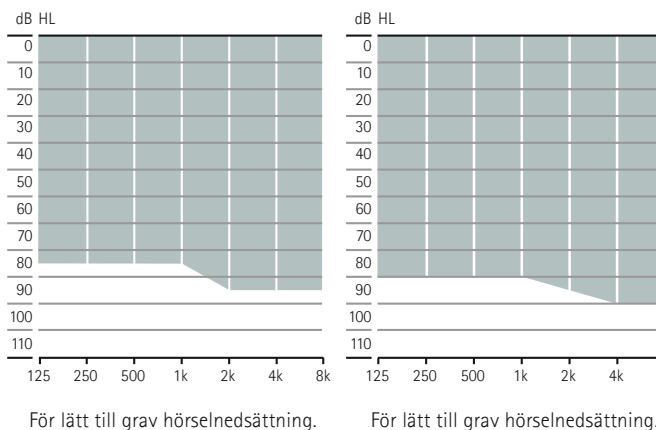

Phonak Audéo Fit Trial™

De nya Phonak Audéo P Fit Trial kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Phonak Audéo P Fit Trial innehåller båda tekniknivåerna och ger dig möjlighet att tillhandahålla rätt hörsellösning på en gång eller en hörapparat vid t.ex. reparation.

Laddningsalternativ till Phonak Audeo Fit



Phonak Charger Case Combi

Phonak Charger Case Combi är laddare, torkning och förvaring i ett. Det finns också ett rengöringsverktyg i det tåliga och stänkskyddade höljet.



Phonak Power Pack

Om man behöver ladda laddningsbara hörapparater när man är på språng, kan man enkelt sätta fast Phonak Power Pack på undersidan av Phonak Charger Case Combi.

Phonak Audeo Fit Bluetooth®-version

Direktstreaming av ljud/samtal

Bluetooth® 4.2 trådlös teknik och de flesta äldre telefoner med Bluetooth

Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Trådlöst kommunikationssortiment

	Audeo P-R Fit Audeo P-R Fit Trial P90/P70
Trådlösa tillbehör	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
RogerDirect™	•
Appar	
myPhonak	•

Besök www.phonakpro.se/audeoparadise för mer information.
Information om Rogermikrofoner finns på www.phonakpro.se/roger
Besök www.phonakpro.se/smartapps för mer information.

life is on


Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman med välbefinnande och ligger till grund för att kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld där alla kan känna att "life is on". Våra innovativa hörsellösningar är utvecklade för personer i alla åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar, så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

www.phonak.se



027-0656-09/V1.00/2022-01/INLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

