

Phonak Terra™ + Phonak Terra™

Ürün bilgisi

Phonak Terra+ ve Phonak Terra, RIC ve BTE ile kişiselleştirilmiş bir işitme deneyimi için bir dizi dengeli özellik sunar.



Ürün açıklaması



		Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Pil boyutu		dahili şarj edilebilir	312	312	13	675
Telecoil				•	•	•
Bluetooth®		•	•	•	•	•
Hidrofobik kaplama		•	•	•	•	•
IP derecesi		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Boyutlar	U x G x Y	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 inç)	26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28 inç)	31,3 x 14,16 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29 inç)	40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 inç)	42,2 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 inç)
	Ağırlık	2,2 g (0,08 oz)	1,1 g (0,04 oz)	2,2 g (0,08 oz)	4,4 g (0,16 oz)	4,6 g (0,16 oz)
Şarj süreleri ²	%0 ila %100	3 sa				
	%0 ila %80	1,5 sa				
	30 dk. fitting	15 dk.				

Kabin renkleri

Terra+



H0
Bej



P1
Kum Beji



P3
Sandal Ağacı



P6
Gümüş Gri

Terra



H0
Bej



P3
Sandal Ağacı



P6
Gümüş Gri

¹ IP68, işitme cihazının su ve toz geçirmez olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.




² Gerçek şarj süresi kalan pil ömrüne bağlıdır, ancak 3 saati aşmayacaktır.

Bluetooth® marka ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Sonova AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

Akustik bağlantı – RIC işitme cihazları

Uzunluk	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver
Sol ve sağ olmak üzere dört farklı uzunlukta (0, 1, 2, 3) mevcuttur	•	•	•	•
Dome				
Başlık Dome	•	•	•	
Açık dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•	
Ventli dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•	
Güçlü dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•	
SlimTip*				
Akrilik	•	•	•	
Silikon	•	•	•	
cShell				
Akrilik	•	•	•	•
Titanyum	•	•	•	•
2cc coupler verileri				
Maks. Güç Çıkışı (dB SPL)	111	114	122	132
Maks. kazanç (dB)	47	51	59	71
Frekans aralığı (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100
Fitting aralıkları				

* Ekstra kanal uzunluğu seçeneği mevcuttur

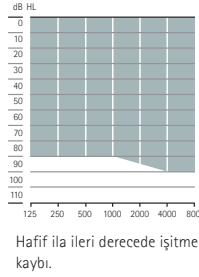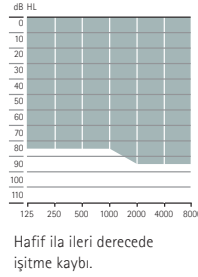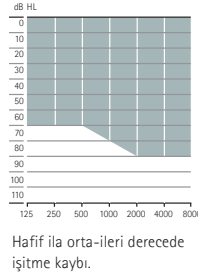

Phonak Terra+ RIC-R şarj seçeneği




Phonak Charger Ease

Akustik bağlantı – BTE işitme cihazları

Ses çıkışı		Terra BTE-M		Terra BTE-SP		Terra BTE-UP	
Standart boynuz	Filtreli (HE11 680), şeffaf	•		•		•	
	Filtreli (HE11), şeffaf			•		•	
Slim Tube 4.0	Beş farklı uzunlukta (00,0,1,2,3) sol ve sağ olarak mevcuttur	•		•			
Slim Tube için kulaklık							
Dome	Başlık dome	•		•			
	Açık dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)		•			
	Ventli dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)		•			
	Güçlü dome	Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)		•			
SlimTip	Akrilik	•		•			
	Silikon	•		•			
Boynuz için kulaklık							
Kulak kalıbı		•		•		•	
2cc coupler verileri		HE11 680	Slim Tube 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
Maks. Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	128	122	133	139	134	141
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	63	58	75	81	78	84
Frekans aralığı (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700
Çalışma akımı (mA)		1,6	1,6	2,2	2,1	2,8	3,3

Fitting aralıkları

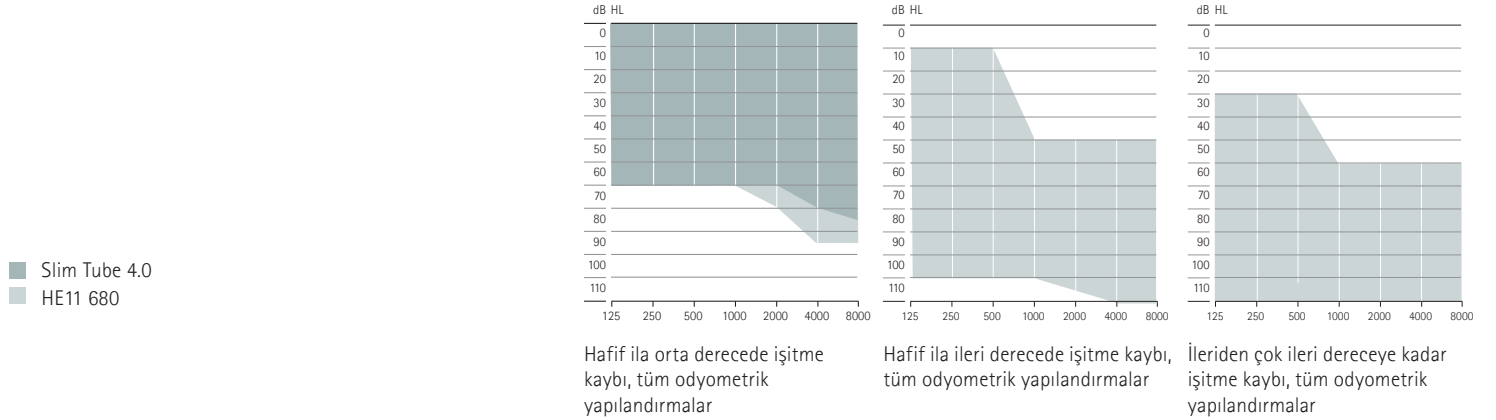

Performans seviyeleri

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Özellikler	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
AutoSense OS™ 5.0			UltraZoom	•	•
Gürültüde Konuşma	•	•	Geniş Bant Yükseltici ¹	•	•
Sakin Ortam	•	•	Kullanıcı Tercih Ayarı	•	•
AutoSense OS 5.0 (ses aktarımı)			Auto Acclimatization	•	•
Medya konuşması + mic	•	•	Çevre dengesi	•	•
Medya müzik + mic	•	•	SoundRecover2	•	•
Ek programlar			SoundRecover	•	•
Maks. ek programlar	4	4	WhistleBlock	•	•
Gürültüde Konuşma	•	•	NoiseBlock	•	•
Sakin Ortam	•	•	QuickSync	•	•
Gürültüde Konfor	•	•	AOV	•	•
Müzik	•	•	İnce ayar kanalı	10	8
Akustik telefon	•	•			
Özel program	•	•			
Telefon ile T-coil ± mic ²	•	•			
Açık alanda T-coil ± mic ²	•	•			
Ses aktarımı programları					
PartnerMic + mic	•	•			
Telefon görüşmesi + mic	•	•			

1 Sadece Phonak Terra+ BTE-UP ve Phonak Terra BTE-UP için mevcuttur
2 Sadece BTE ürünleri için mevcuttur

Kablosuz iletişim portföyü

	Terra+ RIC-R/RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	Terra RIC-312 BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
Kablosuz aksesuarlar		
TV Connector	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak RemoteControl	•	
Uygulamalar		
myPhonak	•	

Fitting

	Terra+ RIC-R	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
Phonak Target	10.1 veya üstü	9.1 veya üstü	9.1 veya üstü	9.1 veya üstü	9.1 veya üstü
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•	•
NOAHLINK				•	•
HI-PRO, HI-PRO2				•	•

Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: www.phonak.com/terra
myPhonak hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: www.phonak.com/apps

life is on

1947'den bu yana Phonak, yeni akustik dünyalar yaratarak yaşam kalitesini korumaya kendini adanmıştır. Kurulduğumuz günden bugüne şirketimiz, geliştirmeye dayalı bir inançla hareket etmektedir: İyi işitmenin aynı zamanda iyi olmak ve hissetmek olduğuna ve hayatı en iyi şekilde yaşamak için gerekli olduğuna inanıyoruz. Aslında, işitme duyusu doğrudan sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel iyilik hali ile bağlantılıdır. Gelecekte olacağı gibi bugün de en geniş yenilikçi işitme çözümleri portföyünü sunmak için geliştireceğiz. İşitme uzmanlarımızla birlikte en önemli noktalara odaklanmaya devam ediyoruz: konuşmayı anlamayı iyileştirmek, insanların hayatlarını değiştirmek ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak.

www.phonak.com



027-0706-22/V3.00/2024-10/ILG © 2024 Sonova AG Tüm hakları saklıdır