

峰力 Virto™ 1.




產品資訊

峰力 Virto Infinio 是針對輕度至重度聽力損失的全面性耳內型助聽器產品組合。
Virto I 助聽器是追求外型隱密、訂製解決方案的顧客的理想之選。

Virto I-R 採用 Phonak Infinio 平台的創新技術，是峰力首款充電式耳內機。



產品描述

		 Virto I-R 190/170/150/130	 Virto I-10 NW 0 190/170/150/130	 Virto I-Titanium 190/170
輸出功率				
M		•	•	•
P		•	•	•
SP		•	•	•
UP 1		•		
硬體配置/選項/技術				
電池型號		內建充電電池	10	10
充電時間 ²	0% 至 100%	3 小時		
	0% 至 80%	1.5 小時		
	30 分鐘選配	15 分鐘		
Bluetooth® (藍牙)		•		
外殼材質		壓克力	壓克力	鈦 ³
IP 等級		IP68 ⁴	IP68 ⁴	IP68 ⁴
麥克風技術		方向性	全方向性	全方向性
T 線圈			可選	可選
按鍵 (程式/音量)		•	可選	可選
音量控制 (滾輪)			可選	
EasyPhone (適用於聲學電話)			•	可選
MiniControl (適用於程式或音量變更)			•	•

顏色

面板顏色



26
粉色



145
淺棕色



22
可可色



285
棕色



06
黑色



鈦
灰色

鈦合金外殼顏色

壓克力外殼顏色



26
粉色



14
淺棕色



22
可可色



28
棕色



06
黑色



R
透明紅色



B
透明藍色



21
透明

1 僅在特定國家有販售

2 實際充電時間取決於電池的剩餘電量，但不會超過 3 小時。

3 有兩種不同的表面粗糙度可供選擇：標準或防滑耳道固定鎖 (ERS)

4 IP68 表示助聽器防水防塵係數。根據 IEC60529 標準，在 1 公尺水下連續浸泡 60 分鐘，和於集塵室放置 8 小時後，皆能持續運作。

5 僅限 Virto I-R 和 Virto I-10 NW 0

效能等級

AutoSense OS™ 7.0 ¹	高階款 190	進階款 170	標準款 150	入門款 130
大噪音中聆聽語音 ²	•			
音樂	•	•		
車內交談	•	•	•	
噪音中舒適聆聽	•	•	•	
噪音中聆聽語音	•	•	•	•
安靜環境	•	•	•	•
媒體語音 + 麥克風 ²	•	•	•	•
媒體音樂 + 麥克風 ²	•	•	•	•
附加程式				
最多附加程式	4	4	4	4
大噪音中聆聽語音 ²	•	•		
360° 全方位交談 ²	•	•		
車內交談	•	•	•	
噪音中聆聽語音	•	•	•	•
安靜環境	•	•	•	•
噪音中舒適聆聽	•	•	•	•
音樂	•	•	•	•
聲學電話	•	•	•	•
自訂程式	•	•	•	•
透過 T 線圈通話 ± 麥克風 ³	•	•	•	•
公用 T 線圈 ± 麥克風 ³	•	•	•	•
無線串流程式				
RogerDirect™ + 麥克風 ²	•	•	•	•
PartnerMic + 麥克風 ²	•	•	•	•
電話 + 麥克風 ²	•	•	•	•

功能	高階款 190	進階款 170	標準款 150	入門款 130
語音感測 ²	•			
語音增強	•			
立體聚焦 2.0 ²	•	•		
動態噪音抑制 ²	•	•		
行走感知聆聽 ²	•	•	•	
Roger 相容性	•	•	•	•
停用免持通話 ^{2,4}	•	•	•	•
點擊控制 ²				
- Siri/Google 助手	•	•		
- 暫停/恢復串流	•	•		
- 接聽/結束通話	•	•		
突噪音抑制	•	•	•	
雙耳電話 ²	•	•	•	
EasyPhone ³	•	•	•	•
終極聚焦 ²	•	•	•	•
Roger 方向性設定 ²	•	•	•	•
風噪音抑制	•	•	•	•
使用者偏好調整	•	•	•	•
耳鳴遮蔽	•	•	•	•
自動適應	•	•	•	•
環境平衡	•	•	•	•
第二代非線性頻率壓縮	•	•	•	•
回饋音抑制	•	•	•	•
噪音抑制	•	•	•	•
同步化 ²	•	•	•	•
聲學最佳氣孔	•	•	•	•
微調頻道數	20	20	16	12

1 峰力 Virto I-10 NW 0 和 Virto I-Titanium 配備 AutoSense OS 6.0

2 僅適用於峰力 Virto I-R

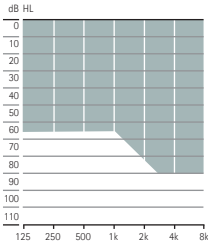
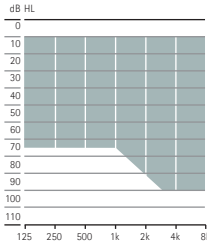
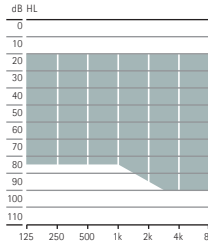
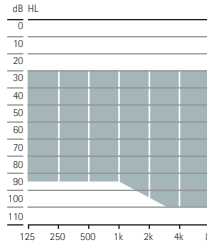
3 僅適用於峰力 Virto I-10 NW 0 和 Virto I-Titanium

4 適用於高安全性環境，例如 SCIF

選配

	Virto I-R	Virto I-10 NW 0 / Virto I-Titanium
Phonak Target	11.0 或更高	10.0 或更高
Noahlink Wireless、Noahlink Wireless 2	•	
Noahlink		•
HI-PRO、HI-PRO2		•

聲學耦合

		M	P	SP	UP1
最大輸出 (dB SPL)	2 cc 耦合器	109	115	119	127
最大增益 (dB)	2 cc 耦合器	40	50	60	70
頻率範圍 (Hz)	2 cc 耦合器	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
工作電流 (mA)	Virto I-10 NWO、Virto I-Titanium	1.1	1.2	1.1	
選配範圍					
		輕度到中度聽力損失	輕度到中重度聽力損失	中度到重度聽力損失	中度到極重度聽力損失

1 僅適用於 Virto I-R，且僅在特定國家有販售

外殼款式

	全殼	半殼	ITC	CIC	IIC
Virto I-R					
Virto I-10 NW 0					
Virto I-Titanium					

我們創新的客製化方法 - RightFit™ - 根據耳朵的解剖構造、接收器和氣孔的大小，打造更小巧的 Virto I-R。

峰力 Virto I-R 充電解決方案

Phonak Charger Virto I

峰力 Virto I-R 擁有您所喜愛的所有 Infinio 功能，以及充電式的優點。有了我們專屬的磁吸式充電系統，充電變得簡單直觀。將助聽器放進充電器，助聽器便藉由磁力吸附在充電接點上。磁吸式充電系統能確保 Virto R 續航一整天，顧客可以全天聆聽，包括串流。



峰力 Virto I-R 無線技術

直接通話/音訊串流

Bluetooth® 經典音效

無線通訊產品組合

	Virto I-R I90/I170/I150/I130	Virto I-10 NW O I90/I170/I150/I130	Virto I-Titanium I90/I170
無線配件			
電視盒	•		
峰力 PartnerMic™	•		
峰力遙控器	•		
Roger			
RogerDirect	•		
Roger Neckloop		• ¹	• ¹
應用程式			
myPhonak	•		

¹ 如果安裝 T 線圈，則可使用

啟動生活

自 1947 年以來，峰力一直致力於透過開闢新的聲學世界來保持生活品質。早在公司成立開始，我們就一直深信：聽力健康與幸福生活緊密相聯，並與人們每天的生活息息相關。實際上，聽力還與社交、情感、認知能力和生理健康方面相關聯。無論是現在還是未來，我們會一直努力提供最廣泛的創新聽力解決方案組合。和聽力保健專家一樣，我們一直專注於最重要的事情：提高語音清晰度，改變人們的生活，對整個社會產生積極影響。

phonak.com