



## Phonak France

Implantée depuis 1978, la filiale française Phonak met son expertise en matière de solutions auditives au service des personnes malentendantes.

Notre département Roger est dédié aux solutions adaptées aux besoins spécifiques du malentendant dans son environnement professionnel.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, Phonak met à votre disposition l'information sur la surdité en milieu professionnel, son expertise, les solutions techniques adaptées ainsi qu'un accompagnement dans les étapes du maintien et de l'insertion professionnelle.

## Life is on\*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. \*Et la vie s'exprime !

[www.phonakpro.fr](http://www.phonakpro.fr)



## Leader mondial

Phonak est une marque du groupe Sonova, leader mondial des solutions auditives. Le siège social est basé à Stäfa, en Suisse.

Depuis sa création en 1947, Phonak ne cesse d'innover dans le domaine des solutions auditives pour changer la vie des malentendants, émotionnellement et socialement.

Nous sommes convaincus qu'il est possible de faire tomber les barrières et de créer un monde où la vie s'exprime.

Passion. Engagement. Innovation.



## Vos contacts privilégiés

**Dr Christian GAUTHIER**

Délégué commercial Roger  
06 10 01 73 14  
[christian.gauthier@phonak.com](mailto:christian.gauthier@phonak.com)



**Phonak – Sonova France**

5 rue Maryse Bastié CS 80605  
69675 Bron Cedex, France  
0 821 02 7000  
[roger.fr@phonak.com](mailto:roger.fr@phonak.com)

Pour toutes informations techniques,  
contactez  
[support.technique.france@phonak.com](mailto:support.technique.france@phonak.com)

## Aménagement du poste de travail pour malentendants

Solutions auditives Roger™ Worklife

028-1753-04 / 2021-06 / Imprimé en France © Sonova AG Tous droits réservés. Sonova France SAS - RCS LYON B 314 036 882.



\*Entendre le monde

\*la vie s'exprime



## Sonova en quelques chiffres...

Plus de **70** ans d'expérience



**14 000**

employés dans le monde



Présent dans plus de **100** pays

# Technologie de pointe Roger

Notre espace de travail peut aujourd'hui représenter un environnement d'écoute complexe. Pourtant, c'est là que la communication est la plus importante pour réussir.

Les personnes ayant une perte auditive ont tendance à contourner les situations auditives complexes. Mais cela peut être pénalisant, émotionnellement exigeant et limite souvent leur capacité à participer et à engager des conversations.

Bien que modernes et innovantes, les aides auditives ont leurs limites face aux environnements sonores complexes.

## Une réponse adaptée aux besoins de chacun

Dans les situations face à plusieurs personnes, en présence de bruit ambiant ou lorsque la source sonore est à une certaine distance, comme en réunion, les aides auditives nécessitent un coup de pouce.


La technologie Roger™ comble le manque de compréhension dans le bruit et à distance, en transmettant sans fil la voix de l'orateur directement à l'auditeur. Fonctionnant sur la largeur de bande 2,4 GHz, Roger est accessible librement partout dans le monde.

- **Clarté sonore**, avec des performances auditives reconnues par les professionnels et les utilisateurs.
- **Simplicité maximale**, connexion des appareils par une simple pression sur un bouton.
- **Solution universelle**, compatible avec presque tous les appareils auditifs et implants cochléaires, quelle que soit la marque.
- **Transmission sécurisée**, garantissant la sécurité et la confidentialité de transmission.

## Technologie MultiBeam

La technologie MultiBeam est une fonction innovante intégrée aux microphones Roger Table Mic et Roger Select. Elle permet d'accroître davantage la compréhension de la parole dans les environnements complexes et de participer activement aux conversations de groupe.

Plusieurs microphones tournés dans six directions permettent de couvrir un rayon de 360° où la parole est calculée et comparée. La direction offrant la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée.

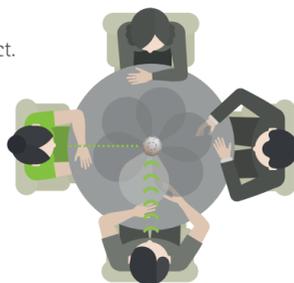

## RogerDirect™

Les aides auditives Paradise et Marvel intègrent la technologie RogerDirect. Elle permet de diffuser le signal d'un microphone Roger directement dans les aides auditives sans connecter de récepteur externe.

## Microphones Roger iN

La dénomination iN indique que le microphone permet d'activer la fonction RogerDirect dans deux aides auditives Paradise ou Marvel.

## Situations auditives



### Petite réunion ou restaurant

Roger Select ou Roger On permet de sélectionner automatiquement ou manuellement la ou les personne(s) avec qui on souhaite converser.



### Réunion téléphonique ou en groupe

Roger Table Mic II se place sur la table de réunion pour entendre la conversation téléphonique et les participants à la réunion.



### Réunion en grand groupe

Un réseau de plusieurs microphones Roger Table Mic II permet de participer pleinement à la réunion.



### Réunion avec conférencier

En complément de microphone(s) Roger Table Mic II, le conférencier porte sur lui un Roger Select ou un Roger On qui capte sa voix car il est généralement plus éloigné.



### Conversation dans le bruit

L'interlocuteur porte le Roger Select ou Roger On autour du cou ou attaché sur le col du vêtement.



### Ordinateur et retranscription

Tous les microphones Roger peuvent se connecter à n'importe quelle source sonore. Un récepteur NeckLoop connecté à un ordinateur offre à l'utilisateur une retranscription écrite du son capté par le microphone Roger.




### Appel avec un téléphone fixe ou portable

Roger Select ou Roger On permet de se connecter au téléphone Fixe IP en filaire (via le kit téléphone) ou au portable en Bluetooth®.

Aides Auditives  
RogerDirect™

Microphones Roger iN

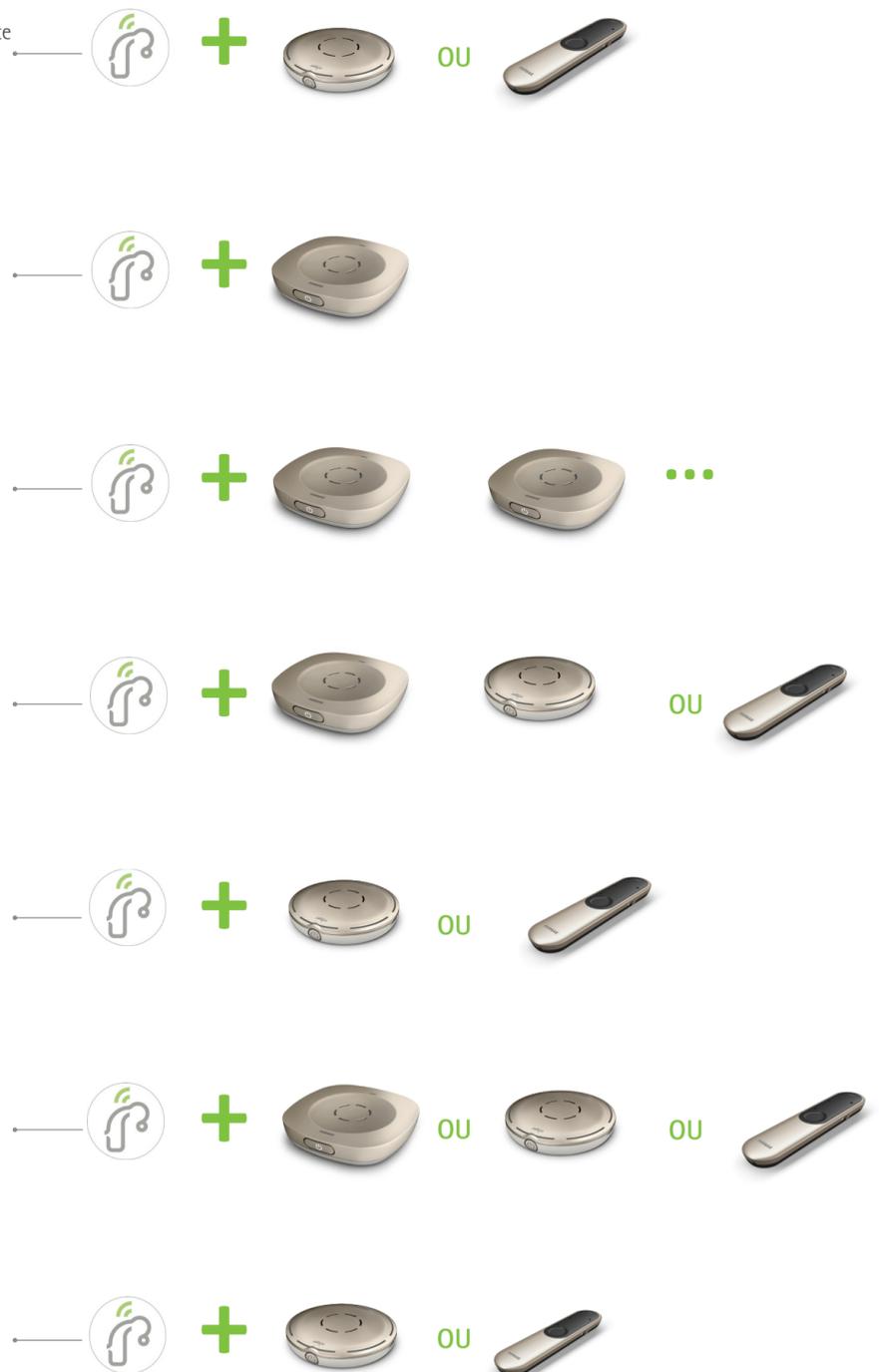

# Solutions Roger

## Roger Table Mic II

Roger Table Mic II est un microphone dédié aux situations de réunions. Doté de la technologie MultiBeam, il sélectionne automatiquement la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à un autre.

Plusieurs Roger Table Mic II peuvent être connectés afin de créer un réseau, idéal pour des réunions comportant un grand nombre de participants et pour les grandes salles de réunion.

Le microphone se branche sur les appareils multimédia, comme des ordinateurs. La télécommande permet par une simple pression d'activer ou de couper la transmission, et d'ajuster la distance de captation du son.



## Roger On™

Grâce à la nouvelle Technologie MultiBeam 2.0 et au Mode Interview 2.0, Roger On offre aux utilisateurs la flexibilité de se concentrer sur les conversations réellement importantes.

MultiBeam 2.0 sélectionne le faisceau avec le meilleur RSB, tout en donnant au porteur des aides auditives des informations spatiales pour déterminer de quelle direction provient le discours.

L'application myRogerMic possède des paramètres microphoniques personnalisés et offre une utilisation discrète quels que soient les besoins des utilisateurs.



### Fonctions

- Technologie MultiBeam 2.0
- Mode Interview 2.0
- Orientation indépendante dans le mode Orateur
- Conception Premium dans un format portable
- Nouvel affichage
- P54, protégé contre les éclaboussures d'eau
- Application myRogerMic



## Roger Select™

Roger Select est un microphone polyvalent, doté de la technologie MultiBeam et idéal pour les situations professionnelles en milieu bruyant. Lorsqu'il est placé sur une table, il sélectionne automatiquement et en toute discrétion la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à l'autre.

Quand plusieurs conversations ont lieu en même temps, l'auditeur appuie sur l'appareil pour sélectionner la conversation à laquelle il souhaite participer. L'appareil transmet également le son des dispositifs multimédia, tel qu'un ordinateur et offre une connectivité Bluetooth® pour les appels téléphoniques.



Pour plus d'informations sur les solutions Roger et accéder aux guides de sélection et de compatibilité des produits, rendez-vous sur : [www.phonakpro.fr/amenagement-travail](http://www.phonakpro.fr/amenagement-travail)