

# Phonak Audéo™ B-Direct Vezeték nélküli kiegészítők

Termék információk



A Phonak bemutatja a sikeres Audéo™ B-Direct kis-közepes, nagy-súlyos hallásvesztésekre szánt RIC hallókészülék család vezeték nélküli kiegészítőit. A Phonak Belong™ technológiára építve a Phonak Audéo B-Direct azon páciensek számára nyújt megoldást, akik a Phonak portfólión belül a közvetlen kapcsolódási lehetőségeket részesítik előnyben. A fő cél az egyszerű kapcsolódás lehetősége, függetlenül a telefonkészülék típusától. Az Audéo B-Direct az első hallókészülék, amely közvetlenül kapcsolódik bármely mobiltelefonhoz\*, valamint TV készülékhez.

\* Bluetooth® 4.2 vezeték nélküli készülékkel és a legtöbb régebbi Bluetooth-os mobiltelefonnal

## TV Connector – Egyszerűen használható streamer TV-hez, zenehallgatáshoz



A **TV Connector** egy könnyen csatlakoztatható egység TV-hez és egyéb audio eszközökhöz, amely támogatja a Phonak Audeo B-Direct hallókészülékek közvetlen kapcsolódását. Egyszerű üzembehelyezés és könnyű használhatóság mellett kiváló sztereó hangminőséget biztosít az AirStream™ technológia révén. A TV Connector jeltovábbításának hatótávolsága akár 15 méter is lehet, mégpedig korlátlan számban csatlakozó hallókészülék esetében is, így akár az egész család együtt élvezheti a TV-zés örömeit.

### A szolgáltatások áttekintése

- Hangtovábbítás mindkét készülékbe sztereó hangminőségben
- AirStream technológia a jobb hangminőség érdekében, legkisebb fáziskésés, könnyű csatlakozás
- Egyetlen gombnyomás és a kompatibilis hallókészülékek a hatótávolságon belül automatikusan csatlakoznak
- Egyidejűleg korlátlan számú hallókészülék csatlakozása lehetséges
- A diszkrét megjelenés érdekében a TV készülék mögé rejthető

### Kompatibilitás

- A TV Connector csak a Phonak Audeo B-Direct készülékkel kompatibilis. A többi vezeték nélküli készülékkel nem kompatibilis.


### Műszaki adatok



- 1 Párosító nyomógomb
- 2 Indikátor jelzőfény (LED)
- 3 microUSB töltési csatlakozó
- 4 Audio csatlakozó Toslink (digitális optikai) vagy 3.5mm jack (analóg) kábelhez

Kis méret (Szélesség: 63 mm x Mélység: 63 mm x Magasság: 12 mm)

### Hogyan használjuk

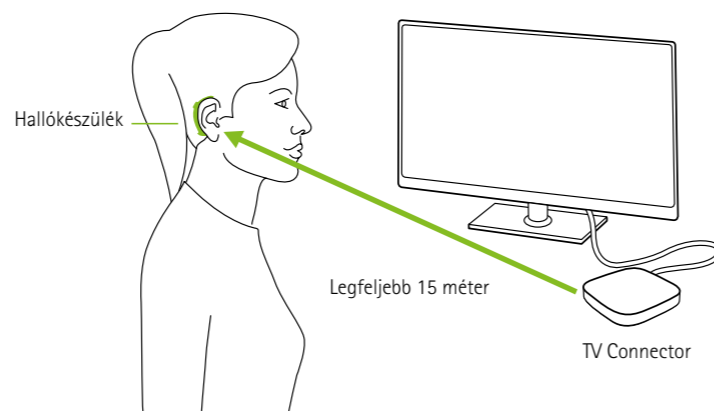

A TV Connector használatának videójáért kattintson a linkre: [www.phonakpro.hu/TVConnector](http://www.phonakpro.hu/TVConnector)

## Phonak Remote – Az egyszerűen kezelhető távvezérlő alkalmazás



A **Phonak Remote** alkalmazás egy kényelmes módja annak, hogy kényelmesen távvezérelje hallókészüléke alapvető funkcióit és támogassa a közvetlen kapcsolódást. Az alkalmazás célja, hogy megnövelje a kényelmet és használhatóságot, miközben a telefont távvezérlőként használja. Egyszerűen használható, az okostelefonokon vizuálisan is megjelenített funkció lehetővé teszi, hogy közbeiktatott streamer nélkül kommunikáljon hallókészülékeivel.

### A szolgáltatások áttekintése

- A hallókészülék hangerősségének beállítása mindkét oldalon, vagy oldalanként
- Manuális programok listája és azok közvetlen elérhetősége
- A rendelkezésre álló egyéni programok nevének megváltoztatása, személyre szabása
- A hallókészülékhez csatlakoztatott rendelkezésre álló audioforrások kiválasztása
- Egyszerűen beállítható a környezeti hangok és az audio stream egyensúlya
- Külön állítható tinnitus zajszint, amennyiben a hallókészülékben aktiválva van a zajgenerátor
- Az appon keresztül figyelemmel kísérheti a párosított hallókészülék átlagos viselési idejét

A Phonak Remote app használatának videójáért kattintson a linkre: [www.phonakpro.hu/remoteapp](http://www.phonakpro.hu/remoteapp)



Hangerőszabályzás mindkét oldalon



Audio stream és környezeti balansz egyensúlya



Program kiválasztása és személyre szabása



Tinnitus Noiser hangerő beállítása

### Kompatibilitás

- A Phonak Remote app csak a Phonak Audeo B-Direct készülékkel kompatibilis. Más vezeték nélküli készülékkel nem kompatibilis.
- A Phonak Remote app használható Apple iPhone iOS 10.2 vagy újabb verzióján és Google Android 6, vagy annál magasabb verziószámú operációs rendszerével.

---

# Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

[www.phonak.hu](http://www.phonak.hu)

[www.phonakpro.hu](http://www.phonakpro.hu)