

life is on.

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切にし、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

フォナック製品のご相談・ご用命は…



製造販売業:ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079
個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079
(受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080
許可番号 [13B2X10021]

フォナックの最新情報はSNSでチェック!



Twitter

@swiss_phonak



Instagram

@phonak_japan



※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。

しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。

- 本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

UD FONT
by MORISAWA

ユニバーサルデザイン(UD)の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

本カタログの内容は2023年6月現在のものです。

sonova
HEAR THE WORLD



028-2510-17

202306S-70000

PHONAK

life is on

A Sonova brand



至高のフォルムを
特別なあなたに。

Phonak Slim

フォナック スリム

美しくフィットする、 新しい贅沢。

斬新なフォルムと洗練されたカラー。

そのスタイリッシュなデザインは、
これまでの補聴器のイメージを覆す。

レシーバポートに7°の角度を持たせた
左右別々の専用設計は、耳にすっと添うような
心地よいフィット感も実現。

極めてモダンな造形のなかには、
会話をもっとスムーズに、もっとラクに楽しむための
フォナック スマートスピーチ テクノロジーを凝縮。

つねに自分らしくあるために
個性、品格、機能など、すべてにこだわる。
そんなあなたにこそふさわしい
特別な補聴器ができました。

Phonak Slim

NEW

フォナック スリム 新登場

フォナック スリムに対する皆様の印象をご紹介します。

Q. 弊社従来型補聴器と
フォナック スリム、
どちらを使いたいですか？

従来型
補聴器
3.6%



フォナック
スリム
96.4%

※WEBアンケート調査結果(回答数823人、2023年3月ソノヴァ・ジャパン調べ)



Q. フォナック スリムを使いたい理由は？

「着け心地が
よさそう」
49%



さらに42%が「補聴器に見えないから」と回答しました。

7°には理由がある。

7°



耳に心地よくフィットする 7°のレシーバポート。

レシーバポートに7°の角度をつけたエレガントなフォルムは、人間工学から導き出されたもの。

耳の後ろに自然にフィットするように設計されています。

滑らかな曲線を描く、小さくてスリムなボディが、耳かけ型補聴器の新しい着け心地を実現しました。

メガネとも相性のいい着け心地。

フォナック スリムは
耳の後ろに沿うよう、
右耳用と左耳用に専用の
デザインが施されています。
耳にフィットするから
メガネとの相性も抜群です。
着けたときの心地よさ。
ぜひお試しください。



感性にフィットする2トーンカラー。

こだわりの2トーンカラーをラインアップ。

デザインの革新性と聞こえのパフォーマンスの先進性を
際立たせる洗練されたカラーは、
あなたの感性にぴったりフィットします。



2A

シルバー/ブラック



3A

グラファイト/ブラック



4A

カッパー/ブラック



6A

サンダルウッド/ブラック

会話が輝きだす。

フォナック最新の自動環境適応機能

「オートセンス OS 5.0」を中心に、

ことばの聞き取りに役立つ

「フォナック スマートスピーチ テクノロジー」を搭載。

目の前だけでなく、さまざまな方向の人との会話、

騒がしい場所での会話など、

多様なシーンで会話をサポートします。



会話をもっとスムーズにラクに楽しめる フォナック スマートスピーチ テクノロジー

スピーチセンサー*



周囲の音環境をつねにモニタリング。声が聞こえる方向へマイクを自動的に調整し、側方や後方からの声を聞き取りやすくします。

スピーチエンハンサー



静かな場所でも小さな声を増幅し、家族や友人など親しい人とのなげない会話を聞き取りやすくします。

モーションセンサーヒアリング



歩いていることをセンサーが感知しマイクが反応。一緒に並んで歩いている人の声を聞き取りやすくします。

ロジャー roger

「ロジャー」をプラスすれば、話者が離れている場合の聞き取りや騒がしい場所でのグループの会話をサポートしてくれます。



ステレオズーム 2.0*



騒がしい環境でも指向性を目の前の話者に焦点を合わせ、ことばの理解をサポートします。

ウルトラズーム



騒音源の位置を自動的に判別し、マイクの指向性が最適となるよう切り替えて、会話を聞き取りやすくします。

ダイナミックノイズキャンセル



騒がしい場所で、周囲の騒音を抑えることで、正面で話している人の声を自動的に聞き取りやすくします。



ロジャー オン iN

* 両耳装用時の機能です。


360°の会話 | スピーチセンサー*1

側方や後方など360°からの会話をより聞き取りやすく。



周囲の音環境をつねにモニタリング。声が聞こえる方向へマイクを自動的にスムーズに調整し、側方や後方からの声を聞き取りやすくします。

騒音のなかで側方や後方からの会話の聞き取りが15%*2向上、また聞き取りの労力を11%*2軽減させることが証明されています。

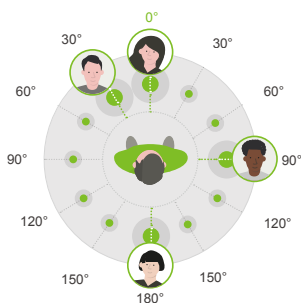


1対1の会話 | ステレオズーム 2.0*1

目の前の相手との会話により集中しやすく。



マイクの指向性を目の前の人にスムーズにフォーカス、騒がしい場所での会話がラクになります。

これにより、**ことばの理解を16%*2*3向上**。またマイフォナック アプリ*4により、スマートフォンでフォーカスする角度をリアルタイムで調節することができます。

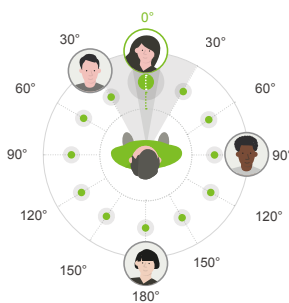

騒がしい場所での会話 | ダイナミックノイズキャンセル

周囲の騒音を抑えてより聞き取りやすく。

ショッピングセンターやレストランなど騒がしい場所で、側方や後方からの騒音を抑えることで、正面で話している人の声を自動的に聞き取りやすくします。さらにマイフォナック アプリ*4を活用すれば、スマートフォンで聞こえ方を自分で調節することもできます。



*1: 両耳装着時の機能です。*2: Woodward, J and Latzel, M (2022) New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort. Phonak Field Study News in preparation.

*3: 固定指向性との比較 *4: マイフォナック アプリをBluetooth®対応のスマートフォンにダウンロードすると、各種のリモコン機能やヘルス機能を活用することができます。
※クラスによって搭載される機能が異なります。詳しくはP13をご覧ください。

つながるから
もっと楽しくなる。



iPhoneもAndroid™も、つながる。

iOS、Android™、フィーチャー・フォンを含むBluetooth®対応の携帯電話とペアリング*してハンズフリー通話や音楽鑑賞ができます。

また最大8台のBluetooth®対応機器とのペアリング登録と、2台のBluetooth®対応機器とマルチポイントペアリング(同時待ち受け接続)ができます。



*接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。

「タップコントロール」で簡単操作。

電話に出たり切ったりの操作は、耳の上部をポンポンとダブルタップするだけでOKです。音楽ストリーミングの一時停止、再生もタップ操作で行えるので便利です。




「マイフォナック アプリ」で健康管理。

アプリをダウンロードするとスマートフォンが補聴器用のリモコンになる他、ヘルス機能によって歩数や運動量の追跡やヘルス目標の設定が可能です。歩行・走行距離も見ることができます。




アプリの詳細とダウンロードはこちらから

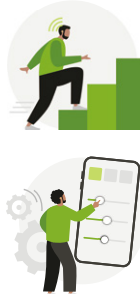

「リモートサポート」で、調整も安心。

お使いのスマートフォンやタブレットPCと販売店のパソコンをインターネットで接続。補聴器専門家による調整を自宅にしながらリモート(遠隔)で受けられるので安心です。

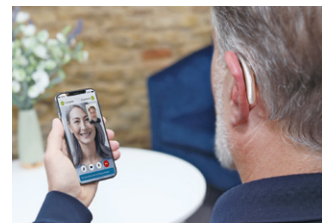

※リモートサポートによる対応や費用は販売店によって異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。一部対応していない販売店もございます。

こだわりに応える選択を
いま、あなたに。

補聴器 フォナック スリム L-R
(耳かけ型 RICスリムタイプ)

原寸大



④A



IP68
防塵・防水

指向性

ワイヤレス通信

使用電池：リチウムイオン(充電式)
期待動作時間：18時間*1
ロジャーダイレクト対応
※右耳用、左耳用で形状が異なります。

【製品コード】

L90(右耳):050-0851-xx

L90(左耳):050-0850-xx

L70(右耳):050-0849-xx

L70(左耳):050-0848-xx

L50(右耳):050-1010-xx

L50(左耳):050-1009-xx

適応聴力

S 軽中 M 軽中高 P 軽中高

カラー ※標準色は④A銅パー/ブラック

②A ●シルバー/ブラック

③A ●グラファイト/ブラック

④A ●銅パー/ブラック

⑥A ●サンドルウッド/ブラック

充電器 フォナック スリム チャージャー



15,400円(税込)
【製品コード】075-3024-10

フォナック スリムと調和する外観デザイン。
持ち運びに便利なコンパクト充電器です。

- フォナック スリム L-Rを3時間でフル充電。
- 磁気で補聴器を保持してくれるので、使いやすさもアップ。
- お手入れと持ち運びがカンタン。

クラス	チャンネル数	フォナック スリム L-R(充電式)		
		補聴器(非課税)*2	フォナック スリム チャージャー(税込)	合計
L90(プレミアム) 	20ch	片耳 668,000円	15,400円	683,400円
L70(アドバンス)	20ch	片耳 488,000円	15,400円	503,400円
L50(スタンダード)	16ch	片耳 358,000円	15,400円	373,400円

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:スリムチップはオプションで選択が可能です。
いずれの場合も別途、代金がかかります(アクリル:8,925円(非課税)、シリコン:7,875円(非課税))。

●補聴器は両耳装用をおすすめします。●防塵・防水性能は、完全防水とは異なります。●電池寿命は使用状況により異なります。●補聴器は非課税です。

一般的名称:耳かけ型補聴器 販売名:フォナック スリム ルミティ(略称:フォナック スリム)
管理医療機器認証番号:305ABBZX00008000

フォナックの哲学

Well-Hearing is Well-Being™
ゆたかな聞こえ、しあわせな暮らし。



より良い聞こえは、より健やかで充実した暮らしをもたらす。フォナックはそう考えています。
近年では、聞こえの課題に対応することによって、社会・感情的、認知的、
身体的ウェルビーイングにプラスの影響がもたらされることがわかってきています*3。

ウェルビーイング(well-being):「ウェルビーイング」とは、
身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念です。

ムービーで
ご紹介

*3: Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al.(2020).
Well-Hearing is Well-Being. *Hearing Review*, 27(3), 18-22.



機能一覧		フォナック スリム (耳かけ型 RICスリムタイプ)		
		L90	L70	L50
マニュアルプログラム数		4	4	4
両耳装着機能*1	① 非常に騒がしい中でのことば	●	●	
	② 全方向(360°)からのことば	●	●	
	③ デュオフォン	●	●	●
	④ クイックシンク	●	●	●
	⑤ ステレオズーム 2.0	●	●	
	⑥ スピーチセンサー	●		
指向性	⑦ ウルトラズーム(ch)*2	P(33ch)	A(12ch)	S(6ch)
自動環境 適応機能	オートセンス OS 5.0			
	⑧ 静かな環境	●	●	●
	⑨ 騒音下でのことば	●	●	●
	⑩ 騒音下での快適性	●	●	●
	⑪ 音楽	●	●	
	⑫ 反響する環境での快適性	●		
	⑬ 非常に騒がしい中でのことば*1	●		
	⑭ 車の中でのことば	●		
	オートセンス OS 5.0(ストリーミング)			
	メディア ことば	●	●	●
学習／ 記録機能	⑮ 自動順応マネージャ	●	●	●
	ユーザー志向のチューニング	●	●	●
	データログ	●	●	●
騒音／ ハウリング 抑制機能	⑯ ダイナミックノイズキャンセル	●	●	
	⑰ スピーチエンハンサー	●		
	⑱ ノイズブロック	●	●	●
	⑲ ホイッスルブロック	●	●	●
	⑳ エコーブロック	●		
快適機能	㉑ ウインドブロック	●	●	●
	㉒ モーションセンサーヒアリング	●	●	●
	㉓ サウンドリカバー2	●	●	●
	㉔ サウンドリラックス	●	●	
その他の 機能	㉕ リアルイヤーサウンド	●	●	●
	㉖ タップコントロール	●	●	
	多機能ボタン	●	●	●
	ロジャーダイレクト	●	●	●
	㉗ Bluetooth®	●	●	●
	㉘ 防塵・防水(IP68)	●	●	●
	ナノコーティング	●	●	●
	リモートサポート	●	●	●
	マイフォナック アプリ	●	●	●
	マイフォナック アプリヘルス機能	●	●	●

性能一覧		フォナック スリム (耳かけ型 RICスリムタイプ)					
製品名	最大音響利得 (50dB入力)		90dB入力最大出力 音圧レベル		誘導 コイル 感度	使用 電池	期待 動作 時間 (時間)
	最大値 (ピーク値) (+ 3dB以下)	HFA-FOG (± 5dB以内)	最大OSPL90 (+ 3dB以下)	HFA-OSPL90 (± 4dB以内)	HFA MASL (± 6dB以内)		
L-R S	47	40	111	106	-	リチウム イオン (充電式)	18*3
L-R M	51	46	114	111	-	リチウム イオン (充電式)	18*3
L-R P	59	56	122	120	-	リチウム イオン (充電式)	18*3

*1：両耳装着時の機能です。
*2：「P」「A」「S」は、それぞれ「プレミアム」「アドバンス」「スタンダード」を表します。
*3：フル充電時。使用状況によって異なります。
●本データはJIS C 5512:2015の2cm³カプラにより測定、表示してあります。
●最新のフィッティングソフトウェアは、Phonak Target 8.1です。

フォナック あんしんサポート

保証期間満了後も、下記の期間中は修理の上限価格を超える費用を請求いたしません。

		内容	(お買い上げ日より) 1年目	2年目	3年目	4年目
フォ ナ ク ク ス リ ム	90	修理サポート	フォナック「プレミアム保証」 3年間無償		 あんしん修理 サポート*4 1年 (42,000円まで)	
		紛失・盗難・全損時 リニューアル サポート*5	割引率 50%	割引率 30%		
	70	修理サポート	2年間無償		あんしん修理サポート*4 2年 (1年目21,000円まで、 2年目42,000円まで)	
		紛失・盗難・全損時 リニューアル サポート*5	割引率 50%	割引率 30%		
	50	修理サポート	2年間無償		あんしん修理サポート*4 2年 (1年目21,000円まで、 2年目42,000円まで)	
	ロジャー*6	修理サポート	2年間無償		あんしん修理 サポート*4 1年 (34,650円まで)	
ワイヤレス アクセサリ		修理サポート	1年間無償			

*4：積算修理はあんしん修理サポートの対象外となります。積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。
*5：紛失・盗難・全損時リニューアルサポートには、保証書のほか、遺失届／盗難届等の証明書類が必要です。
*6：ロジャー オン iNとロジャー セレクト iNは保証期間が1年になります。
●補聴器の修理費用は非課税です。ロジャーの修理費用は税込価格です(一部、補装具対象となる製品は非課税)。

●詳しくは当社ホームページを
ご覧ください。
www.phonak.com/jp/ja

