

life is on.

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるような力を注いでまいります。

フォナック公式SNS | フォナックの最新情報はSNSでチェック!

新製品情報やリアルタイムな話題をご紹介します!

X @swiss_phonak

Instagram @phonak_japan

Facebook @phonakjapan

YouTube

「きこえ」のブログ

聞こえに関するコラムから、フォナックからのお知らせまで幅広い情報をお届け!

おすすめコンテンツ

- ▶ 合理的配慮について
- ▶ 補聴器&ロジャー情報

フォナックの音の世界や製品の機能を動画でご紹介しています!

フォナック保証制度

	内容	(お買い上げ日より) 1年目	2年目	3年目	4年目
プレミアムクラス補聴器	修理サポート*1	フォナック「プレミアム保証」4年間無償			
	紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2	2年間1台のみ100%保証*3			
アドバンスクラス補聴器	修理サポート*1	2年間無償			
	紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2	2年間1台のみ100%保証*3			
その他の補聴器*4	修理サポート*1	2年間無償			
	紛失・盗難・全損時 リニューアルサポート*2	1年間1台のみ100%保証*3			
ロジャー	修理サポート*1	2年間無償			
ワイヤレスアクセサリ	修理サポート*1	1年間無償			
耳あな型補聴器	再作サポート	120日以内 再作無料*5			

※ 補聴器修理の詳細は販売店までお問い合わせください。
 *1: 修理サポートは、自然故障が生じた場合、無償にて対応いたします。
 *2: 紛失・盗難・全損時リニューアルサポートには、保証書のほか、遺失届/盗難届等の証明書類が必要です。ベーシックタイプ、障害者総合支援法/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度対応の際は対象外です。
 *3: 両耳の補聴器をご購入いただいた場合も片耳1台のみ100%保証となります。
 *4: 障害者総合支援法/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度対応につきましては、無償保証期間は1年となります。
 *5: お買い上げの日より120日以内に、耳あな型補聴器の形、大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。
 ●ご購入後、保証期間中の補聴器のカラー変更に伴うケース交換は、60日間は無償で対応、それ以降は4年間は10,000円(非課税)、5年目以降は15,000円(非課税)となります。

製造販売業:ソノヴァ・ジャパン株式会社
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8
 天王洲パークサイドビル
 フォナック カスタマーサービス
 法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079
 個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079
 (受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
 FAX:0120-23-4080
 許可番号 13B2X10021

フォナック製品のご相談・ご用命は…



※ 補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。
 ※ 補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
 ※ しかし、着用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。
 ● 本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
 ● 本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



UD FONT by MORISAWA ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基つき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

本カタログの内容は2026年3月現在のものです。

SONOVA HEAR THE WORLD



028-2855-17

2026035-100000

フォナック補聴器 総合カタログ

2026.3



聴こえる 彩りのある人生が。

パワフルなナイーダ ルミティから、より小型なL-Mが新登場。
 好評のイーザーガード耳せんもラインナップがさらに充実。



NEW ナイーダ L-M



NEW イーザーガード耳せん (オープン型、パワー型)

PHONAK life is on

A Sonova brand

Since 1947.

その音は好奇心を連れてくる

その音楽は癒しをとどける

その声は愛を伝える

聴こえる

彩りのある人生が。



スイス生まれの補聴器ブランド

1947年にスイスで誕生したフォナック。

75年以上にわたり、聴覚ケア専門家との強い協力関係の下、補聴器やワイヤレス通信機器の研究を重ねてきました。

人生を豊かにすることを目指して開発された

数々の製品は、世界100カ国以上で愛用されています。

これからも聴覚分野のリーディングカンパニーとして、よりゆたかな聞こえ、しあわせな人生の実現のためにイノベーションを続けていきます。

目次


○ フォナックの想い	P04	○ カラーバリエーション	P35
○ 聞こえと補聴器について	P05	○ 充電器一覧	P37
○ フォナックのテクノロジー	P15	○ デジタルワイヤレス補聴援助システム[ロジャー]	P39
		○ ワイヤレスアクセサリ	P45
		○ CROS補聴システム[フォナック クロス]	P46
		○ 補聴器お手入れグッズ	P47
		○ アクセサリーパーツ	P48
		○ 機能一覧	P51
		○ 性能一覧	P57
		○ ロジャー受信機対応表	P58
		○ 適応聴力範囲	P58

【製品紹介】

○ インフィニオ シリーズ	P17
○ ルミティ シリーズ	P25
○ パラダイス シリーズ	P29
○ 耳あな型補聴器 選べるベントオプション	P30
○ ベーシックタイプ[テラ シリーズ]	P31
○ お子さま向けタイプ[スカイ]	P33

“聞こえにくい”をそのままにしないことが大切。
ご家族にも知ってほしいことがあります。

認知症の14の危険因子

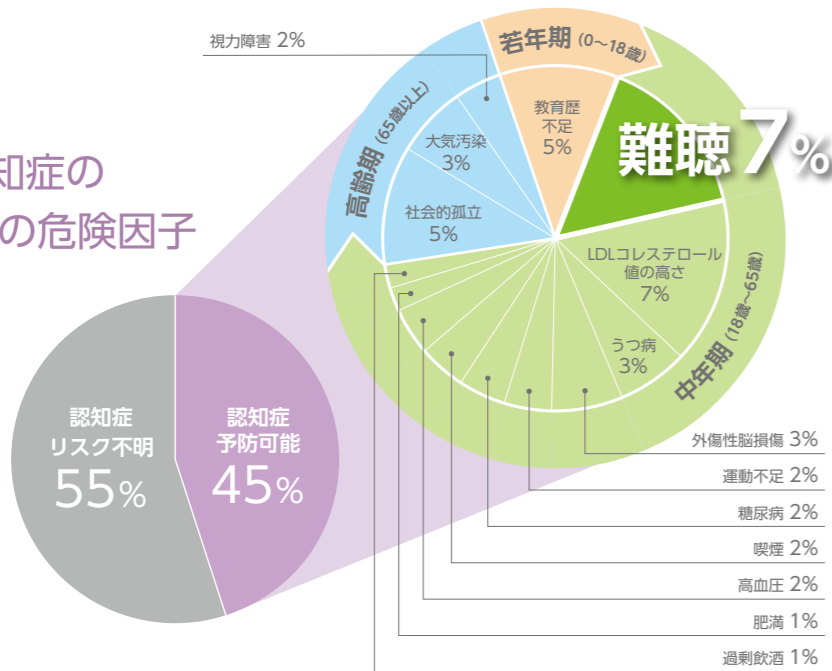


近年、難聴によってさまざまな問題が引き起こされることが明らかになっています。認知症もそのひとつです。左の図は、世界的に有名な医学雑誌であるランセットの発表*1をまとめたものです。14の認知症危険因子が挙げられ、中年期(18~65歳)にそれらを改善することで認知症のおよそ45%は発症を遅らせたり軽減したりできる可能性があることが明らかに。その中でも難聴はLDLコレステロール値の高さと並んで認知症の最も大きな危険因子であると指摘しています。

※補聴器の装用と認知症リスク低減の因果関係は判明していません。

補聴器の早期装用をおすすめします。

加齢による難聴は、一般的に徐々に聞き取りづらくなり、自分では気づかないこともあります。聞こえにくいと感じたら、医師や販売店に相談し、早めの補聴器装用をおすすめします。

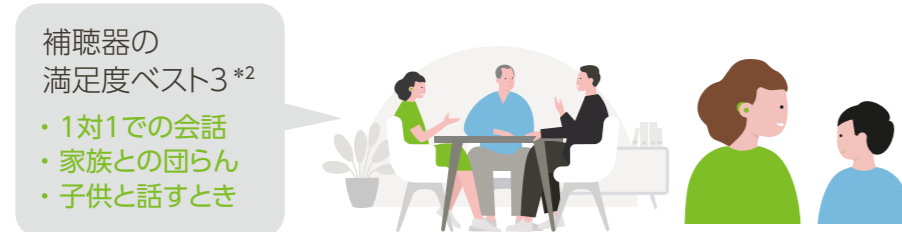

所有している補聴器の満足度調査では、上記のような聞き取りの状況での満足度が上位を占めています。



*2:一般社団法人 日本補聴器工業会 JapanTrak 2022 調査報告書より

●フォナックの想い

ウェルヒアリング イズ ウェルビーイング

Well-Hearing is Well-Being™

ゆたかな聞こえ、しあわせな暮らし。

良い聞こえは人生のさまざまな側面にプラスの影響をもたらします。

だからフォナックは、社会・感情的ウェルビーイング、認知的ウェルビーイング、身体的ウェルビーイングという3つの側面から、難聴者のより豊かな人生の実現のために行動します。



社会・感情的ウェルビーイング

良い聞こえは、アクティブな活動や人々とのつながり、スムーズなコミュニケーションに欠かせません。



認知的ウェルビーイング

良い聞こえは、脳が聞き取りやことばの理解を行い、刺激された状態を保つために大切です。



身体的ウェルビーイング

良い聞こえは、さまざまな音環境に適応し、周囲の状況が把握しやすくなるため、安心感や自信につながります。

ウェルビーイング(well-being):

「ウェルビーイング」とは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念です。

*:Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al.(2020). Well-Hearing is Well-Being. *Hearing Review*, 27(3), 18-22.

Well-Hearing is Well-Beingの思想をムービーで紹介



ファミリーセンターケア(家族中心のケア)

Family-Centered Care (FCC)

フォナックは、ご本人だけでなくご家族や周囲の方々への包括的な聞こえのケアを提唱します。

難聴はご本人のみではなくご家族やご友人などの周囲の方々にとっても問題となることが指摘されています。フォナックは、ご家族や周囲の方々に、ご本人と一緒に補聴器の検討を促す「ファミリーセンターケア」というコンセプトを大切に考えています。聞こえの課題を持つご本人と一緒に、適切な聞こえのケアを進めましょう。



聞こえと補聴器について
インフィニオシリーズ
ルミティシリーズ
パラダイスシリーズ
ベーシックタイプ
お子さま向けタイプ
補聴援助システム 周辺機器
機能・性能 一覧

難聴かな?と思ったら、

「聞こえ」について考えてみませんか。

●こんなこと、ありませんか? 1つでも当てはまるものがあれば、難聴の可能性が考えられます。

【聞こえの自己診断】

- 会話中に相手の話を聞き返すことがある。
- 小声やささやき声が聞き取りにくい。

難聴(聴覚障害)の程度分類と補聴器の必要性

軽度難聴
聞き返が多い

普通の生活で聞き間違いによるトラブルや仕事に支障がある方は、補聴器の使用を検討されてみてはいかがでしょうか。

- テレビやラジオの音量が大きいと家族によく指摘される。
- 会話が聞き取れず、あいまいに相づちを打つことがある。
- 自分の後ろでの会話に気づかないことがある。

中等度難聴
大きめの声でなければ聞こえない

聞こえが気になりコミュニケーションが上手くいかないと、精神的にストレスが溜まりご家族にも負担がかかります。

- 会話の中で相手の声がよく聞き取れない。
- 病院や銀行などで名前を呼ばれても、気づかない時がある。
- 大声での会話や耳もとで話してもらわないと聞き取れない。

高度難聴
耳もとで大きな声で話さないと聞こえない

日常生活で聞き取ることが困難な状況になり、周囲の人たちと疎遠になってしまう前に、補聴器の使用をおすすめします。

- 正面から大声で話しかけられても聞こえない時がある。
- 目の前の電話の呼び出し音が聞こえない時がある。

重度難聴
耳もとの大声も理解できない時がある

著しく生活に支障をきたすおそれがあります。早急な補聴器の使用をおすすめします。

●聴力レベルの推定と補聴器の必要性のコメントはあくまでも目安です。難聴(聴覚障害)の程度分類は、日本聴覚医学会難聴対策委員会の報告に基づいて記載してあります。
●補聴器を装着することで、難聴が進行することはありません。補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。
●詳しくは耳鼻科の専門医もしくは補聴器取扱店にご相談ください。

●そもそも、どうやって音が聞こえ、どうして難聴になるのでしょうか。

【耳の構造と聞こえのしくみ】

音が空気の振動(音波)


1 耳介: 音波を集める
2 がいじどう外耳道: 音波が伝わる
3 こまく鼓膜: 音波で振動する
4 じしょうこつ耳小骨: 振動を伝える
5 かぎゅう蝸牛: 振動を電気信号に変える
6 ちょうしんけい聴神経: 電気信号を脳に伝える

脳が音(言葉)として認識

難聴には、3つの種類があります。


- 伝音難聴**
音を伝える「外耳」や「中耳」の障害です。
- 感音難聴**
「内耳」もしくは「内耳」以降の、神経回路の音を感じる部分の障害です。
- 混合性難聴**
伝音難聴と感音難聴、両方の原因によって起こる難聴です。

●年齢とともに、特に高い音から聞き取りにくくなってきます。

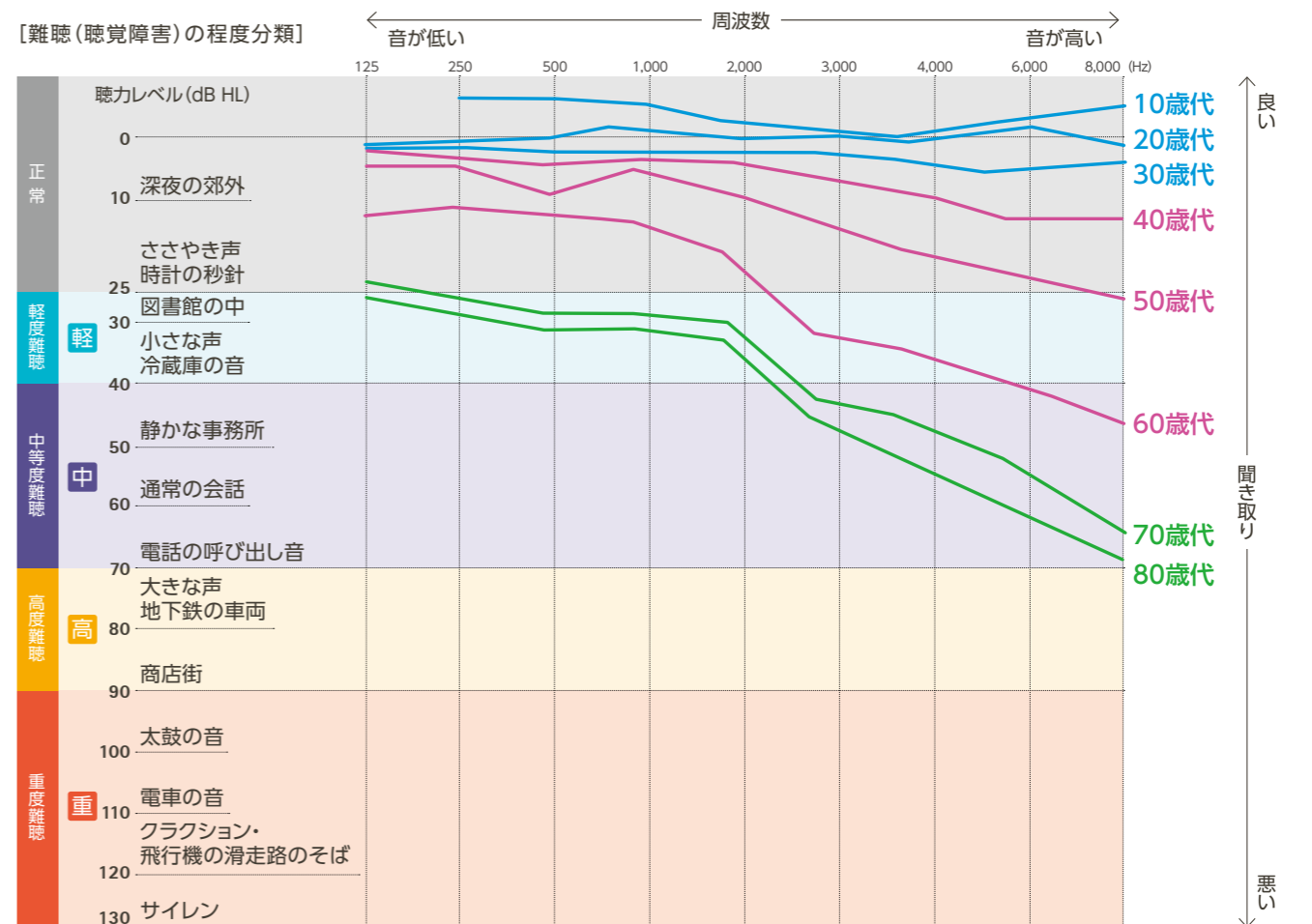


●人の耳が左右にあるのは、両耳のほうが聞こえの効果や利点が多いからです。

- 騒がしい環境でも聞き取りに集中できる。
雑音には自然にバリアをし、左の音に意識が集中
- 音がする方向や距離感をつかめる。
左右に届く音の情報の違いで方向を把握
- 片耳で聞くより、はっきりいい音に感じる。
「両耳加算効果」が働き、音を大きく感じる
- 片耳で聞きもれても、もう片方が情報を補完。
[視覚でたとえると]
しすせ(右目) + さそ(左目) = さしすせそ(両目)

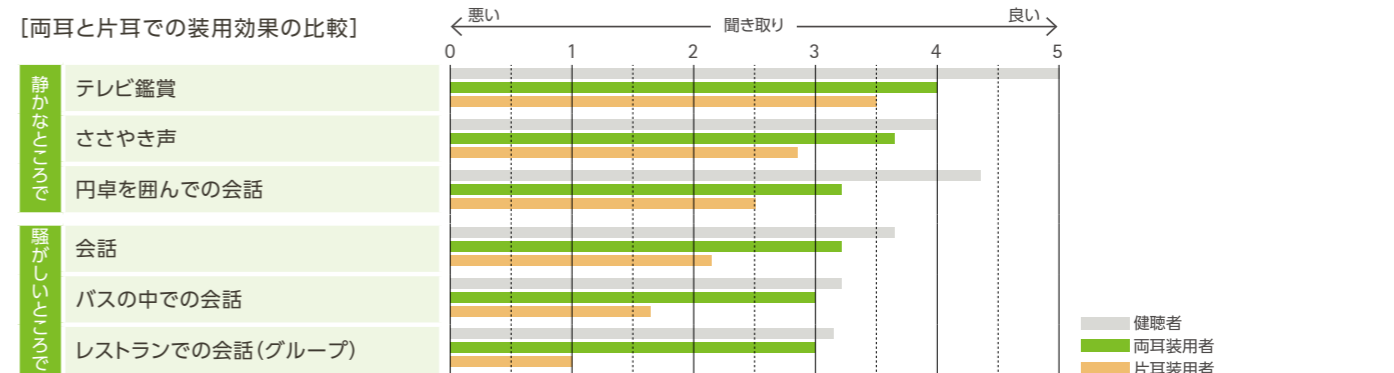

補聴器は、買うときも、使ってから調整が大切。
 少しずつ慣れて、長いお付き合いをめざしましょう。

補聴器をご購入される前に
 耳鼻咽喉科での受診をおすすめします。

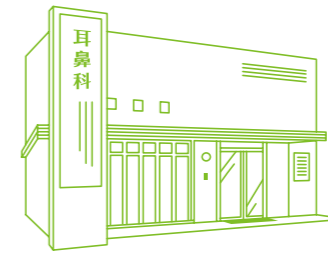

ご購入の流れを
 ムービーでご紹介



● 疑問や不安な点があれば一人で悩まず、スタッフにご相談ください。

1 カウンセリング

お店の専門スタッフが「聞こえ」の悩みをじっくりお伺いします。

普段お困りのこと(お客様ご記入欄)

・いつ頃から: _____

・どんなふうに: _____

2 聴力測定

補聴器の選定のためにお客様の聴力を測定します。

チェック事項	(スタッフ記入欄)
<input type="checkbox"/> 500、1,000、2,000Hzの気骨導差があるか	聴力に20dB以上の
<input type="checkbox"/> 直近2カ月以内に急激な	聴力変化があったか
<input type="checkbox"/> めまいや耳鳴りなどの症状	があるか
<small>※1つでも当てはまる場合は、耳鼻科医にご相談ください。</small>	

3 補聴器の選定

聴力測定の結果やご予算、使用環境に合った補聴器をお選びします。

ご希望について(お客様ご記入欄)

・ご予算: _____

・お困りのこと: _____

・ご購入後のイメージ: _____

4 調整(フィッティング)

聞こえ方をご確認いただきながら、きめ細かな調整を行います。

5 試聴

さまざまな場所で、両耳、片耳ずつなど聞こえ方を試してください。聞こえにくい場合は再調整します。

6 型どり

お客様一人ひとり違う耳あなの形に合わせるため型をとります。
※耳あな型補聴器、イヤモールドをご希望の場合。

7 補聴効果の確認

装用の有無による聞こえ方の違いを主観的および客観的に比較評価します。

8 ご購入

ご購入後、実際に装着してみて補聴器の設定が最適になるよう数回にわたり微調整します。

9 アフターサポート

ご購入後も使用上のアドバイスや定期点検などきめ細かなサービスでサポートします。

● 上記は一般的な流れです。

聞こえと補聴器について
 インフィニオシリーズ
 ルミティシリーズ
 パラダイスシリーズ
 ベーシックタイプ
 お子さま向けタイプ
 補聴援助システム/周辺機器
 機能・性能一覧

あなたは、耳あな型、それとも耳かけ型？

聴力に合わせて、お好みのタイプを選びましょう。

ステップに沿って選ぶと、ぴったりの補聴器を見つけやすくなります。



● 耳あな型か耳かけ型か、タイプは製品名からもわかります。

フォナック オーデオ 1 90

耳かけ型は「オーディオ」「ナイーダ」「スカイ」「テラ」、
耳あな型は「パート」という製品をご用意しています。

	サイズ	タイプ	装着イメージ	製品イメージ	適応聴力 (dB HL)						器種		
					25dB HL	40	70	90	100	110		120	
耳あな型 小さく目立ちにくい。 オーダーメイドで フィット感も抜群。	↑ 小 ↓ 大	IICタイプ 耳あなの奥まで入り、 外から見えない小ささ。			軽	中	高					パート 1-チタン ▶P24 パート P-チタン ▶P29 パート 1-10 NW O ▶P24 パート P-10 NW O ▶P29	
		CIC/ミニカナルタイプ 耳あなにすっぽり 入って目立たず、機能も豊富。			軽	中	高	重					
		カナルタイプ 操作しやすく機能が豊富で 幅広い聴力に対応。			軽	中	高	重					パート P-312 NW O ▶P29
		ハーフ/フルシェルタイプ 耳あなにしっかり フィットして安定感◎			軽	中	高	重					パート 1-R ▶P23 パート P-312 ▶P29
耳かけ型 多機能で 操作性も高い。 幅広い聴力に対応し、 カラーも豊富。	↑ 小 ↓ 大	RICタイプ 小型で目立ちにくく、着け心地も快適。 SPシェルの使用で、より安定感と 聞こえやすさをアップ。	 耳せん SPシェル		軽	中	高	重				オーデオ 1-スフィア ▶P19 オーデオ 1-R ▶P21 オーデオ L-R/L-312 ▶P26	
		標準タイプ ボタン操作がしやすく、 幅広い聴力に対応。			●スリムチューブ 軽 中 ●イヤフック 軽 中 高							ナイーダ L-PR ▶P27 ナイーダ L-M ▶P28 スカイ L-PR/L-M ▶P33	
		パワータイプ 高度・重度難聴に対応。 美しいフォルムも特徴。			軽 中 高 重							ナイーダ L-SP/L-UP ▶P28 スカイ L-SP/L-UP ▶P33	

聞こえと補聴器について
インフィニオシリーズ
ルミティシリーズ
パラダイスシリーズ
ベーシックタイプ
お子さま向けタイプ
補聴援助システム 周辺機器
機能性能一覧

機能はプラットフォームによっても異なります。
 世代ごとに進化してきた
 フォナックの“聞こえ”に注目してください。

ステップに沿って選ぶと、ぴったりの補聴器を見つけやすくなります。



●プラットフォームは、製品名ではI、L、Pと表記されています。


フォナック オーデオ 1 90

「I」はインフィニオ シリーズ、「L」はルミティ シリーズ、
 「P」はパラダイス シリーズです。

プラットフォームって何?			サウンドリカバリー2	メディアことば/メディア音楽	Bluetooth®接続*1	ロジャーダイレクト*2	マイフォナックアプリ*3	モーションセンサーヒアリング	ダイナミックノイズキャンセル	スピーチエンハンサー	スピーチセンサー	ステレオズーム2.0	全方向からのことばの明瞭性2.0
<p>「プラットフォーム」とは、言ってみれば補聴器の基本システムのこと。フォナックは新たな製品シリーズを登場させるたび、このプラットフォームを進化させ、聞こえのソリューションを充実させています。</p>			<p>聞き取りづらい高い音をよりクリアに。</p>	<p>ストリーミング音声の「ことば」と「音楽」を識別して、いい音に。</p>	<p>携帯電話とつないでハンズフリー通話や音楽ストリーミング。</p>	<p>ロジャーの音声を外受受信機なしで直接受信。</p>	<p>携帯電話を補聴器用のリモコンとして使える。</p>	<p>一緒に歩いている人の声を聞き取りやすく。</p>	<p>騒がしい場所で正面にいる人の声を聞き取りやすく。</p>	<p>静かな場所で小さな声を聞き取りやすく。</p>	<p>側方や後方からの声を識別し聞き取りやすく。</p>	<p>目の前の人の声にフォーカスし会話に集中しやすく。</p>	<p>ことばと雑音を分離し音声をよりクリアに。</p>
<p>I インフィニオ シリーズ [2025年1月~]</p> <p>オートセンス OS 7.0^{*4}</p>	<p>きわめて反応性に優れたパワフルなERA™チップによって、着けた瞬間から卓越したサウンドクオリティや安定した接続性を実現。騒音下でどの方向からの聞こえもよりクリアに。</p>		○	◎	◎	○	◎	○	◎	○	◎	◎	◎ ^{*5}
<p>L ルミティ シリーズ [2022年11月~]</p> <p>オートセンス OS 5.0</p>	<p>スピーチセンサーやステレオズーム2.0などから構成されるフォナックスマートスピーチテクノロジーを搭載。騒がしい中でのことばが理解しやすく、会話に役立つ機能が充実。</p>		○	◎	◎	○	◎	○	◎	○	◎	◎	—
<p>P パラダイス シリーズ [2020年12月~]</p> <p>オートセンス OS 4.0</p>	<p>オートセンス OSが第4世代へ進化。モーションセンサーヒアリングをはじめ、日常の聞こえをより快適にする数々の新機能を搭載。</p>		○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

●一部、対応していない器種もあります。*1:接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。*2:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にセットアップする必要があります。*3:お手持ちのスマートフォンにマイフォナックアプリをインストールする必要があります。*4:パートI-チタン、パートI-10 NW Oは6.0となります。*5:オーディオトスフィアのみとなります。

どのようなシーンで聞こえの悩みをお感じですか？ あなたの補聴器に、必要な機能(クラス)をチェック！

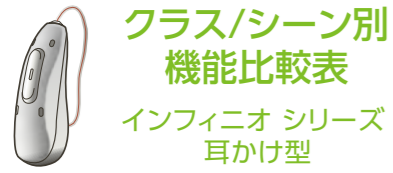

クラス/シーン別
機能比較表
インフィニオ シリーズ
耳かけ型

機能	自動環境適応	ハンズフリー通話や音楽鑑賞					会話を楽しむなら50(スタンダード)以上がオススメ		フォナックの先進機能				オーディオトスフィアに搭載
		携帯電話やPCと接続	テレビ鑑賞	騒がしい場所でのことばを聞き取りやすく	屋外で風切り音抑制	グループでの会話	歩きながらの会話	不快な衝撃音の抑制	非常に騒がしい場所で騒音を抑制	目の前の話者にフォーカス	360°の会話	静かな場所で小声を増幅	
クラス ※クラスによってチャンネル数も異なります。	オートセンス OS	Bluetooth®*1	※テレビコネクターDが必要です。	ウルトラズーム	ウインドブロック	roger ロジャーダイレクト*2	モーションセンサーヒアリング	サウンドリラックス	ダイナミックノイズキャンセル	ステレオズーム 2.0*3	スピーチセンサー*3*4	スピーチエンハンサー	全方向からのことばの明瞭性 2.0
独自機能を多数搭載 90プレミアム [20ch] 修理保証 4年間 紛失等サポート 2年間	8 シーン												
機能と価格をバランス 70アドバンス [20ch] 修理保証 2年間 紛失等サポート 2年間	7 シーン*5												
基本機能を充実 50スタンダード [16ch] 修理保証 2年間 紛失等サポート 1年間	6 シーン												
厳選機能で手頃な価格 30エッセンシャル [12ch] 修理保証 2年間 紛失等サポート 1年間	4 シーン												

オートセンス OS

周囲の音環境を分析し、最適なプログラムを自動的に選択・ブレンドする機能。

1	2	3	4	5	6	7	8
メディア ことば	メディア 音楽	静かな環境	騒音下でのことば	騒音下での快適性	車の中でのことば	音楽	非常に騒がしい中でのことば*6

90: 全機能
70: ほとんどの機能
50: 基本機能
30: 基本機能のみ

ロジャーをプラス

フォナックならどのクラスでも、補聴器で解決できない聞き取り環境をロジャーで解決可能！
●詳しくはP39をご覧ください。

ロジャーの使い方をムービーでご紹介

近 ← 話し手との距離 → 遠

■ 補聴器 + ロジャー
■ 補聴器のみ

*1:接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。
*2:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にセットアップする必要があります。詳しくはお求めの販売店にお問い合わせください。
*3:両耳装着時の機能です。
*4:オーディオトスフィアの70クラスには搭載されていません。
*5:オーディオトスフィアは8シーンとなります。
*6:両耳装着時の機能です。オーディオトスフィアは「非常に騒がしい中での全方向からのことば」になり片耳での使用が可能です。
●オーディオトスフィアには50(スタンダードクラス)/30(エッセンシャルクラス)がありません。

ステップに沿って選ぶと、ぴったりの補聴器を見つけやすくなります。



●クラスは、90、70、50、30と、数字で表記されています。
フォナック オーデオ 1 90
上級クラスから「90=プレミアムクラス」「70=アドバンスクラス」「50=スタンダードクラス」「30=エッセンシャルクラス」となります。

聞こえと補聴器について
インフィニオシリーズ
ルミティシリーズ
パラダイスシリーズ
ベーシックタイプ
お子さま向けタイプ
補聴援助システム/周辺機器
機能性一覧

使う人が、本当に便利だと思うものを求めて。
フォナックの技術は進化しつづけています。

オートセンス OS 7.0*1

着けた瞬間から“いい音”。
AIが作り出す卓越したサウンドクオリティ。

オートセンス OSは、長年にわたるAIによる機械学習で進化してきた自動環境適応機能プログラムです。
周囲の音環境を分析し、最適なプログラムを自動的に選択・ブレンドします。

- 設定を切り替えるのではなく“ブレンド”するので、音がナチュラルに変化します。
- 1秒間に700回、音を分析して、よりよい音を提供します。

オートセンス OSの動作イメージ

静かな環境 雑踏 踏切・工事現場 演奏会 声が響く場所 賑やかな場所 車の中

騒がしい場所ではノイズを効果的にカット。聞き取りやすく快適な聞こえになります。

歌や楽器の幅広い音域やスピードに対応しより豊かな音を楽しめます。

反響しやすい壁のある建物や天井が高い建物では声や音の反響を抑制します。

エンジン音など、車の中特有のノイズを減らして言葉を聞き取りやすくします。

〈オートセンス OS 対応表〉 インフィニオ/ルミティ/パラダイス シリーズ

オートセンス OS 7.0 ¹ /6.0 ² /5.0 ³ /4.0 ⁴ (ストリーミング)		静かな環境	騒音下でのことば	騒音下での快適性	音楽	反響する環境での快適性 ⁶	非常に騒がしい中でのことば ^{5,7}	車の中でのことば ⁸
メディア ことば ⁵	メディア 音楽 ⁵							
90	90	90	90	90	90	90	90	90
70	70	70	70	70	70	70	70	70
50	50	50	50	50	50	50	50	50
30	30	30	30	30	30	30	30	30

※オーディオトスフィア、パートI-チタン、パートP-チタンには50(スタンダードクラス)/30(エッセンシャルクラス)がありません。



AIによって、耳せんを提案。

世界中のクリニックから集めたフィッティング成功データのAI解析に基づいた耳せんを提案します。
フィッティング処方方式も、人が好む音質の指標であるハーマンカーブを参照したAPD 3.0を採用。着けた瞬間から好きになるファーストフィットをもたらします。

フォナックのテクノロジー

フォナック スマートスピーチ テクノロジー*9

オートセンス OSと連動して聞こえを最適化。
会話が、もっとスムーズに、もっとラクに楽しめる。

横や後ろからの会話に、スピーチセンサー。

1対1での会話に、ステレオズーム 2.0。

騒がしい場所での会話に、ダイナミックノイズキャンセル。

静かな場所での小さな話し声に、スピーチエンハンサー。

歩きながらの会話が弾む、モーションセンサーヒアリング。

グループでの会話などで音声補聴器(受信機)に届けるロジャー。

サウンドリカバー

聞き取りづらい高い音がよりクリアになる。

オフ さしすせそ

オン さしすせそ


よりクリアな聞き取りが可能です。

高い音を聞き間違えやすい聴力の方に、特におすすめのフォナック自慢の機能。聞き間違えやすい高い種類の音を圧縮して、聞き取りやすい高さと大きさにします。

※カナダの西オンタリオ大学との共同開発により実現。

コネクティビティ

ほぼすべての携帯電話とつながる。
ハンズフリー通話も快適。

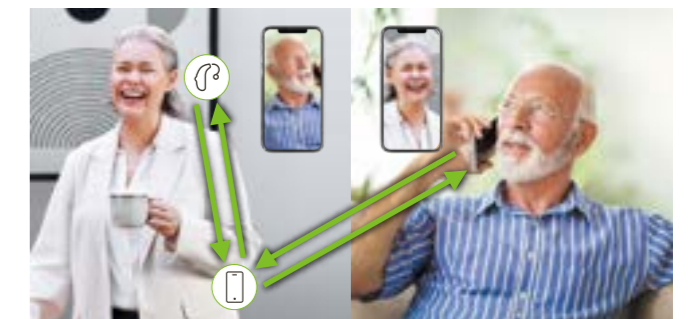

iOS、Android™はじめ、ほぼすべてのBluetooth®対応機器とつながります*10。また、インフィニオ シリーズはルミティ シリーズに比べストリーミングの距離を最大2倍に拡大。今まで以上に途切れないハンズフリー通話は相手にとっても快適です。

*1:オーディオトスフィア、オーディオI-R、パートI-R。*2:パートI-チタン、パートI-10 NW O。*3:ルミティ シリーズ。*4:パラダイス シリーズ。*5:パートI-10 NW O、パートI-チタン、パートP-10 NW O、パートP-312 NW O、パートP-チタンを除く。*6:インフィニオ シリーズを除く。*7:両耳間音声通信技術を搭載した機種を、両耳装着した時の機能です。オーディオトスフィアは「非常に騒がしい中での全方位からのことば」になり片耳での使用が可能です。*8:オーディオI-R、パートI-R、パートI-10 NW Oは70(アドバンスクラス)/50(スタンダードクラス)、オーディオトスフィア、パートI-チタンは70(アドバンスクラス)にも「車の中でのことば」を搭載しています。*9:インフィニオ シリーズ、ルミティ シリーズ。一部、対応していない機種もあります。*10:接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。

聞こえと補聴器について
インフィニオ シリーズ
ルミティ シリーズ
パラダイス シリーズ
ベーシックタイプ
お子さま向けタイプ
補聴援助システム/周辺機器
機能性能



Infinito Ultra

さらに進化したフォナックを、あなたへ。

補聴器テクノロジーの進化を一気に加速させ、「きこえの新次元」を切り拓く。フォナック最新のプラットフォームを搭載したのがインフィニオ シリーズです。2025年11月、インフィニオは大幅に性能がアップグレードされてインフィニオ ウルトラとしてさらに進化しました。

ことばと雑音を分離し騒がしい場所でもクリアな音声をもたらす新機能をはじめ、着けた瞬間から満たされる音質や優れたコネクティビティ、さらには水や汗にだんぜん強いウォーターブロックなどを実現。聞こえの可能性は、この補聴器から広がっていきます。



クラス別機能比較表

クラス	チャンネル	機能											補聴器価格帯 (片耳・非課税)			
		自動環境 適応	携帯電話や PCと接続	テレビ鑑賞	屋外で 風切り音抑制	グループ での会話	歩きながら の会話	不快な衝撃 音の抑制	非常に騒が しい場所で 騒音を抑制	非常に騒が しい場所で 声をクリアに	静かな場所 で小声を強調	音声検出		非常に騒がしい場所 でことばと雑音を分離し ことばをよりクリアに		
190	20ch	7.0 ^{*1}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	667,000円～ 710,000円
170	20ch	7.0 ^{*1}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	463,000円～ 512,000円
150	16ch	7.0 ^{*1}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	349,000円～ 362,000円
130	12ch	7.0 ^{*1}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	238,000円～ 249,000円

*1:パート I-チタン、パート I-10 NW Oは6.0となります。*2:接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。*3:パート I-10 NW O、パート I-チタンを除く。
*4:別売のテレビコネクターDが必要です。*5:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にセットアップする必要があります。詳しくはお求めの販売店にお問い合わせください。*6:両耳装着時の機能です。*7:オーディオ I-スフィアのみとなります。*8:パート I-R、オーディオ I-Rは「非常に騒がしい中でのことば」となります。
●オーディオ I-スフィア、パート I-チタンには50(スタンダードクラス)/30(エッセンシャルクラス)がありません。

ERA™ と DEEPSONIC™。 圧倒的な高性能を実現する2つのチップ。

優れた音質と接続性をさらにアップ。
きわめてパワフル&高速なERA™ チップ。
(パート I-R、オーディオ I-スフィア、オーディオ I-R に搭載)



処理能力を大幅に高めたERA™チップは、フォナック最新バージョンのオートセンス OS 7.0を指揮。周囲の音環境に応じてプログラムを自動的に選択・ブレンドする機能が、着けた瞬間から卓越したサウンドクオリティを実現。さらに、より安定したBluetooth®接続によってコネクティビティも進化。ハンズフリー通話や音楽ストリーミングも途切れることなく快適に楽しむことができます。


- 毎秒5億5200万回の演算処理。
- 74%^{*1}増設されたRAMによる高速処理。
- 補聴器を起動するとペアリングした機器にすぐ接続。
- 最大6倍^{*1}の送信パワーがストリーミングの距離を最大2倍^{*1}に拡大。

DEEPSONIC™ 「ことば」と「雑音」を分離するAI。 世界初^{*2} サウンドプロセッシング専用チップ。 (オーディオ I-スフィアに搭載)

フォナックが独自に開発したDEEPSONIC™は、補聴器テクノロジーでは初めてのサウンドプロセッシング用のディープ・ニューラル・ネットワーク(以下DNN)です。従来の補聴器チップ技術の常識を塗り替える圧倒的な処理能力を誇る

このDNNは、単なる音声識別を超越し、「ことば」と「雑音」を切り離し、雑音を最大限取り除くことに成功。どの方向から聞こえる声も、まさに透き通ったことばとして届けることを可能にしました。

- 世界初^{*2}、独自DNNによるサウンドプロセッシング専用チップ。
- 極めて高速な演算処理。
- 膨大なニューラル・コネクションと音サンプルを搭載。

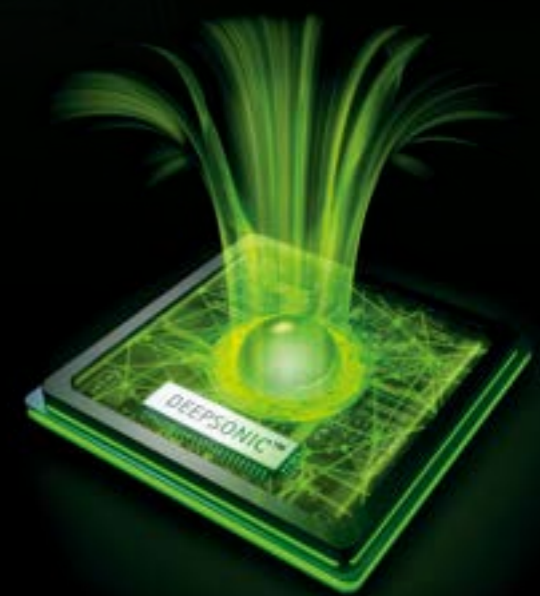

*1:ルミティとの比較。*2:2024年8月時点。ソノヴァ社調べ

聞こえと補聴器について
インフィニオシリーズ
ルミティシリーズ
パラダイスシリーズ
ベーシックタイプ
お子さま向けタイプ
補聴援助システム 周辺機器
機能性能一覧

1
インフィニオ
スフィア

2025年1月発売

耳かけ型 RICタイプ

[フォナック オーデオ トスフィア]

軽 中 高 重



AIのパワーが、聞こえを変える。
オーディオ インフィニオ スフィア。



オートセンス OS 7.0搭載。
フォナック補聴器のフラッグシップモデル。

トスフィア

- 指向性
- ワイヤレス通信
- 使用電池:リチウムイオン(充電式)
- 期待動作時間:18時間^{*1}
- (最大動作時間:56時間^{*2})
- ロジャーダイレクト対応



Water Block

IP68
防塵・防水

Ⓜ シルバーグレー



蓄電可能充電器

蓄電でき、しかもコンパクトサイズ。
外出先で充電することができて便利。

フォナック チャージャーGo
スフィア

33,000円(税込)

※オーディオ トスフィア (両耳)を2回フル充電できます。



エラ ディープソニック
ERA™とDEEPSONIC™。
デュアルチップで圧倒的な高性能を実現。

トスフィアは、パワフルで圧倒的に速い反応性
をもたらすERA™チップと、マイクに入力され
た音をAIを使ってサウンドプロセッシングする
DEEPSONIC™チップを搭載。これにより、音質
や接続性を大幅に向上させると同時に、騒がし
い環境で「ことば」と「雑音」を分離し音声から雑
音を除去することで、よりクリアな音声を実現
しています。

カラーバリエーション 標準色 Ⓜ 色見本はP35へ

- Ⓜ サンドベージュ
- Ⓟ サンドルウッド
- Ⓡ チェストナット
- Ⓢ シャンパン
- Ⓜ シルバーグレー
- Ⓡ グラファイトグレー
- Ⓢ ベルベットブラック

			補聴器(非課税)	フォナック チャージャーGo スフィア(税込)	合計
190(プレミアム)	20ch	片耳 710,000 円 ^{*3}	33,000 円	743,000 円	
170(アドバンス)	20ch	片耳 512,000 円 ^{*3}	33,000 円	545,000 円	

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:オートセンスOSで「静かな環境」プログラムを使用した場合。*3:UPIにはSPシェルが必要です。S、M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です(いずれも別途、代金がかかります。補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは11,300円(非課税)、チタンシェルは15,200円(非課税)、別購入の場合はレシーバ代金を含めアクリルシェルは24,530円(税込)、チタンシェルは28,820円(税込)。●各モデルの機能はP51~52の機能一覧をご覧ください。

販売名:フォナック オーデオ インフィニオ タイプ名:フォナック オーデオ トスフィア 管理医療機器認証番号:306ALBZX00017000

フォナック補聴器について

- 補聴器は両耳装着をおすすめします。●防塵・防水性能は、完全防水とは異なります。●電池寿命は使用状況により異なります。
- 各製品の適応聴力範囲はP58をご確認ください。●補聴器は非課税です。

Infinio Ultra

NEW 全方位からのことばの明瞭性 2.0

「ことば」と「雑音」を分離するから、
騒がしくても、みんなの声が透き通るようにクリアに。

Before

雑音だらけの音声が

コンコン カンカン
ごんごん
ザウザウ トコトコ

処理中

DEEPSONIC™で
瞬時に処理され
ことばと雑音を分離し

コンコン カンカン
ごんごん
ザウザウ トコトコ

After

透き通ったことばのみを
耳に届けます。

コンコン カンカン
ごんごん
ザウザウ トコトコ



- クリアで透き通ったことばの聞こえを実現。
機能を使用する前は雑音だらけだった音声が、DEEPSONIC™によって
ことばと雑音に分離され、ことばのみの透き通った音声として届けられます。
- 賑やかな場所でも、話にもっと集中できる。
この新機能は、最大10.2dBものSN比の改善をもたらし、
上下左右360°どの角度からも会話を聞き取ることができます*1。
また、すべてのことばを聞き取って理解できる可能性は2倍*2になります。
グループでの会話でも話に集中することが可能です。
- 瞬時に全方位からのことばを理解。
DEEPSONIC™は、大きな遅延が起きることなく、ことばを処理するので、
話している人の人数に関係なく、非常に騒がしい環境下で瞬時に
全方位からのことばを理解することができます。
さらに、進化した全方位からのことばの明瞭性 2.0は以前より
30%省エネを実現しているため、従来より充電残量時間を
気にせず安心して一日過ごすことが可能になりました。



*1:Raufer, S., Kohlhauer, P., Jehle, F., Kühnel, V., Preuss, M., Hobi, S. (2024). Spheric Speech Clarity proven to outperform three key competitors for clear speech in noise. Phonak Field Study News retrieved from <https://www.phonak.com/evidence>
*2:Wright, A., et al "Spheric Speech Clarity applies DNN signal processing to significantly improve speech understanding from any direction and reduce the listening effort." Phonak Field Study News <https://www.phonak.com/ja-jp/professionals/guides/evidence-library>

聞こえと補聴器について
インフィニオシリーズ
ルミティシリーズ
パラダイスシリーズ
ベーシックタイプ
お子さま向けタイプ
補聴援助システム 周辺機器
機能性能一覧

1 インフィニオ シリーズ

2025年3月発売

耳かけ型 RICタイプ [フォナック オーデオ I-R]

軽中重高



処理能力を大幅に高めたERA™チップを搭載。
騒音下でのより快適な聞こえと優れたコネクティビティを実現。



オートセンス OS 7.0搭載。
インフィニオ シリーズの定番RICモデル。

I-R

指向性

ワイヤレス通信

使用電池:リチウムイオン(充電式)
期待動作時間:20時間*1
(最大動作時間:31時間*2)
ロジャードイレクト対応
フォナック クロス I-R対応

原寸大



Water Block

IP68
防塵・防水

①⑥ シルバーグレー



「車の中でのことば」を50クラスまで拡大。

90クラスに採用されていた「車の中でのことば」が50クラスまで拡大。そして、「サウンドリラックス」を50クラスまで展開。さらに「リアルイヤースOUND」は全クラスに装備。これらの機能拡張により、オートセンス OS 7.0の働きを最適化。騒音下の聞き取りやすさを向上させています。



充電器

磁気で補聴器を保持。
使いやすいマグネット式。

フォナック チャージャー RIC I

11,000円(税込)

※オーデオ I-Rを3時間でフル充電できます。



蓄電可能充電器

蓄電でき、しかもコンパクトサイズ。
外出先で充電することができて便利。

フォナック チャージャーGo I

33,000円(税込)

※オーデオI-R(両耳)を3回フル充電できます。



カラーバリエーション 標準色 ①⑥ 色見本はP35へ

①① サンドベージュ ①③ サングラウウッド ①④ チェストナット ①⑤ シャンパン ①⑥ シルバーグレー ①⑦ グラファイトグレー ①⑧ ベルベットブラック

	補聴器(非課税)	補聴器(非課税)		合計
		フォナック チャージャー RIC I(税込)	フォナック チャージャーGo I(税込)	
I90(プレミアム)	20ch	片耳 670,000 円*3	11,000 円	681,000 円
			33,000 円	703,000 円
I70(アドバンス)	20ch	片耳 484,000 円*3	11,000 円	495,000 円
			33,000 円	517,000 円
I50(スタンダード)	16ch	片耳 349,000 円*3	11,000 円	360,000 円
			33,000 円	382,000 円
I30(エッセンシャル)	12ch	片耳 240,000 円*3	11,000 円	251,000 円
			33,000 円	273,000 円

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:オートセンスOSで「静かな環境」プログラムを使用した場合。*3:UPIにはSPシェルが必要です。S、M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です(いずれも別途、代金がかかります)。補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは11,300円(非課税)、チタンシェルは15,200円(非課税)、別購入の場合はレシーバ代金を含めアクリルシェルは24,530円(税込)、チタンシェルは28,820円(税込)。●各モデルの機能はP51~52の機能一覧をご覧ください。

販売名:フォナック オーデオ インフィニオ タイプ名:フォナック オーデオ I-R 管理医療機器認証番号:306ALBZX00017000

Infinio Ultra

インフィニオは安心を支える
機能や周辺機器も充実。

2025年11月、インフィニオは大幅に性能がアップグレードされて
インフィニオ ウルトラスとしてさらに進化しました。

ウォーターブロック

水や汗にだんぜん強いから、まいにち安心。
IP68*1を超える防水性・防汗性*2。



●密閉ハウジングと特殊コーティング。

水の侵入を防ぐ徹底した密閉ハウジングと特殊なコーティングで、生活防水としてのIP68を超える防水性と防汗性を実現しています。

●実証されたスイス・メイドの信頼性。

入念に保護された頑強なハウジングは、真水だけでなく塩水・プール水での浸漬テスト、汗(合成)によるスプレーテストなど、1万時間以上、135項目におよぶ性能テストをクリア。スイスの精密な設計や製造技術がもたらす高い信頼性は、厳しいテストによって実証されています。



オートセンス OS 7.0*3

性能を大幅に進化。
きこえをよりクリアに。



従来のオートセンス OSに比べ18倍の音響サンプルで機械学習を行い、音環境を検出する精密性も24%向上。進化した自動環境適応機能プログラムが、シーンに合わせた“いい音”をブレンドします。

カメレオンのような
オートセンス OSを
ムービーでチェック!



ワンステップペアリング

Bluetooth®対応機器との
接続がアプリ内で完結。



これまでBluetooth®画面とマイフォナック アプリでの2段階の操作が必要でしたが、マイフォナック アプリだけの操作で完結できるように。補聴器とBluetooth®対応機器を簡単に接続することができます。



マイフォナック アプリ

「my補聴器を探す」で
紛失時もサポート。



アプリをダウンロードすると携帯電話が補聴器用のリモコンになる他、補聴器を紛失した際に役立つ「my補聴器を探す」や「リモートサポート」など多彩な機能を活用できます。

●詳しくはP45、46をご覧ください。

*1:IP68は、防塵・防水の国際保護等級です。*2:インフィニオ シリーズ(パート I-R、パート I-10 NW O、パート I-チタンを除く)。*3:パート I-チタン、パート I-10 NW Oは6.0となります。*リモートサポートによる対応や費用は販売店によって異なりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。一部対応していない販売店もございます。

パワフル&高速なERA™チップを搭載。
フォナック初の充電式耳あな型補聴器「バート I-R」新登場。



オートセンス OS 7.0搭載。
聞こえの機能やコネクティビティも
ワンランク上の「充電式」。

I-R (M/P/SP/UP)

指向性
ワイヤレス通信
使用電池:リチウムイオン(充電式)
期待動作時間:24時間*1
(最大動作時間:30時間*2)
ロジャーダイレクト対応



オートセンス OS 6.0搭載。
強く、薄く、小さい。チタン製はフォナックだけ。

I-チタン (M/P/SP)

無指向性
使用電池:PR536(10)
電池寿命:55~75時間
シェルタイプ:IIC/CIC



オートセンス OS 6.0搭載。
目立ちにくい。シンプル操作で、扱いやすい。

I-10 NW O (M/P/SP)

無指向性
使用電池:PR536(10)
電池寿命:55~75時間
シェルタイプ:IIC/CIC



充電器

磁石でカチッと固定。
便利なスナップ チャージシステム。

フォナック チャージャー



パート I

11,000円(税込)

*パート I-Rを3時間でフル充電できます。




音も形も、初回装用時から心地よくフィットする。
新しいオーダーメイドシステム「ライトフィット」。

「ライトフィット」は、装用者の耳の形状と聴力に合わせて、AIがベントサイズ、レシーバを選定し、より適切な音質/形状/フィット感を実現する、新しいオーダーメイドアプローチです。初めての装用時から満足いただける“いい音”と可能な限り“小さなサイズ”を、一度の製作プロセスで実現します。バイオメトリックキャリブレーション、AOV(音響最適化ベント)、AOR(音響最適化レシーバ)などを駆使し、それぞれの耳にあった音響効果を作り出します。

カラーバリエーション 色見本はP35へ

<シェル>
● ブラック ● ブルー(左耳のみ) ● クリア
● ベージュ ● レッド(右耳のみ)

<フェースプレート>
● ブラック ● ベージュ

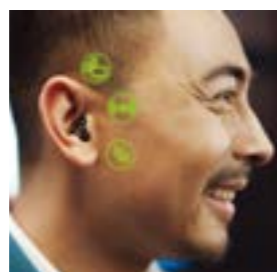

トントンと2回タップ。
さまざまな機能呼び出せる「タップコントロール」。

耳あな型補聴器で初めてモーションセンサーを搭載。これによりタップコントロールが使えるようになりました。ハンズフリー通話の操作は耳または補聴器をダブルタップするだけでOK。音楽ストリーミングの一時停止、再生もタップ操作で行えます。

付属品

フォナック ミニコントロール
別売価格:20,790円(税込)

補聴器を装着したまま、音量調節やプログラム切り替えができるリモコンです。

*フォナック ミニコントロールはパートI-チタン、パートI-10 NW Oでプログラムスイッチを付かなかつた場合に付属されます。
*パートIのプログラムスイッチ付きのモデルはミニコントロールとの互換性はありません。
*製品写真のデザインは異なる場合があります。




カラーバリエーション 色見本はP35へ

<シェル>
● ブルー(左耳のみ) ● クリア ● レッド(右耳のみ) ● ベージュ
<フェースプレート>
● ブラック (I-チタン、ミニコントロール 対応のI-10 NW Oのみ) ● ブラウン ● チタニウムグレー (I-チタンのみ)

耳に合わせた音響効果を作り出す
バイオメトリックキャリブレーション。

耳の解剖学的構造に対応した1600のポイントから得られる情報をもとに、指紋のように個々に異なる耳の形状を精密に分析。耳介で発生する音響効果をあなたの耳に合わせて作り出します。

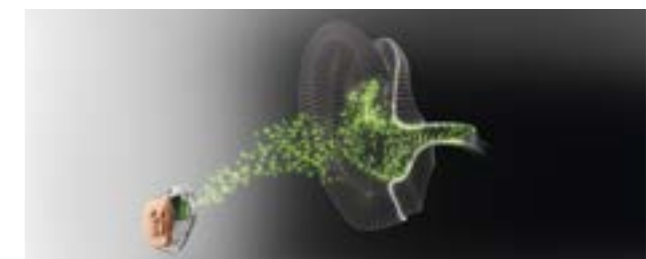

	補聴器(非課税)	フォナック チャージャー パート I(税込)	合計
I90(プレミアム)	20ch 片耳 697,000 円	11,000 円	708,000 円
I70(アドバンス)	20ch 片耳 503,000 円	11,000 円	514,000 円
I50(スタンダード)	16ch 片耳 362,000 円	11,000 円	373,000 円
I30(エッセンシャル)	12ch 片耳 249,000 円	11,000 円	260,000 円

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:オートセンスOSで「静かな環境」プログラムを使用した場合。

	パートI-10 NW O 補聴器(非課税)	パートI-チタン 補聴器(非課税)
I90(プレミアム)	20ch 片耳 667,000 円	片耳 690,000 円
I70(アドバンス)	20ch 片耳 463,000 円	片耳 486,000 円
I50(スタンダード)	16ch 片耳 354,000 円	
I30(エッセンシャル)	12ch 片耳 238,000 円	

●耳あな型は、耳あなの形状や聴力によって大きさが多少異なります。●I-チタン、I-10 NW Oには通信機能がありません。ワイヤレスアクセサリは使用できません。●Tコイルは無償オプションです。●プログラムスイッチはI-10 NW Oに標準装備、I-チタンは無償オプションです。●各モデルの機能はP51~52の機能一覧をご覧ください。

販売名:フォナック パート インフィニオ 管理医療機器認証番号:307ALBZX00008000



Lumity

会話が輝きだす。ルミティシリーズ

人と人が会話することの喜びをもっと深めたい。

だからルミティシリーズは、フォナック スマートスピーチ テクノロジーを搭載。

側方や後方からの声を識別し聞き取りやすくするスピーチセンサー、

目の前の相手との会話に集中しやすくするステレオズーム 2.0、

周囲の騒音を抑えてより聞き取りやすくする

ダイナミックノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで

ことばの理解を向上させる機能によって、

会話がもっとスムーズに、もっとラクに楽しめるようになります。



クラス別機能比較表

クラス	チャンネル	機能											補聴器価格帯 (片耳・非課税) ※スカイルミティを除く。	
		自動環境 適応	携帯電話や PCと接続	テレビ鑑賞	屋外で 風切り音 抑制	グループ での会話	歩きながら の会話	不快な衝撃 音の抑制	非常に騒が しい場所で 騒音を抑制	目の前の 話者に フォーカス	ホールで 反響音を 抑制	静かな場所 で小声を 強調		音声検出
		オート センス OS	Bluetooth**1	テレビ コネクターD**2	ウインド ブロック	roger ロジャー ダイレクト**3	モーション センサー ヒアリング	サウンド リラックス	ダイナミック ノイズ キャンセル	ステレオ ズーム 2.0**4	エコ ブロック	スピーチ エンハンサー	スピーチ センサー**4	
L90	20ch	5.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	560,000円～ 570,000円
L70	20ch	5.0	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	400,000円～ 410,000円
L50	16ch	5.0	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	270,000円～ 280,000円
L30	12ch	5.0	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	170,000円～ 180,000円

*1:接続状況や携帯電話のBluetooth®のバージョンによって接続できない場合がございます。*2:別売のテレビコネクターDが必要です。*3:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にセットアップする必要があります。詳しくはお求めの販売店にお問い合わせください。*4:両耳装着時の機能です。●一部、対応していない機種もあります。



2024年9月発売(L-312) / 2022年11月発売(L-R)

耳かけ型 RICタイプ

[フォナック オーデオ L-R/L-312]

軽 中 高 重



もっとスムーズに、もっとラクに会話が楽しめる。
フォナック スマートスピーチ テクノロジーを搭載。

目立ちにくいRICタイプに
フォナックの新技术を凝縮。

空気電池PR41 (312)を使用。
より小さなRICタイプ。

L-R

指向性

ワイヤレス通信

使用電池:リチウムイオン(充電式)
期待動作時間:18時間*1
ロジャーダイレクト対応
フォナック クロス L-R対応



原寸大



IP68
防塵・防水

Ⓟ シルバーグレー

L-312

指向性

ワイヤレス通信

使用電池:PR41 (312)
電池寿命:60~85時間
ロジャーダイレクト対応



原寸大



IP68
防塵・防水

Ⓟ シルバーグレー

充電器

新設計でコンパクトに。
磁気で補聴器を保持してくれるので、
使いやすさもアップ。

フォナック チャージャー Ease

11,000円(税込)

※オーデオ L-Rを3時間でフル充電できます。



フォナック スマートスピーチ テクノロジー

- スピーチセンサー
- スピーチエンハンサー
- ステレオズーム 2.0
- ダイナミックノイズキャンセル
- モーションセンサーヒアリング
- ロジャーテクノロジー

オートセンス OS 5.0

- AIをベースとした機械学習で開発
- 毎秒700回の環境スキャン
- 200以上のユニークな設定の組み合わせ
- ことばの理解の機能と快適性



カラーバリエーション 標準色 Ⓟ 色見本はP35へ

Ⓜ0 ● ベージュ Ⓜ1 ● サンドベージュ Ⓜ4 ● チェストナット Ⓜ5 ● シャンパン Ⓜ6 ● シルバーグレー Ⓜ7 ● グラファイトグレー Ⓜ8 ● ベルベットブラック

クラス	チャンネル	修理保証	紛失等 サポート	オーデオ L-R (充電式)			オーデオ L-312 (電池式)
				補聴器 (非課税)	フォナック チャージャー Ease (税込)	合計	補聴器 (非課税)
L90 (プレミアム)	20ch	4年間	紛失等 サポート 2年間	片耳 570,000円*2	11,000円	581,000円	片耳 560,000円*2
L70 (アドバンス)	20ch	2年間	紛失等 サポート 2年間	片耳 410,000円*2	11,000円	421,000円	片耳 400,000円*2
L50 (スタンダード)	16ch	2年間	紛失等 サポート 1年間	片耳 280,000円*2	11,000円	291,000円	片耳 270,000円*2
L30 (エッセンシャル)	12ch	2年間	紛失等 サポート 1年間	片耳 180,000円*2	11,000円	191,000円	片耳 170,000円*2

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:UPIにはSPシェルが必要です。S、M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です(いずれも別途、代金がかかります。補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは10,500円(非課税)、チタンシェルは14,175円(非課税)、別購入の場合はレシーバ代金含めアクリルシェルは23,100円(税込)、チタンシェルは27,148円(税込))。●各モデルの機能はP53~54の機能一覧をご覧ください。

販売名:フォナック オーデオ ルミティ タイプ名:フォナック オーデオ L-R/フォナック オーデオ L-312 管理医療機器認証番号:304ABBZX00034000



2026年3月発売(L-M) / 2024年5月発売(L-SP) / 2023年9月発売(L-PR/L-UP)

耳かけ型 パワータイプ

[フォナック ナイダ L-PR/L-M/L-SP/L-UP]

軽 中 高 重



フォナックで最もパワフルな聞こえソリューション、ナイダ。 新たにL-Mを加え、幅広い聴力に対応するフルラインナップが完成。



多機能で且つ頼もしいパワーの 充電式補聴器。

L-PR

- 指向性
- ワイヤレス通信
- 使用電池:リチウムイオン(充電式)
- 期待動作時間:18時間*1
- ロジャーダイレクト対応
- フォナック クロス L対応



標準タイプ充電器

乾燥・充電が一度にできる保管ケース。

フォナック チャージャー Combi BTE 2

11,000円(税込)

※充電式補聴器を3時間でフル充電できます。



オプション

オーダーメイド耳せんも収まる
収納スペース付き充電器。

チャージャー BTE RIC

11,000円(税込)

フォナック チャージャー Combi BTE 2用の
予備用充電パック。

パワーパック

11,550円(税込)

※充電式補聴器を4回フル充電できます。



2007年に誕生以来、世界各国で愛されている 王道の補聴器、フォナック ナイダ。

ナイダシリーズは、2007年に世界で誕生し、国内では2008年に発売された高重度難聴者向けのパワータイプ補聴器。新たなモデルを世に送り出すたびに、困難な聞き取りの課題に応える進化を重ねてきました。

たとえば2代目では、より広帯域を処理できる進化した「サウンドリカバー」を搭載。5代目ではことばを聞きわけやすいようメリハリのある音を伝える「スローコンプレッション」を導入。そして最新の第8世代モデル、ナイダ ルミティは長年培われてきた高出力設計と音質技術に、最新の環境適応機能と接続性を融合しています。

「聞こえる」その先の体験を支える王道の補聴器として、進化は今も続いています。



「ロジャー」をプラス! ①

- 話者と離れたシーンでは補聴器+ロジャー!
- 話者と聞き手の距離が離れているとき、補聴器だけでは会話が聞き取りづらいたることがあります。そんなとき補聴器にロジャーをプラスすれば補聴器の限界をサポートし、より良い聞こえを実現します。



詳しくはP39へ▶

カラーバリエーション

- 標準色 (P6) (L-Mは(P5)) 色見本はP35へ
- (P0) ベージュ
 - (P1) サンドベージュ
 - (P3) サンドルウッド
 - (P4) チェストナット
 - (P5) シャンパン
 - (P6) シルバーグレー
 - (P7) グラファイトグレー
 - (P8) ベルベットブラック



小さめの標準タイプ、 L-Mが新登場。

L-M

- 指向性 Tコイル標準
- ワイヤレス通信
- 使用電池:PR41(312)
- 電池寿命:55~80時間
- ロジャーダイレクト対応



高度難聴者向けのSPも ラインナップ。

L-SP

- 指向性 Tコイル標準
- ワイヤレス通信
- 使用電池:PR48(13)
- 電池寿命:65~100時間
- ロジャーダイレクト対応



19年に渡るナイダシリーズ最新の 重度難聴者向け補聴器。


L-UP

- 指向性 Tコイル標準
- ワイヤレス通信
- 使用電池:PR44(675)
- 電池寿命:110~190時間
- ロジャーダイレクト対応



「ロジャー」をプラス! ②

- テレビの音声をいい音で届けてくれる。
- 家族でテレビを観ているときは、音量が大きくなりすぎていないか気になるものです。
- ロジャーをテレビにつなげば音声を耳元に届けてくれるので音量を上げずに楽しめます。

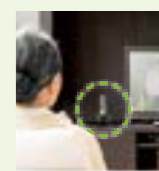

詳しくはP39へ▶

スカイ卒業サポート

買い替え割

お子さま向け補聴器「フォナック スカイ」から「フォナック ナイダ」へお買い替えになるお客様に、特別な割引サービスをご用意しております。詳しくは販売店におたずねください。

	ナイダ L-PR(充電式)			ナイダ L-M/SP/UP(電池式)		
	補聴器(非課税)	フォナック チャージャー Combi BTE 2(税込)	合計	補聴器(非課税)		
L90(プレミアム)	修理保証 4年 紛失等サポート 2年	20ch	片耳 570,000 円	11,000 円	581,000 円	片耳 560,000 円
L70(アドバンス)	修理保証 2年 紛失等サポート 2年	20ch	片耳 410,000 円	11,000 円	421,000 円	片耳 400,000 円
L50(スタンダード)	修理保証 2年 紛失等サポート 1年	16ch	片耳 280,000 円	11,000 円	291,000 円	片耳 270,000 円
L30(エッセンシャル)	修理保証 2年 紛失等サポート 1年	12ch	片耳 180,000 円	11,000 円	191,000 円	片耳 170,000 円

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:障害者総合支援法対応につきましては、無償保証期間は1年となります。*3:障害者総合支援法対応は、紛失・盗難・全損時リニューアルサポートの対象外となります。

●各モデルの機能はP53~54の機能一覧をご覧ください。

販売名:フォナック ナイダ ルミティ 管理医療機器認証番号:305ABBZX00026000



P
パラダイス
 シリーズ

耳あな型
[フォナック パート P]

軽 中 高 重

豊かな音、洗練されたデザイン、つながる機能。
 フォナックの技術を凝縮した
 フルオーダーメイド補聴器。

ワイヤレスイヤホンのように“いい音”で楽しむ。
 ハンズフリー通話や音楽ストリーミングも。

P-312 (M/P/SP/UP)

指向性
ワイヤレス通信
 使用電池:PR41 (312)
 電池寿命:50~75時間
 ロジャークダイレクト対応
 シェルタイプ:カナル/ハーフシェル/フルシェル
※耳の形状によってはカナルサイズでのご注文の場合もハーフシェル
 サイズで作成させていただく場合がございます。



シェルの厚さはわずか0.2mm。
 チタン素材だから、より強く、より小さく。

P-チタン (M/P/SP)

無指向性
 使用電池:PR536 (10)
 電池寿命:55~75時間
 シェルタイプ:IIIC/CIC

IP68
 防塵・防水

0.2mm
強度が高いから、シェルの厚さはわずか0.2mm。従来比*50%を実現。
 *フォナック パート V-nano



目立ちにくく、しかもシンプル操作で扱いやすい。

P-10 NW O (M/P/SP)

無指向性
 使用電池:PR536 (10)
 電池寿命:55~75時間
 シェルタイプ:IIIC/CIC



IP68
 防塵・防水

電池の持ちを重視する方におすすめのタイプ。

P-312 NW O (M/P/SP)

無指向性
 使用電池:PR41 (312)
 電池寿命:90~130時間
 シェルタイプ:ミニカナル/カナル/ハーフシェル



付属品

フォナック ミニコントロール
 別売価格:20,790円(税込)

補聴器を装着したまま、
 音量調節やプログラム切り替えができる
 リモコンです。

※フォナック ミニコントロールはパート P-チタン、
 パート P-10 NW O でプログラムスイッチを
 付けなかった場合に付属されます。

※パート P のプログラムスイッチ付きの
 モデルはミニコントロールとの互換性がありません。
 ※製品写真のデザインは異なる場合があります。



カラーバリエーション 色見本はP35へ

〈シェル〉		〈フェースプレート〉	
● ブルー(左耳のみ)	● クリア	● ベージュ (P-312 NW O、P-312のみ)	● ブラウン (P-チタン、P-10 NW Oのみ)
● レッド(右耳のみ)	● チタニウムグレー (P-チタンのみ)	● ブラウン (P-チタン、P-10 NW Oのみ)	● ブラック (P-チタン、P-312、ミニコントロール対応のP-10 NW Oのみ)
● ベージュ	● ブラック (P-312のみ)		

無償オプション対応表

	P-チタン	P-10 NW O	P-312 NW O	P-312
Tコイル	○	○	○	×
ポリウムコントロール	×	×	×	○

※プログラムスイッチは
 P-10 NW O、P-312に
 標準装備、他機種は無償
 オプションです。

		20ch	パート P-10 NW O / パート P-312 NW O		パート P-312	パート P-チタン
			補聴器 (非課税)	補聴器 (非課税)	補聴器 (非課税)	補聴器 (非課税)
P90 (プレミアム)	修理保証 4年間 初年等サポート 2年間	20ch	片耳 565,000 円	片耳 580,000 円	片耳 585,000 円	
P70 (アドバンス)	修理保証 2年間 初年等サポート 2年間	20ch	片耳 392,000 円	片耳 405,000 円	片耳 412,000 円	
P50 (スタンダード)	修理保証 2年間 初年等サポート 1年間	16ch	片耳 228,000 円	片耳 238,000 円		
P30 (エッセンシャル)	修理保証 2年間 初年等サポート 1年間	12ch	片耳 120,000 円	片耳 125,000 円		

●耳あな型は、耳あなの形状や聴力によって大きさが多少異なります。●P-チタン、P-10 NW O、P-312 NW Oには通信機能がありません。ワイヤレスアクセサリは使用できません。
 ●各モデルの機能はP55~56の機能一覧をご覧ください。

販売名:フォナック パート パラダイス 管理医療機器認証番号:304ABBZX00014000


フォナック耳あな型補聴器 選べるベントオプション*

ベントとは、補聴器のシェル、イヤモールドの出音口側と外側をつなぐ通気孔のことです。
 ベントによって、補聴器を装着時に感じる鼓膜への圧迫感、
 装着後に発生する自分の声の響きや違和感を軽減できます。

フォナック独自。耳あな型補聴器のオープンベント

オープンベントのメリット

- ① こもり感、閉塞感が大きく軽減されます。
- ② 自然な音が直接、聞こえます。
- ③ 耳への接地面が少なく、装着時の圧迫感が軽減されます。

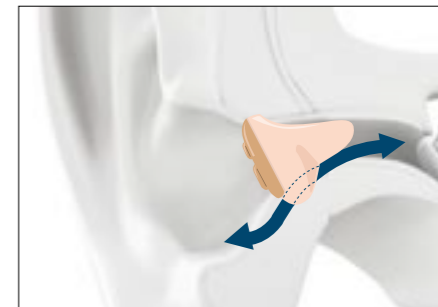

各種ベントオプション

名称	形状	解説
オープンベント		3.5mm以上の段ホールベント、または3.5mm以上の段溝ベント。全体的にベントを開放するように大幅にカットされた形状。最も外耳道への接地面積が小さく、より一層こもり感を軽減します。
シャークバイトベント		ベントの中間部分が切り落とされたベント。外耳道への接地面積を少なくし、こもり、響きや咀嚼音を緩和します。外耳道が細い(薄い)場合は作成できない場合もあります。
Dベント		シェルの外耳道底の形状を活かした半円の形で、ベント形状を大きくできます。外耳道の形状によってDベントができない場合があります。同じベント径でDベントはホールベントより効果が発揮されます。
溝ベント		外耳道へ接地面を少なくするため、ホールベントではなく、溝の形をしたベントです。
段ベント		段ベントはシェルが外耳道に触れる面積を少なく、出音口と鼓膜の間の容積を大きくして、補聴器の装着後に自分の声の響きやこもりを軽減することが可能です。
ホールベント		丸い筒状のスタンダードなベント。

※:パート I-Rを除く。
 ※耳の形状と外耳道の太さやレシーバーの大きさによってご要望のベントを開けられない場合もあります。
 ※レシーバーのパワーSP、UPは1.0mmベントを推奨します。
 ※指定ベントの太さ:1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm



2025年6月発売 (RIC-R)
2024年5月発売 (RIC-312/BTE)

T
テラ
シリーズ

ベーシックタイプ
耳かけ型
[フォナック テラ/テラ+]

軽 中 高 重

充電式
電池式

必要な機能を厳選して、
お求めやすい価格を実現。

テラ+に、リーズナブルな価格の「充電式」が新登場。

テラ シリーズは、ベーシックな機能を搭載した「テラ」とワイヤレスアクセサリやアプリも活用できる「テラ+」の2ラインを設定。それぞれRICタイプ、標準タイプ(BTE-M)、パワータイプ(BTE-SP/UP)と、耳かけ型補聴器をリーズナブルな価格で取り揃えています。

「テラ+」には新たに充電式のRIC-Rも登場。充実したラインナップからお選びいただけます。

目立ちにくいRICタイプの 充電式補聴器。

テラ+ RIC-R

指向性
ワイヤレス通信
使用電池:リチウムイオン(充電式)
期待動作時間:18時間*



充電器

磁気で補聴器を保持。
使いやすいコンパクトサイズ。

フォナック チャージャー Ease

11,000円(税込)
*テラ+ RIC-Rを
3時間でフル充電できます。



見た目、着け心地にこだわる方に。 小さなRICタイプ。

テラ RIC-312 テラ+ RIC-312

指向性
ワイヤレス通信
使用電池:PR41(312)
電池寿命:60~85時間



操作しやすい標準タイプを お求めの方に。

テラ BTE-M テラ+ BTE-M

指向性 Tコイル標準
ワイヤレス通信
使用電池:PR41(312)
電池寿命:55~80時間



*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:テラ RIC-312、テラ+ RIC-312、テラ+ RIC-RのUPにはSPシェルが必要です。S、M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です(いずれも別途、代金がかかります。補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは10,500円(非課税)、チタンシェルは14,175円(非課税)、別購入の場合はレシーバ代金含めアクリルシェルは23,100円(税込)、チタンシェルは27,148円(税込))。

●各モデルの機能はP55~56の機能一覧をご覧ください。

販売名:フォナック テラ 管理医療機器認証番号:306ALBZX00008000

高度難聴者向けの スーパーパワータイプ。

テラ BTE-SP テラ+ BTE-SP

指向性 Tコイル標準
ワイヤレス通信
使用電池:PR48(13)
電池寿命:60~100時間



重度難聴者向けの ウルトラパワータイプ。

テラ BTE-UP テラ+ BTE-UP

指向性 Tコイル標準
ワイヤレス通信
使用電池:PR44(675)
電池寿命:110~190時間



修理保証 2年間	テラ+(充電式)		
	補聴器(非課税)	フォナック チャージャー Ease(税込)	合計
10ch	片耳 145,000 円*2	11,000 円	156,000 円

修理保証 2年間	テラ+(電池式)		修理保証 2年間	テラ(電池式)	
	補聴器(非課税)			補聴器(非課税)	
10ch	片耳 139,000 円*2		8ch	片耳 127,000 円*2	

カラーバリエーション 標準色 (P6) 色見本はP35へ

- (H0) ベージュ
- (P1) サンドベージュ (テラ+のみ)
- (P3) サンドルウッド
- (P6) シルバーグレー
- (P8) ベルベットブラック NEW

はじめての方へ 補聴器Q&A

Q 補聴器はどのようなタイミングで使い始めたらいいのですか?

聞こえの不自由を感じたら、補聴器を試していただくことをおすすめします。年齢が若く、難聴が軽度のうちに補聴器を使い始めたほうが、高齢で難聴が進行してから始めるより、補聴器の音に慣れやすいと言われています。

Q 補聴器を使えば、すぐに聞こえるようになりますか?

補聴器は、いわゆる集音器とは異なり、一人ひとりの聴力に合わせて専門家が調整を行います。その後、初めての方の場合は、1日数時間、静かな場所で使ってみるなど、補聴器の音に少しずつ慣れていく必要があります。

Q 自分にあった補聴器はどのように選べばいいの?

補聴器は大きく分けて耳あな型と耳かけ型がありますが、最近ではそれぞれにデザインや機能などが進化し、使う人のご要望やライフスタイルに合ったものを選べるようになっています。まずは販売店にお気軽にご相談ください。



2024年5月発売(L-M/L-SP) / 2023年9月発売(L-PR/L-UP)

お子さま向けタイプ

[フォナック スカイ L] 対象年齢：0～18歳

軽中重



ことばの理解を向上させる オートセンス スカイ OS 5.0を搭載。

こども補聴器と言えば、 フォナック スカイ!



多彩な機能と安全設計がうれしい充電式モデル。

L-PR

指向性
ワイヤレス通信
使用電池:リチウムイオン(充電式)
期待動作時間:18時間*1
ロジャーダイレクト対応
フォナック クロス L対応



IP68
防塵・防水
ブルーオーシャン

「ロジャー」をプラス! ③

- 家庭や学校、屋外でも。
- お子さまの毎日をサポート。
- 幼稚園や学校に通うようになると、一日の音環境はめまぐるしく変わります。
- お子さまがことばを学んで習得する大切な時期を補聴器+ロジャーがサポートします。



詳しくはP39へ▶

標準タイプ充電器

乾燥・充電が一度にできる保管ケース。

フォナック チャージャー Combi BTE 2

11,000円(税込)
※充電式補聴器を3時間でフル充電できます。



オプション

オーダーメイド耳せんも収まる
収納スペース付き充電器。

チャージャー BTE RIC

11,000円(税込)



フォナック チャージャー Combi BTE 2用の
予備用充電パック。

パワーパック

11,550円(税込)
※充電式補聴器を4回フル充電できます。



より小型で小さな耳にフィットする
標準タイプ。

L-M

指向性 Tコイル標準
ワイヤレス通信
使用電池:PR41 (312)
電池寿命:55~80時間
ロジャーダイレクト対応



IP68
防塵・防水
プレシャスピंक

高度難聴のお子さまのための
スーパーパワータイプ。

L-SP

指向性 Tコイル標準
ワイヤレス通信
使用電池:PR48 (13)
電池寿命:65~100時間
ロジャーダイレクト対応



IP68
防塵・防水
マジェスティパープル

重度難聴のお子さまのための
ウルトラパワータイプ。

L-UP

指向性 Tコイル標準
ワイヤレス通信
使用電池:PR44 (675)
電池寿命:110~190時間
ロジャーダイレクト対応



IP68
防塵・防水
カリビアンパイレーツ

フォナックこども価格	スカイ L-PR(充電式)			スカイ L-M/SP/UP(電池式)	
	補聴器(非課税)	フォナック チャージャー Combi BTE 2(税込)	合計	補聴器(非課税)	
L90(プレミアム) 修理保証 4年間 紛失等サポート 2年間	20ch	片耳 485,000円	11,000円	496,000円	片耳 476,000円
L70(アドバンス) 修理保証 2年間 紛失等サポート 2年間	20ch	片耳 349,000円	11,000円	360,000円	片耳 340,000円
L50(スタンダード) 修理保証 2年間 紛失等サポート 1年間	16ch	片耳 240,000円	11,000円	251,000円	片耳 230,000円
L30(エッセンシャル) 修理保証 2年間 紛失等サポート 1年間	12ch	片耳 154,000円	11,000円	165,000円	片耳 145,000円

スカイ ルミティなら、うれしいことがいっぱい。

会話をラクに「スマートスピーチ テクノロジー」

ルミティシリーズの最新機能が、家庭や学校などさまざまなシーンで、ことばの理解度を向上。ことばがラクに聞けるので会話がスムーズです。



「ウインドブロック」を全クラスに搭載

風切り音を効果的に抑制。校庭や公園など、屋外でも快適な活動を楽しめます。



学びをサポートする「Bluetooth®対応」

Bluetooth®対応のスマートフォンやパソコン、GIGA端末等とつながるので、教育のための小児専用アプリやゲームも快適な聞こえで活用できます。



補聴器を探せる「マイフォナック ジュニア アプリ」

音量調節の他、補聴器の紛失時「my補聴器を探す」が使えます。機能制限ができるペアレンタルコントロール付きだから、お子さまに安心して操作をまかせられます。



安全性に配慮した強度&ロック機能

防塵・防水性能*2で毎日安心。電池の誤飲防止のため電池ホルダーやイヤフックに「チャイルドロック」*3の仕様が装備されています。



こどもの負担を軽減「ロジャーダイレクト」*4

ロジャーマイクロホンの音声を補聴器が直接受信。外部受信機が不要だから、着け心地も快適、紛失や故障のリスクも軽減できます。



キミはどの色が好き?

好きな色で
コーディネートできるから、
毎日着けるのが楽しくなります。

こどもカラー
6色

ベーシック
カラー
8色



保護者のためのガイドブック
「お子さまに難聴があると診断されたら」
監修:廣田 栄子先生(筑波大学名誉教授、医学博士)
初めてお子さまが難聴と診断された保護者の方に、難聴や親御さんができることについて、理解を深めていただきたい。そんな想いから、筑波大学名誉教授 廣田 栄子先生の監修のもと、保護者のためのガイドブックを作成しています。ぜひダウンロードして、お役立てください。

ダウンロードはこちらから

「フォナック スカイ」から「フォナック ナイダ」へお買い替えになるお客様に、特別な割引サービスをご用意しております。詳しくは販売店におたずねください。

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:完全防水とは異なります。*3:3歳までは必須。それ以降の年齢では、選択が可能です。*4:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にセットアップする必要があります。*ご購入の際は「学生証」「在学証明書」などお子さまの年齢がわかる書類を販売店にご提示ください。*L30-SP、L30-UPは障害者総合支援法対応です。L30-M、L30-PRは軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度対応です。●各モデルの機能はP53~54の機能一覧をご覧ください。

補聴器 カラーバリエーション

ご購入後、保証期間中の補聴器のカラー変更に伴うケース交換は、60日間は無償で対応、それ以降は4年間は10,000円(非課税)、5年目以降は15,000円(非課税)となります。

耳かけ型

フォナック スカイ LのカラーバリエーションはP34をご覧ください。

インフィニオ/ルミティ シリーズ



テラ シリーズ



*1:インフィニオ シリーズはお選びいただけません。*2:フォナック オーデオ L-R/L-312、フォナック クロス L-Rはお選びいただけません。*3:テラ+のみとなります。

耳あな型

シェル(外耳道内に挿入部分)



フェースプレート(外側部分)



パートI-チタン/P-チタン限定色



*4:ブルーは左耳のみ、レッドは右耳のみとなります。*5:パート I-R/パート P-312限定色。*6:パート I-R/パート P-312/P-312 NW O限定色。*7:パート I-10 NW O/P-10 NW O限定色。*8:パート I-R/パート I-10 NW OおよびP-10 NW O(ミニコントロール対応製品のみ。その場合、プログラムスイッチは付きません)/P-312限定色。

*印刷の都合上、実物の色味とは異なって見える場合があります。

ロジャー カラーバリエーション

インフィニオ/ルミティ/パラダイス シリーズは外部受信機を取り付けることなく、ロジャーを使用できます。

ロジャー フォーカス II / II-312

※ロジャー フォーカス II-312のカラーはP6、P8のみとなります。※写真はロジャー フォーカス IIです。



一体型受信機

ロジャー 20

・Nucleus® 7 サウンドプロセッサ
・Nucleus® 8 サウンドプロセッサ



ロジャー 21

・SONNET/SONNET 2/SONNET EAS
/SONNET 2 EAS オーディオプロセッサ



オーディオシュー 5,000円(非課税)

AS18

・フォナック ナイター B-SP
・フォナック スカイ B-P/SP/RIC
・フォナック ボレロ B-P/SP
・フォナック オーデオ B-13



AS19

・フォナック ナイター B-UP
・フォナック スカイ B-UP



※印刷の都合上、実物の色味とは異なって見える場合があります。



耳あな型・耳かけ型補聴器 充電器一覧

製品名	フォナック チャージャー パート I	フォナック チャージャー Go スフィア	フォナック チャージャー Go I	フォナック チャージャー RIC I	チャージャー BTE RIC	フォナック チャージャー Combi BTE 2	フォナック チャージャー Ease
製品コード	075-0075-10	075-0057-10	075-0055-10	075-0054-10	075-3016-10	075-0065-10	075-0080-10
充電器							
価格(税込)	11,000円	33,000円	33,000円	11,000円	11,000円	11,000円	11,000円
サイズ(幅×奥行×高さ)	99 × 59 × 49 mm	79 × 40 × 55 mm	79 × 40 × 55 mm	79 × 40 × 55 mm	61 × 95 × 73 mm	101 × 76 × 49 mm	69 × 40 × 56 mm
USB種類	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-B	USB Type-C
補聴器の充電時間	フル充電：約 3 時間	フル充電：約 3.5 時間	フル充電：約 3 時間	フル充電：約 3 時間	フル充電：約 3 時間	フル充電：約 3 時間	フル充電：約 3 時間
動作時環境温度	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃	5℃～40℃
充電の仕組み	接触充電 (マグネット式)				接触充電 (補聴器を手前に引っ張ってから取り出すリーンプック式)		接触充電 (マグネット式)
特徴	I-R用	I-スフィア用	I-R用	I-R用	標準・パワータイプ用	標準・パワータイプ用	ルミティ/テラ+用
	<ul style="list-style-type: none"> ●補聴器を充電器に入れるだけで、磁石で充電ポストに固定され簡単かつ安全に充電できる「スナップチャージ」システム。 ●光るLEDランプで充電状況を確認でき安心。 ●持ち運びに便利なコンパクトデザイン。 	<ul style="list-style-type: none"> ●リチウムイオン電池内蔵で、両耳2回分の充電が可能。 ●外出が多い方・移動時に充電して補聴器の装用時間を延ばしたい方などにオススメ。 ●持ち運びに便利なコンパクトデザイン。 	<ul style="list-style-type: none"> ●リチウムイオン電池内蔵で、両耳3回分の充電が可能。 ●外出が多い方・移動時に充電して補聴器の装用時間を延ばしたい方などにオススメ。 ●手に収まるコンパクトサイズデザイン。 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電・保管ができる便利な充電器。 ●手に収まるコンパクトサイズデザイン。 ●左右マークを手前に表示した直感的に使いやすい設計。 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。 ●初回購入時、ドライカプセル付き。 ●耳せん収納部が深いので大きいイヤーマールド・長いチューブを使用する方に便利。 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。 ●初回購入時、ドライカプセル付き。 ●パワーパック(別売)を使えばモバイルバッテリーのように使えて便利。両耳4回分の充電が可能。 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電・保管ができる便利な充電器。 ●持ち運びに便利なコンパクトサイズデザイン。
互換性	パート I-R	○	—	—	—	—	—
	オーディオ I-スフィア	—	○	—	—	—	—
	オーディオ I-R	—	—	○	○	—	—
	オーディオ L-R	—	—	—	—	—	○
	ナイーダ L-PR	—	—	—	—	○	—
	スカイ L-PR	—	—	—	—	○	—
	テラ+ RIC-R	—	—	—	—	—	○
	フォナック クロス I-R	—	—	○	○	—	—
	フォナック クロス L-R	—	—	—	—	—	○
ロジャー フォーカス II	—	—	—	—	○	○	

●単品で別途ご購入の場合、ACアダプターは1,760円(税込)、充電用USBケーブル(USB-micro USB Type-B)は2,310円(税込)、充電用USBケーブル(USB-A to USB-C)は1,386円(税込)になります。



デジタルワイヤレス
補聴援助システム

roger [ロジャー]

“補聴器+ロジャー”で、より良い聞こえに！

ロジャーの効果と必要性

補聴器だけでは音声を拾いづらいシーンをサポート。



補聴器は、聞き手と話者が1.5m以内に1対1でいる場合、かつ騒音がある一定レベル以下であれば、有効に機能します。しかし、騒音が多い環境や話者と聞き手の距離が離れているとき、また複数の話者がいる場合などでは、補聴器だけでは会話が聞き取りづらいたることがあります。そんなとき、補聴器の限界をサポートし、普段の会話をもっと楽しく、スムーズにしてくれるのがフォナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」です。

ロジャーの仕組み

ワイヤレスマイクで音声を補聴器に届ける。



ロジャーは、①送信機(ワイヤレスマイク)で集音し、②補聴器や受信機に音声を届け、騒音下や離れた場所でのことばの聞き取りを改善します。補聴器や人工内耳だけではことばの聞き取りが難しい環境でも、よりクリアな聞こえが可能になります。

ロジャーダイレクト*

外部受信機が不要だから着け心地も快適。

ロジャーは、ほぼすべての補聴器メーカーの補聴器/人工内耳に対応していますが、フォナックの補聴器との組み合わせなら、外部受信機なしで直接受信できる「ロジャーダイレクト」を使えます。外部受信機が不要だから、着け心地も快適です。

●フォナック ナイダーの従来モデルとフォナック ナイダー ルミティの比較



マイロジャーマイク アプリ

スマートフォンで簡単コントロール。

マイロジャーマイク アプリをお手持ちのスマートフォンにインストールすれば、ロジャー オン 3の遠隔コントロールが可能。マイクモードの切り替えや集音方向の変更、ミュート/ミュート解除などを行えます。



*:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にセットアップする必要があります。

ロジャー アンリミテッド

ロジャーダイレクト機能付補聴器に受信機機能を無制限にセットアップ。




第3世代のロジャーに新たに導入された「ロジャー アンリミテッド」。これはロジャーダイレクトの機能を持つフォナック補聴器に受信機の機能を簡単かつ無制限にセットアップできる画期的な機能です。従来の製品ではセットアップできる受信機の数や機能に制限があり、またそのために別のハードウェアが必要でした。「ロジャー アンリミテッド」はこうした障壁をすべて取り払い、ロジャーと補聴器のシームレスなつながりを可能にしました。

多彩なマイクモード(ロジャー オン 3)

ワイドインタビューモード*

より広い範囲を3次元的に集音。パネルディスカッションなどで、テーブルの上にロジャーを置いておけば、複数の人の会話を届けてくれます。

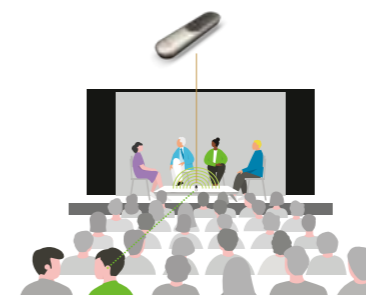

インタビューモード2.0

カフェなど騒がしい場所では話し手にマイクを向けると3つのマイクを使って集音。鋭い指向性を発揮し、より明瞭な音声を耳元へ届けます。



プレゼンターモード

会議や講義では、発表者はロジャーをクリップやネックストラップで装着。離れたところに座っている参加者に声を届けられます。



ヘッドセットモード

PCに接続するとオンライン会議でヘッドセットのように使用できます。PCの音声をストリーミングで耳元に届けてくれるので快適です。



卓上モード

テーブルの上に置くとマイクロホンの指向性が自動的に切り替わり、話している人の声を集音します。



外部入力モード

ドッキングステーションでテレビに接続。音声を耳元に届け、離れた位置でも音量を上げずに楽しむことができます。



*:ワイドインタビューモードを使用するにはマイロジャーマイク アプリでの操作が必要です。

送信機

教育現場におすすめのワイヤレスマイク。
タッチスクリーン式で操作性も抜群。

ロジャー タッチスクリーン マイク 3*1
209,000円(税込)/190,000円(税抜)



- ※「ロジャー アンリミテッド」を搭載。
- ※使いやすいメニューレイアウト。
- ※ミュート時のインジケータライトのカスタマイズが可能。
- ※2時間充電で約10時間使用できます。
- ※使用可能距離:最大約25m*2
- ※幅55mm×奥行104mm×高さ16mm 重さ94g



複数の話し手がいるパネルディスカッションなどで便利な
ワイドインタビューモードを新搭載。

ロジャー オン 3*1 **DOLBY AUDIO***3
209,000円(税込)/190,000円(税抜)



- ※「ロジャー アンリミテッド」を搭載。
- ※より広い範囲を3次元的に集音するワイドインタビューモードをはじめ、卓上モード、プレゼンターモード、インタビューモードと多彩なマイクモードで環境や使用状況に適合。
- ※ロジャー オン 3をミュートにすると補聴器も通常の補聴器機能に切り替わるスマートミュートを搭載。
- ※傷に強いディスプレイ。
- ※防塵・防水の国際保護等級「IP54」取得。
- ※ドルビーオーディオ対応のドッキングステーションが付属。充電しながらテレビや音楽鑑賞が可能です。
- ※ヘッドセットモードでオンライン通話も快適に参加できます。
- ※話し手の方向がわかるマルチビームテクノロジー 2.0**を搭載。
- ※スマートフォンでの調節ができるマイロジャーマイク アプリに対応。
- ※3時間充電で約8時間*5使用できます。
- ※使用可能距離:最大約25m*6
- ※幅24mm×長さ100mm×高さ14mm 重さ27g

ロジャー製品のカタログのご用意がございます。詳しくは販売店へお尋ねください。

小型で持ちやすい、ロジャー タッチスクリーン マイク3/
ロジャー タッチスクリーン マイク用 子機ハンドマイク。

ロジャー パスアラウンド マイク*1
85,800円(税込)/78,000円(税抜)



- ※2時間充電で約10時間使用できます。
- ※使用可能距離:最大約20m
- ※直径34mm×高さ161mm 重さ84g
- ※ロジャー パスアラウンド マイク単体では送信機として使用できません。必ずロジャー タッチスクリーン マイク 3またはロジャー タッチスクリーン マイクが必要になります。

職場やプライベートでおすすめの小型マイク。
聞きたい方向からの声を自分で選べるセレクト機能付き。


ロジャー セレクト 3*1 **DOLBY AUDIO***3
209,000円(税込)/190,000円(税抜)



- ※「ロジャー アンリミテッド」を搭載。
- ※Bluetooth®機能搭載*7。ドッキングステーションを介してドルビーオーディオ搭載のテレビ音声も楽しめます*3。
- ※2時間充電で約8時間使用できます。(Bluetooth®利用時は約4時間)
- ※使用可能距離:最大約25m*8
- ※直径55mm×高さ12mm 重さ28g

持ち運び自在で小~大会議室まで対応可能の
会議専用 卓上置き型マイク。

ロジャー テーブルマイク 3*1
209,000円(税込)/190,000円(税抜)

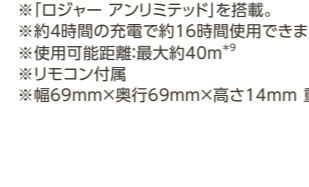

- ※「ロジャー アンリミテッド」を搭載。
- ※約4時間の充電で約16時間使用できます。
- ※使用可能距離:最大約40m*9
- ※リモコン付属
- ※幅69mm×奥行69mm×高さ14mm 重さ103g

*1:ロジャーの受信機、ワイヤレスマイクの一部製品は補聴器対象となり、基準を満たされた場合、非課税となります。*2:ロジャーダイレクト機能を使用した補聴器の場合最大約120m。*3:ドルビーオーディオはロジャー オン 3/ロジャー セレクト 3のドッキングステーション利用時のみとなります。*4:ロジャー オン 3と接続したロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装着し、さらにマイロジャーマイク アプリでステレオモードを起動させた場合のみ利用可能です。*5:ロジャーダイレクト対応補聴器の場合、従来の外部受信機の場合は約6時間。*6:ロジャーダイレクト対応補聴器を使用した場合のみ、マイロジャーマイク アプリで使用可能距離を最大約50mに拡張可能。使用可能距離を拡張した場合の使用可能時間は約6時間。*7:ロジャーダイレクト受信機を使用する場合は本製品のBluetooth®機能を無効にしてください。Bluetooth®機能が有効になっていると、補聴器からピープ音が鳴り続けます。*8:ロジャーダイレクト機能を使用した補聴器の場合最大約50m。*9:ロジャーダイレクト機能を使用した補聴器の場合最大約80m。
※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。 ※Dolby, Dolby Audio, ドルビー及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

受信機

他メーカーの耳かけ型補聴器や人工内耳にも
使用できるユニバーサル(3ピン)タイプ。

ロジャー エックス*1
44,000円(税込)/40,000円(税抜)

- ※電源は補聴器から供給されるので、補聴器の電池寿命は短くなります。
- ※耳かけ型補聴器には補聴器メーカーで販売しているオーディオシューズが別途必要です(P36をご覧ください)。
- ※ロジャーダイレクトを利用できるフォナック補聴器に受信機機能をセットアップすることができます。



補聴器・人工内耳不要の
レシーバ内蔵受信機。充電式。

ロジャー フォーカス II
87,780円(税込)

- 使用電池:リチウムイオン(充電式)
- 防塵・防水の国際保護等級「IP68」取得。
- ※リモコンで音量調節が可能。
- 別売のリモコン「フォナック リモートコントロール」で音量調節が可能。音量ボタンをロックすることもできます。
- ※3時間充電で約20時間使用できます。
- ※カラーバリエーションについてはP36をご覧ください。
- ※ロジャー フォーカス IIには別途充電器が必要です。



ロジャー フォーカス II用の充電器は
下記のいずれかをお選びいただけます。

フォナック チャージャー
Combi BTE 2
11,000円(税込)



チャージャー BTE RIC
11,000円(税込)



製品名	価格	
ロジャー フォーカス II	87,780円(税込)	
チャージャー BTE RIC	11,000円(税込)	—
フォナック チャージャー Combi BTE 2	—	11,000円(税込)
合計	98,780円(税込)	

電池式のレシーバ内蔵受信機。

ロジャー フォーカス II-312
64,680円(税込)

- 使用電池:PR41 (312)
- 防塵・防水の国際保護等級「IP68」取得。
- ※リモコンで音量調節が可能。
- ※最大約52時間まで連続使用できます。



コクレア社 人工内耳プロセッサ
Nucleus® 7(CP1000)/8(CP1110)
サウンドプロセッサ専用 デザイナー体型受信機。

ロジャー 20
46,200円(税込)/42,000円(税抜)

- ※カラーバリエーションについてはP36をご覧ください。



モデル社 人工内耳プロセッサ
SONNET/SONNET 2/SONNET EAS/SONNET 2 EAS
オーディオプロセッサ専用 デザイナー体型受信機。

ロジャー 21
46,200円(税込)/42,000円(税抜)

- 防塵・防水の国際保護等級「IP54」取得。
- ※カラーバリエーションについてはP36をご覧ください。



耳あな型やTコイル内蔵の補聴器、人工内耳に対応。
デジタル出力やネックループの取り外しも可能。

ロジャー ネックループ*1
44,000円(税込)/40,000円(税抜)

- ※取り外し可能なネックループ。
- ※ネックループが取り外しできる使いやすい設計。またUSB充電が可能で、充電状況もわかりやすく表示されます。
- ※3時間充電で約10時間使用できます。



デジタル出力で利便性がアップ
新たにデジタル出力の採用により、パソコン等とUSBケーブルで接続して音声文字化アプリや音声録音の利用が可能です。

●電池寿命は使用状況により異なります。●ロジャーは、マイクロホンと受信機をセットでご利用ください。●防塵・防水性能は、完全防水とは異なります。●詳しくは「ロジャーカタログ」または当社ホームページをご覧ください。www.phonak.com/ja-jp

部屋の出入口などに設置し、
受信機を自動的にその部屋のワイヤレスマイクに接続。

ロジャー ウォールパイロット
46,200円(税込)*

※ACアダプター付属。
※幅80mm×奥行39mm×高さ95mm
重さ164g ACアダプターコード長約130cm
*設置費用は製品価格には含まれません。



最大4台の送信機を
同時に充電できるラック。

ロジャー チャージング ラック
13,860円(税込)

※ACアダプター付属。
※ロジャー タッチスクリーン マイク 3、
ロジャー タッチスクリーン マイク、
ロジャー パスアラウンド マイク、
ロジャー リピーター、ロジャー マルチメディア ハブ
のみにご使用いただけます。
※幅75mm×奥行188mm×高さ28mm
重さ250g ACアダプターコード長約120cm



話者の使うマイクの音と同時に
音響機器からの音も流せる送信機。

ロジャー マルチメディア ハブ
90,090円(税込)

※2時間充電で約10時間使用できます。
※幅55mm×奥行104mm×高さ16mm
重さ120g
ACアダプターコード長約130cm



送信機と受信機の
接続距離を延長できる中継機。

ロジャー リピーター
90,090円(税込)

※約2時間の充電で約10時間使用できます。
※互換性のあるロジャー送信機からロジャー
リピーター、またはロジャー リピーターから
次のロジャー リピーターまでの使用可能
距離:最大約40m
ロジャー リピーターから受信機までの
使用可能距離:最大約20m
※幅55mm×奥行16mm×高さ104mm
重さ120g ACアダプターコード長約130cm



フォナックDSFシステム

フォナックDSFシステムは、「ワイヤレスマイク」と「スピーカー」のシンプルなシステムです。
線音源スピーカーにより反響音を抑え話者の声を聞き取りやすくします。

ロジャー デジマスター5000 V2
190,575円(税込)* /1台

有効室内面積:約100㎡



●壁付け時

ロジャー デジマスター7000 V2
241,395円(税込)* /1台

有効室内面積:スピーカー2台使用時:約300㎡
スピーカー1台使用時:約150㎡



●スタンド利用時

- ロジャー デジマスターは、教室やセミナールームに
便利な線音源スピーカー。新機能を加えて、
さらに使いやすくなりました。
- Bluetooth®接続で、スマートフォン、タブレット、PCなどに簡単に接続。
- より豊かな音質のために、マルチメディア用の低音を追加。

*:ロジャー デジマスターの壁付けの設置費用、また電源工事にかかる費用は製品価格に含まれておりません。
※ワイヤレスマイクは、「ロジャー タッチスクリーン マイク 3」または「ロジャー タッチスクリーン マイク」を使用します。
※スタンドは標準で付属されています。

〈有償オプション〉
高さ調整可能三脚
9,240円(税込)



〈有償オプション〉
壁掛けキット セット
1,155円(税込)*

※1セットはロジャー デジマスター
本体と同梱されています。



〈有償オプション〉
デスク スタンド
9,240円(税込)

※高さ280mm 重さ0.6kg



職場やプライベート、さまざまなシーンで大活躍。
ロジャーの活用例をご紹介します。



会社で打ち合わせ



複数人での会話は補聴器や人工内耳だけでは聞き取りづらい場合があります。ロジャーは話している人の声を識別して補聴器や人工内耳に送り、聞き取りをサポートしてくれます。

セミナーやカルチャー教室



広い会場のセミナーやカルチャー教室では講師の声が聞き取りにくいときがあります。そんなとき講師にロジャーをつけてもらえば、講師の声を拾って耳元に届けられます。

病院や薬局の窓口で



マスクやパーティション越しに会話するときは、ロジャーを相手に向ければ声が聞き取りやすくなり、コミュニケーションもスムーズに行えます。

家族みんなで夕食



レストランやフードコートなど騒がしい場所ではロジャーをテーブルの中央に置くだけでOK。マイクロホンの指向性を切り替えて話している人の声を拾ってくれます。

ロジャー体験談

Kaito様(60代/会社員/重度難聴)

大人数の会議で、ステージに立った話者と距離があると説明がほとんど聞こえず、スクリーンの説明文で理解するしかありませんでした。しかし、ロジャーを使うと、会議などで距離が大きく離れていても、**耳元で喋っているように**感じます。複数人いる時や周囲がうるさい状況でも、ロジャーを渡して話してもらうと良く聞き取れます。

会社員で会議やセミナーがある方や、手話等を学ぶための講義に参加する方などにおすすめです。大人数が集まり周りがうるさく会話をする人が決まっている状態では、ロジャーの効果が絶大です。

シブヤ様(50代/会社員/重度難聴)

離れて**散らばった一人ひとりの声が補聴器へ鮮明に大きく届く**ことは素晴らしいです。私はロジャー マイクを3つ購入し、さらに2つを会社の福利厚生で入手したので、合計5個のロジャー マイクを情報保障として活用しています。重度難聴のため私の聞き取りは100%になりませんが、ロジャーは**音声文字認識アプリとの相性も良い**ので、目からも情報を補うことができている。



ロジャーユーザーの声は
きこえのブログでもご紹介!



ワイヤレスアクセサリ

テレビや携帯電話などと補聴器をワイヤレスでつなぐ機器。好みの音量を手元でかんたんに操作できたり、補聴器の使い勝手をもっと快適にします。使いたいシーンに合わせて、好きな機器が選べます。

- 電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。
- 一部ご利用いただけない器種もございますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。

インフィニオ/ルミティ/パラダイス/テラ シリーズ用

ドルビーデジタル 5.1にも対応。
簡単操作でテレビの音声を直接耳に届けます。

テレビコネクターD
23,100円(税込)



最大25m離れた場所でも使える
一対一の会話に便利な小型マイク。

フォナック パートナーマイク
55,440円(税込)



- ※2時間充電で約6時間使用できます。
- ※幅30×奥行16×高さ55mm
- ※重さ18.2g

音量の調節とプログラムの切替が
大きめのボタンで操作できます。

フォナック リモートコントロール
20,790円(税込)



- ※重さ26.4g
- ※電池式コイン形リチウム電池CR2032(平均電池寿命12ヶ月)
- ※一部の補聴器と互換性がない場合があります。
- ※互換性については、お買い求めの販売店へご確認ください。



CROS補聴システム [フォナック クロス]

フォナック補聴器と一緒に使用するCROS補聴システムは、一側性難聴の方の聞こえをサポート。聞こえない耳側に装着した「フォナック クロス(送信機)」が周囲の音をキャッチし、聞こえる耳側の補聴器まで届けます。

- 電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。



インフィニオ シリーズ用

オーディオ I-R用のCROS送信機。充電式。

フォナック クロス I-R*1
169,400円(税込)
使用電池:リチウムイオン(充電式)
期待動作時間:約16時間*2



対応補聴器:フォナック オーデオ I-R

※フォナック クロス I-Rには別途充電器が必要です。

【充電器】

磁気で補聴器を保持。使いやすいマグネット式。

フォナック チャージャー RIC I
11,000円(税込)

※フォナック クロス I-Rを3時間でフル充電できます。

【蓄電可能充電器】

蓄電でき、しかもコンパクトサイズ。
外出先で充電することができて便利。

フォナック チャージャーGo I
33,000円(税込)

※フォナック クロス I-Rを3時間でフル充電できます。



ルミティ シリーズ用

オーディオ L-R、ナイーダ L-PR、スカイ L-PR用の
CROS送信機。充電式。

フォナック クロス L-R*3
138,600円(税込)
使用電池:リチウムイオン(充電式)
期待動作時間:約12.5時間*2



対応補聴器:フォナック オーデオ L-R、フォナック ナイーダ L-PR、フォナック スカイ L-PR

※フォナック クロス L-Rには別途充電器が必要です。

【充電器】

コンパクト設計。磁気で補聴器を
保持してくれるので、使いやすさもアップ。

フォナック チャージャー Ease
11,000円(税込)

※フォナック クロス L-Rを3時間でフル充電できます。



- *1:クロス チューブはサイズが選べます(単品価格 1,210円(税込))。また、オプションでクロスチップも対応できます(9,900円(税込))。*2:フル充電時。使用状況によって異なります。*3:クロス チューブはサイズが選べます(単品価格 1,155円(税込))。また、オプションでクロスチップも対応できます(9,823円(税込))。
- ※カラーバリエーションについてはP35をご覧ください。

多彩なアプリで、ますます便利!

アプリをダウンロードすれば、スマートフォンを補聴器のリモコンとして使えるなど、補聴器ライフがますます快適で便利になります。

マイフォナック アプリ

各種のリモコン機能に加え、補聴器の音を自分好みにカスタマイズできます。

- 「my補聴器を探す」が利用可能*
- ヘルス機能(インフィニオ/ルミティ/パラダイス シリーズ充電式のみ)
- 音量調節やプログラム変更
- カスタマイズしたプログラムを保存
- 電池の充電状態や装着時間の確認
- タップコントロール設定
- 補聴器専門家の調整を遠隔で受けられるリモートサポート
- インターネット接続がない状態(オフライン)でもアプリとのペアリングが可能 など

対応する機器:オーディオ インフィニオ/パート I-R/ナイーダ ルミティ/オーディオ ルミティ/パート パラダイス(312のみ)/クロス インフィニオ/クロス ルミティ/テラ+

*:インフィニオ、ルミティ、テラ+ シリーズの耳かけ型のみ。ファームウェアが最新版にアップデートされていればマイフォナック 7.1以降で利用可能。

●機器の互換性:Bluetooth 4.2および Android OS 8.0以降をサポートする Google Mobile Services(GMS) 認証のAndroid™端末ならびに iOS®バージョン15.0以降のiPhone、iPad、および iPod touchに対応しています。ご使用のスマートフォンとの互換性をチェックしたい場合は、互換性チェッカー: <https://www.phonak.com/en-int/support/compatibility> をご参照ください。

マイフォナック ジュニア アプリ

使いやすいデザインの、小児専用アプリです。

- 「my補聴器を探す」が利用可能
- 左右別の音量調整が利用可能
- 環境バランスが利用可能(補聴器からの聞こえvsストリーミングの聞こえ)
- カスタマイズしたプログラムを保存(アプリ内で好みの聞こえが作成可能)
- 保護者による機能制限ができるペアレンタルコントロール
- 電池の充電状態や装着時間の確認 など

対応する機器:オーディオ インフィニオ/パート I-R/ナイーダ ルミティ/スカイ ルミティ/オーディオ ルミティ/クロス ルミティ

●機器の互換性:Bluetooth LEを搭載したiOS®バージョン15.0以降のスマートフォンならびに Bluetooth 4.2および Android OS 8.0以降をサポートするGoogle Mobile Services(GMS) 認証のAndroid™端末で使用できます。

マイロジャーマイク アプリ

ロジャー オン 3を遠隔コントロール可能。

- ステレオモードのオン/オフ
- 範囲拡張機能のオン/オフ
- マイクモードの切り替え
- 集音方向の変更
- ミュート/ミュート解除
- バッテリー状態の確認
- カスタム設定の登録 など

対応するロジャー機器:ロジャー オン 3

●機器の互換性:Bluetooth LEを搭載したiOS®バージョン14.0以降のスマートフォンならびに Bluetooth 4.2および Android OS 8.0以降をサポートするGoogle Mobile Services(GMS) 認証の Android™端末で使用できます。

iOSはCisco Technology, Inc.の商標です。Android™(アンドロイド)は Google LLCの商標です。Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。iPhone, iPad, iPod touchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。



補聴器お手入れグッズ

●価格は税込です。

写真	製品名	製品コード	価格
クリーニング&ケア			
	乾燥ケース	098-0213	924円
	詰め替え用シリカゲル	098-0214	176円
	パーフェクトドライ ラックス PerfectDry Lux	098-0581-00010	9,900円
	ドライキット (ドライカップ1個、ドライカプセル4個)	098-0577-00000G3	1,000円
	ドライカプセル (4個入)	098-0576-00000G3	900円
	イヤモールド洗淨カップ	098-0566-00000G3	900円
	イヤモールド洗淨剤 (20個入)	098-0565-00000G3	900円
	エアブローワー	098-0578	900円

写真	製品名	製品コード	価格
耳垢防止フィルター			
	セルストップ (8本入)	098-0282	924円
	マイクガード (8本入)	054-0082-13	1,155円
	耳垢ガード HF3(赤) (16個入)	098-0292	1,848円
	耳垢ガード HF3(青) (16個入)	098-0293	1,848円

写真	製品名	製品コード	価格
脱落防止			
	フォナフィックス (対応機種: ナイター SP/UP、スカイ SP/UP、ポレロ SP)	095-0099	1,155円
	紛失防止用クリップ (成人用)	054-0582	1,386円
	紛失防止用クリップ (乳幼児用)	054-1252	1,000円
	ペディアトリック ケアキット	098-0592-00000G3	7,000円
	バッテリーテスター	098-0590	1,500円

写真	製品名	製品コード	価格
販売店向け商品*			
	印象材 (Egger A/I) 26シヨア 660g×2	095-0175	8,261円
	印象材 (Otoform Ak) 35シヨア 400g×2	095-0005	4,972円
	イージービュー オトブロック (20個入り)	S: 054-0769 M: 054-0768 L: 054-0767	各3,938円
	綿球M (50個入り)	021-0656	2,541円
	シリンジ	3mm: 021-0799 4mm: 021-0285 5mm: 021-0655-1	各4,048円
	オトスコープLED	054-0848	13,860円
	イヤライト	095-0304	10,978円

*:販売店用価格となります。



アクセサリパーツ

[アクセサリパーツ インフィニオ シリーズ]

●価格は税込です(スリムチップは非課税)。

写真	製品名	製品コード	価格
レシーバ 6.0 S(左)			
	レシーバ 6.0 S 00-L	054-1190	12,100円
	レシーバ 6.0 S 0-L	054-1192	
	レシーバ 6.0 S 1-L	054-1194	
	レシーバ 6.0 S 2-L	054-1196	
	レシーバ 6.0 S 3-L	054-1198	
レシーバ 6.0 M(左)			
	レシーバ 6.0 M 00-L	054-1081	12,100円
	レシーバ 6.0 M 0-L	054-1083	
	レシーバ 6.0 M 1-L	054-1085	
	レシーバ 6.0 M 2-L	054-1087	
	レシーバ 6.0 M 3-L	054-1090	
レシーバ 6.0 P(左)			
	レシーバ 6.0 P 00-L	054-1092	12,100円
	レシーバ 6.0 P 0-L	054-1094	
	レシーバ 6.0 P 1-L	054-1096	
	レシーバ 6.0 P 2-L	054-1098	
	レシーバ 6.0 P 3-L	054-1101	
キャップ型耳せん: タイプ			
	キャップ型	054-0788	220円
オープン型耳せん: タイプ			
	オープン型S	054-0785	220円
	オープン型M	054-0786	
	オープン型L	054-0787	
ベント付き耳せん: タイプ			
	ベント付きS	054-0809	220円
	ベント付きM	054-0810	
	ベント付きL	054-0811	
パワー型耳せん: タイプ			
	パワー型S	054-0820	220円
	パワー型M	054-0821	
	パワー型L	054-0822	
ストッパー			
	S用	004-8596-001	116円
	M用	004-8597-001	
	P用	004-8623-001	

写真	製品名	製品コード	価格
レシーバ 6.0 S(右)			
	レシーバ 6.0 S 00-R	054-1191	12,100円
	レシーバ 6.0 S 0-R	054-1193	
	レシーバ 6.0 S 1-R	054-1195	
	レシーバ 6.0 S 2-R	054-1197	
	レシーバ 6.0 S 3-R	054-1199	
レシーバ 6.0 M(右)			
	レシーバ 6.0 M 00-R	054-1082	12,100円
	レシーバ 6.0 M 0-R	054-1084	
	レシーバ 6.0 M 1-R	054-1086	
	レシーバ 6.0 M 2-R	054-1088	
	レシーバ 6.0 M 3-R	054-1091	
レシーバ 6.0 P(右)			
	レシーバ 6.0 P 00-R	054-1093	12,100円
	レシーバ 6.0 P 0-R	054-1095	
	レシーバ 6.0 P 1-R	054-1097	
	レシーバ 6.0 P 2-R	054-1099	
	レシーバ 6.0 P 3-R	054-1102	
イージーガード耳せん (オープン型、ベント付き、パワー型)			
	オープン型S	054-1258	495円
	オープン型M	054-1259	
	オープン型L	054-1260	
	ベント付きS	054-1255	495円
	ベント付きM	054-1256	
	ベント付きL	054-1257	
	パワー型S	054-1261	495円
	パワー型S/M	054-1262	
	パワー型M	054-1263	
	パワー型M/L	054-1264	
	パワー型L	054-1265	
耳垢防止フィルターと耳せんの一体型タイプ。耳垢防止フィルターの交換が不要なのでセルストップを使う必要がありません。			
オーダーメイド			
	スリムチップ 6.0 アクリル	062-0063-01	9,000円 (非課税)
	スリムチップ 6.0 シリコン	062-0064-01	7,900円 (非課税)
	SPシェル 6.0 アクリル付レシーバ	062-0056-01	24,530円*
	SPシェル 6.0 チタン付レシーバ	062-0057-01	28,820円*

*:SPシェル6.0付レシーバ各種は補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは11,300円(非課税)、チタンシェルは15,200円(非課税)となります。補聴器と別購入の場合、アクリルシェルは24,530円(税込)、チタンシェルは28,820円(税込)となります。









標準タイプ	RICタイプ	〈耳せん〉		
 <p>スリムチューブ 4.0</p>	 <p>レシーバ</p>	<p>■ドーム</p> <p>スリムチューブ 4.0</p>  <p>オープン型耳せん</p>	<p>■スリムチップ</p> <p>スリムチューブ 4.0</p>  <p>スリムチップ</p>	<p>■イヤモールド</p> 

写真	製品名	製品コード	価格
----	-----	-------	----

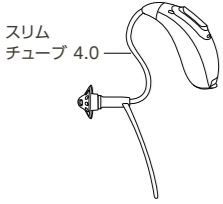イヤフック(カラーフックあり)			
	HE 11 680	042-0098	924円

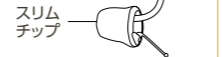
イヤフック(カラーフックなし)			
	HE 11	004-1667-131	462円


ミニフック(カラーフックなし)			
	HE 11 ミニ タンパーブルーフ	004-1668-131	462円


ミニフック(カラーフックあり)			
	HE 11 680 ミニ タンパーブルーフ	042-0121	924円

*フックのカラーバリエーションについてはP34をご覧ください。

スリムチューブ 4.0(左)			
	00-L	054-0884	583円
	0-L	054-0794	
	1-L	054-0796	
	2-L	054-0799	
	3-L	054-0824	

レシーバ 5.0 S(左)			
	レシーバ 5.0 S 0-L	054-1202	11,550円
	レシーバ 5.0 S 1-L	054-1204	
	レシーバ 5.0 S 2-L	054-1206	
	レシーバ 5.0 S 3-L	054-1208	

レシーバ 5.0 M(左)			
	レシーバ 5.0 M 0-L	054-1210	11,550円
	レシーバ 5.0 M 1-L	054-1212	
	レシーバ 5.0 M 2-L	054-1214	
	レシーバ 5.0 M 3-L	054-1216	


レシーバ 5.0 P(左)			
	レシーバ 5.0 P 0-L	054-1218	11,550円
	レシーバ 5.0 P 1-L	054-1220	
	レシーバ 5.0 P 2-L	054-1222	
	レシーバ 5.0 P 3-L	054-1224	


キャップ型耳せん: タイプ			
	キャップ型	054-0788	220円


オープン型耳せん: タイプ			
	オープン型S	054-0785	220円
	オープン型M	054-0786	
	オープン型L	054-0787	


ベント付き耳せん: タイプ			
	ベント付きS	054-0809	220円
	ベント付きM	054-0810	
	ベント付きL	054-0811	


写真	製品名	製品コード	価格
----	-----	-------	----


パワー型耳せん: タイプ			
	パワー型S	054-0820	220円
	パワー型M	054-0821	
	パワー型L	054-0822	

ストッパー			
	S用	004-8596-001	116円
	M用	004-8597-001	
	P用	004-8623-001	

スリムチューブ 4.0(右)			
	00-R	054-0885	583円
	0-R	054-0795	
	1-R	054-0798	
	2-R	054-0823	
	3-R	054-0825	

レシーバ 5.0 S(右)			
	レシーバ 5.0 S 0-R	054-1203	11,550円
	レシーバ 5.0 S 1-R	054-1205	
	レシーバ 5.0 S 2-R	054-1207	
	レシーバ 5.0 S 3-R	054-1209	

レシーバ 5.0 M(右)			
	レシーバ 5.0 M 0-R	054-1211	11,550円
	レシーバ 5.0 M 1-R	054-1213	
	レシーバ 5.0 M 2-R	054-1215	
	レシーバ 5.0 M 3-R	054-1217	

レシーバ 5.0 P(右)			
	レシーバ 5.0 P 0-R	054-1219	11,550円
	レシーバ 5.0 P 1-R	054-1221	
	レシーバ 5.0 P 2-R	054-1223	
	レシーバ 5.0 P 3-R	054-1225	

オーダーメイド			
	スリムチップ 4.0 アクリル	062-0006-01	8,925円(非課税)
	スリムチップ 4.0 シリコン	062-0007-01	7,875円(非課税)
	SPシェル 4.0 アクリル付レシーバ	062-0008-01	23,100円*
	SPシェル 4.0 チタン付レシーバ	062-0009-01	27,148円*

オーダーメイド			
	イヤモールド	062-0001-01	オープン価格(非課税)

*:SPシェル4.0付レシーバ各種は補聴器と同時購入の場合、アクリルシェルは10,500円(非課税)、チタンシェルは14,175円(非課税)となります。補聴器と別購入の場合、アクリルシェルは23,100円(税込)、チタンシェルは27,148円(税込)となります。*製品名に680とあるものはダンパー入りです。*レシーバ 5.0で使用可能な耳垢防止フィルターはセルストップのみとなります。*SDS 5.0レシーバとSDS 4.0耳せんは互換性があります。








標準タイプ/パワータイプ	RICタイプ	〈耳せん〉		
 <p>イヤフック/ミニフック</p> <p>チューブ</p> <p>イヤモールド</p>	 <p>xレシーバ</p>	<p>■ドーム</p> <p>スリムチューブα</p>  <p>ドーム型耳せん</p>	<p>■スリムチップ</p> <p>スリムチューブα</p>  <p>スリムチップ</p>	<p>■イヤモールド</p> 


写真	製品名	製品コード	価格
----	-----	-------	----


イヤフック(カラーフックあり)			
	HE 11 680	042-0098	924円
	HE 10 680	004-8028	924円


イヤフック(カラーフックなし)			
	HE 10	004-1471-001	462円

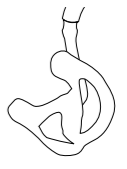
ミニフック(カラーフックあり)			
	HE 11 680 ミニ タンパーブルーフ	042-0121	924円


*フックのカラーバリエーションについてはP34をご覧ください。


スリムチューブα(左)			
	0B-L	054-0543	583円
	1B-L	054-0544	
	2B-L	054-0545	
	3B-L	054-0546	



xレシーバ(標準/SDS3.0) (左)			
	xレシーバ 0-L	054-0102	5,775円
	xレシーバ 1-L	054-0104	
	xレシーバ 2-L	054-0106	
	xレシーバ 3-L	054-0108	

xレシーバ(パワー/SDS3.0) (左)			
	xレシーバ 0-L	054-0235	5,775円
	xレシーバ 1-L	054-0237	
	xレシーバ 2-L	054-0239	
	xレシーバ 3-L	054-0241	

オープン型耳せん(グレー): タイプ			
	オープン型(グレー)S	054-1987	220円
	オープン型(グレー)M	054-1988	
	オープン型(グレー)L	054-1989	

クローズ型耳せん(グレー): タイプ			
	クローズ型(グレー)S	054-1990	220円
	クローズ型(グレー)M	054-1991	
	クローズ型(グレー)L	054-1992	

パワー型耳せん(グレー): タイプ			
	パワー型(グレー)S	054-1993	220円
	パワー型(グレー)M	054-1994	
	パワー型(グレー)L	054-1995	

オーダーメイド			
	イヤモールド	062-0001-01	オープン価格(非課税)
	パワースリムチューブ付イヤモールド		

*:SPシェル付レシーバは補聴器と同時購入の場合は10,500円(非課税)となります。補聴器と別購入の場合は17,325円(税込)となります。*製品名に680とあるものはダンパー入りです。

性能一覧


製品名	最大音響利得 (50dB入力)		90dB入力最大出力 音圧レベル		誘導コイル 感度	使用電池	期待動作時間/ 電池寿命(時間)	
	最大値(ピーク値) (+3dB以下)	HFA-FOG (±5dB以内)	最大OSPL90 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)				HFA MASL (±6dB以内)
フォナック オーディオ トスフィア/ オーディオ I-R (耳かけ型 RICタイプ)	S	47	40	112	107	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1,2}
	M	51	45	114	110	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1,2}
	P	59	56	122	120	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1,2}
	UP	71	66	132	124	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1,2}
フォナック パート I (耳あな型)	R M	40	35	109	103	—	リチウムイオン(充電式)	24 ^{*1}
	R P	50	46	115	111	—	リチウムイオン(充電式)	24 ^{*1}
	R SP	60	54	119	114	—	リチウムイオン(充電式)	24 ^{*1}
	R UP	70	62	127	120	—	リチウムイオン(充電式)	24 ^{*1}
	チタン M	40	35	109	103	60	PR536(10)	55~75
	チタン P	50	46	115	111	71	PR536(10)	55~75
	チタン SP	60	54	119	114	79	PR536(10)	55~75
	10 NW O M	40	35	109	103	60	PR536(10)	55~75
	10 NW O P	50	46	115	111	71	PR536(10)	55~75
	10 NW O SP	60	54	119	114	79	PR536(10)	55~75
フォナック オーディオ L (耳かけ型 RICタイプ)	R S	47	40	111	106	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	R M	51	46	114	111	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	R P	59	56	122	120	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	R UP	71	65	132	124	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	312 S	47	40	111	106	—	PR41(312)	60~85
フォナック ナイダー L (耳かけ型 パワータイプ)	312 M	51	46	114	111	—	PR41(312)	60~85
	312 P	59	56	122	120	—	PR41(312)	60~85
	312 UP	71	65	132	124	—	PR41(312)	60~85
フォナック スカイ L (お子さま向けタイプ)	PR ^{*3}	68	63	130	125	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	M ^{*3}	63	55	128	121	80	PR41(312)	55~80
	SP ^{*3}	75	64	133	127	93	PR48(13)	65~100
フォナック テラ+ (耳かけ型 RICタイプ)	UP ^{*4}	84	68	141	131	91	PR44(675)	110~190
	チタン M	40	35	109	103	60	PR536(10)	55~75
	チタン P	50	46	115	111	71	PR536(10)	55~75
フォナック パート P (耳あな型)	チタン SP	60	54	119	114	79	PR536(10)	55~75
	10 NW O M	40	35	109	103	60	PR536(10)	55~75
	10 NW O P	50	46	115	111	71	PR536(10)	55~75
	10 NW O SP	60	54	119	114	79	PR536(10)	55~75
	312 NW O M	40	35	109	103	60	PR41(312)	90~130
	312 NW O P	50	46	115	111	71	PR41(312)	90~130
	312 NW O SP	60	54	119	114	79	PR41(312)	90~130
	312 M	40	35	109	103	—	PR41(312)	50~75
	312 P	50	46	115	111	—	PR41(312)	50~75
	312 SP	60	54	119	114	—	PR41(312)	50~75
フォナック テラ+ (耳かけ型 RICタイプ)	312 UP	70	62	127	120	—	PR41(312)	50~75
	RIC-R S	47	40	111	106	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	RIC-R M	51	46	114	111	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	RIC-R P	59	56	122	120	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
フォナック テラ/テラ+ (耳かけ型 RICタイプ)	RIC-R UP	71	65	132	124	—	リチウムイオン(充電式)	18 ^{*1}
	RIC-312 S	47	40	111	106	—	PR41(312)	60~85
	RIC-312 M	51	46	114	111	—	PR41(312)	60~85
	RIC-312 P	59	56	122	120	—	PR41(312)	60~85
フォナック テラ/テラ+ (耳かけ型 標準タイプ)	RIC-312 UP	71	65	132	124	—	PR41(312)	60~85
	BTE-M ^{*3}	63	55	128	121	80	PR41(312)	55~80
フォナック テラ/テラ+ (耳かけ型 パワータイプ)	BTE-SP ^{*3}	75	65	133	127	93	PR48(13)	60~100
	BTE-UP ^{*4}	84	68	141	131	91	PR44(675)	110~190

*1:フル充電時。使用状況によって異なります。*2:オーディオ I-Rは20時間となります。*3:ダンパー入りフック使用時。*4:ダンパーなしフック使用時。*5:フォナック パート インフィニオのみとなります。
 *6:補聴器のプログラムをTコイルに切り替える際、プログラムスイッチ、またはリモコンが必要です。*7:補聴器にTコイル機能が必要です。*8:フォナック パート パラダイスのみとなります。*9:フォナック ナイダー
 ルミティのみとなります。*10:フォナック テラ BTE/フォナック テラ+ BTEのみとなります。*11:フォナック パート I-R/フォナック パート P-312のみとなります。
 ●本データは JIS C 5512:2015 の2ccカプラにより測定、表示してあります。●フィッティングソフトウェアは、Phonak Target 11.2以上です。

ロジャー受信機対応表 ●ロジャー受信機について、詳しくはP36をご覧ください。

製品名			ロジャーダイレクト	ロジャー ネットループ ^{*7}	
耳あな型	フォナック パート I/P	R ^{*5}	■	—	
		チタン ^{*6}	—	■ Tコイルオプション	
		312 ^{*8}	■	—	
		10 NW O ^{*6} /312 NW O ^{*6,8}	—	■ Tコイルオプション	
耳かけ型	RIC タイプ	フォナック オーディオ I	スフィア/R	—	
		フォナック オーディオ L	R/312	—	
	パワー タイプ	フォナック ナイダー L	PR	—	
			M/SP/UP	■	
	お子さま向け タイプ	フォナック スカイ L	PR	—	
			M/SP/UP	■	
	ベーシック タイプ	フォナック テラ	BTE-M/SP/UP	—	■ Tコイル設定
		フォナック テラ+	BTE-M/SP/UP	—	■ Tコイル設定

適応聴力範囲

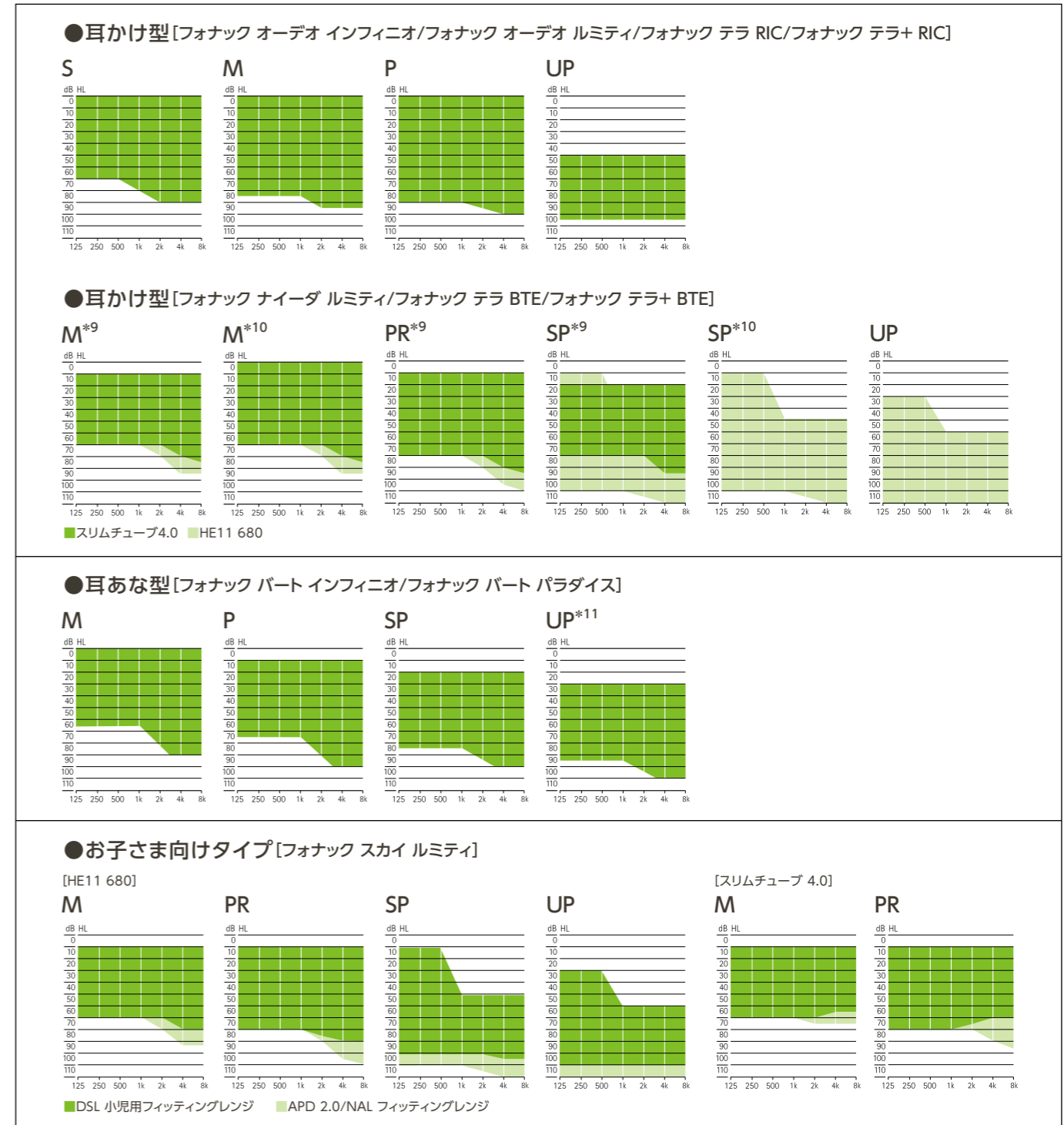

聞こえと補聴器について

インフィニオシリーズ

ルミティシリーズ

パラダイスシリーズ

ベーシックタイプ

お子さま向けタイプ

補聴援助システム 周辺機器

機能・性能一覧