




Technical Data ver.1



フォナック コムパイロット ツー  
**Phonak ComPilot II**

■ 各部の名称

- ① メインボタン
- ② 音量調節ボタン
- ③ ホームボタン
- ④ 接続ボタン
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ マイク
- ⑦ 外部入力端子
- ⑧ Roger / FM (ユーロプラグ) 入力端子
- ⑨ ミニUSBソケット
- ⑩ オーディオ状態表示
- ⑪ 電池状態表示
- ⑫ ソケット
- ⑬ ネックループアンテナ

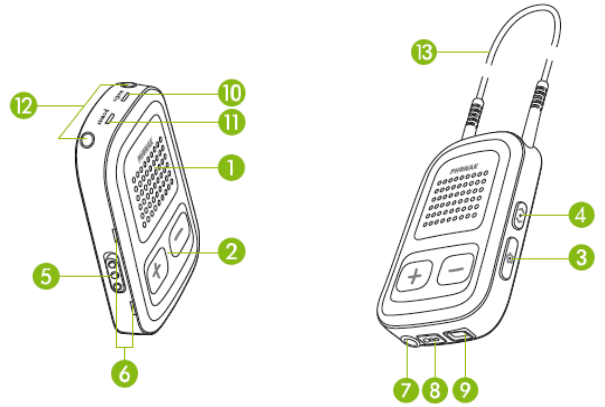

■ 機能/特徴

- 3タイプの音声入力  
(Bluetooth、3.5mmミニピン、ユーロプラグ)
- 最大24時間のストリーミング可能
- ステレオ音声信号を両耳に音声伝達
- ステータスを音声でお知らせ  
(ボイスアラート)
- Phonak RemoteControl Appとの互換性あり

■ インジケータ表示

デモ音再生中		ピンク色 点灯
Bluetooth 伝送中		青色 点灯
有線音声入力 伝送中		オレンジ色 点灯
ペアリングモード		青色 点滅
スイッチオン		緑色 2秒点灯
スイッチオフ		赤色点滅後、2秒点灯
充電中		赤色 点灯
充電完了		緑色 点灯
電池残量 10% 以下		赤色 シングル点滅
電池残量 5%以下		赤色 ダブル点滅
ロック状態 (ロック)		赤色 トリプル点滅
(解除)		緑色 トリプル点滅

■ 製品仕様

本体外寸 (L × W × H)	72 × 49 × 14 (mm)
重さ	46 g
カラー	シャンパン / ブラック
動作環境条件	温度 : 0°C ~ 40°C 湿度 : 相対湿度 95% 以下 (ただし、結露なきこと)
保管・輸送環境条件	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 相対湿度 90% 以下 (ただし、結露なきこと)

## ■ 電源仕様

電池：	リチウムポリマー (電圧：3.7V)
充電時間：	90分 ※ 充電時間は、電池状態によって変わります。 ※ 最大性能のために、3回の放充電を行うことをお勧めします
容量：	450 mAh
使用時間：	Bluetooth使用：最大24時間 (スタンバイ状態：1週間) 3.5mmミニジャック使用：最大24時間 ユーロプラグ使用：最大24時間 リモコン使用：2週間
充電供給： (入力)	タイプ：DC 電圧：5V +/-5% 電流：500mA  過充電されない仕組みとなっておりますが、充電中、高温になることがあります。 《重要！》 専用のACアダプターを使用して充電することをお勧めします。

## ■ 音声信号情報

入力信号：	- ライン入力 (3.5mm ミニジャック) - Bluetooth オーディオ (A2DP) - Bluetooth 電話 (HSP / HFP) - ユーロプラグ (外部入力端子)
音質：	ステレオ信号 (サンプリング周波数：22 kHz)
周波数帯：	20 Hz ~ 10 kHz

## ■ Bluetooth

プロファイル：	- Headset Profile (HSP) - Handsfree Profile (HFP) - Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) - Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) - Phone Book Access Profile (PBAP)
伝達範囲：	10 m (Class 2)
Bluetooth準拠：	Bluetooth version 4.1 + EDR / +LE
ペアリング数：	最大 6 台
最大接続：	A2DP：最大3台 HSP / HFP：最大2台



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Phonak is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## ■ 電波仕様

	ネックループ	フェライトアンテナ
タイプ：	取り外し可能 誘導式	内蔵型 誘導式
周波数：	10.6 MHz	10.6 MHz
占有周波数帯幅：	582 kHz	556 kHz
変調方式：	8-DPSK (差動位相偏移方式)	8-DPSK (差動位相偏移方式)
チャンネル：	1 ch	1 ch
磁界強度： (@10m)	18 dB $\mu$ A/m	16 dB $\mu$ A/m
操作可能範囲：	最大 40 cm	最大 100 cm
用途	ストリーミング リモコン	リモコン

## ■ 電波法認証

日本：	電気通信事業法 (T)：D14-0028 202 電波法 (R)：202-LSC032
ヨーロッパ：	ETSI EN 300 330 (HiBAN) ETSI EN 300 328 (Bluetooth) EN/IEC 60601-1-2 EN 301489-1,-3,-17 EN/IEC 60601-1 EN 60950-1 EN 62479
米国：	FCC 47 CFR Part 15.209 (HiBAN) FCC 47 CFR Part 15.247 (Bluetooth) FCC ID: KWC-COMPILOT2
カナダ：	RSS-210 (Issue 8) Annex 1 (HiBAN) RSS-210 (Issue 8) Annex 8 (Bluetooth) IC: 2262A-COMPILOT2