


フォナックの最新補聴器 ビロング シリーズ

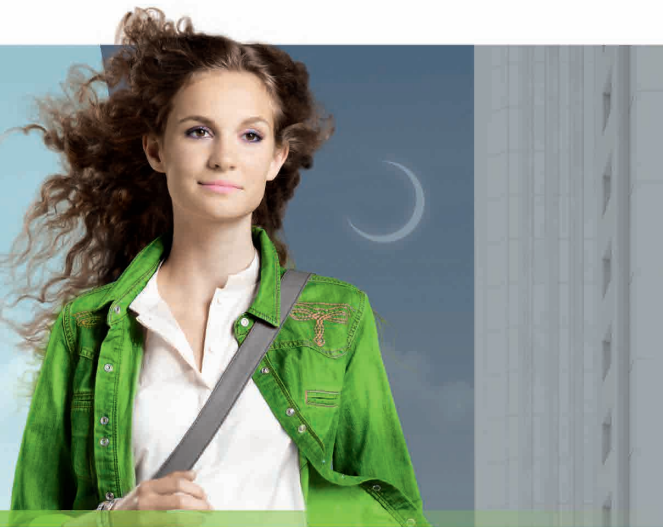

進化した補聴器。

フォナックの最新プラットフォームを搭載した「ビロングシリーズ」は、ユーザーの「使いやすさ」を最優先に考え、さらなる進化を遂げました。フォナック史上最小サイズの耳あな型補聴器“バート B- チタン”、たった3時間の充電で24時間*の連続使用を可能にした充電式補聴器“オーデオ B-R”に加えて“ボレロ B-PR”もラインナップ。さらに、全器種「オートセンス OS」と「サウンドリカバー 2」を搭載し、防水・防塵の国際保護等級 IP68 を取得。難しい操作なくいつでも最適な聞こえをお届けします。

* フル充電の場合。80分のワイヤレス機器使用時間を含む。

進化

1

フォナック史上最小の補聴器。

バート B- チタン



原寸大



装着イメージ

強度が高い「チタン」シェルを使用したことにより、厚み従来比 50% を実現。また、デジタル処理するコンポーネントも従来比 60% 小型化して、より目立たない補聴器をお届けします。「チタン」素材は、強度だけでなく生体適合性も高く、また耐食性にすぐれていますのでより安心してお使いいただけます。

進化

2

大好評の充電式が続々誕生。

リチウムイオンバッテリーを採用することにより、たった3時間の充電で24時間*の連続使用を可能にした、フォナックの充電式補聴器。RICタイプに続き、耳かけ型標準タイプでも登場しました。使用後はケースに差し込むだけなので、電池を交換する手間や、電池を取り外して乾燥ケースに入れる手間がかりません。



* フル充電の場合。80分のワイヤレス機器使用時間を含む。

進化


3

聞き取りを良くするテクノロジー。

オートセンス OS

周囲の音を0.4秒ごとに分析して、雑音の多いレストラン、車内、コンサートホール、家庭のどこにいるかを識別し、自動的に最適な聞こえとなるようプログラムをブレンド・選択します。複雑な設定をする手間や心配がありません。

設定を切り替えるのではなく“ブレンド”するので、音がナチュラルに変化

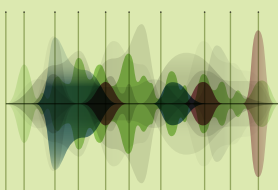

サウンドリカバー 2

より快適な聞こえが得られるよう、「サウンドリカバー」を刷新。「さ行」などの聞き取りづらい高い音を検知し、圧縮して言葉を識別しやすくするフォナック自慢の機能です。

オフ

オン

さしすせそ ▶▶ さしすせそ

よりクリアな聞き取りが可能になりました。

さらに全器種

防水

防塵

IP68
防水・防塵

※完全防水とは異なります。

PHONAK
life is on

【ピロングシリーズ 製品一覧】

IP68
防水・防塵

全器種 防水・防塵

※完全防水とは異なります。

オーデオ B (RIC タイプ)



オーデオ B-312
(M/P/UP)



オーデオ B-312T
(M/P/UP)



オーデオ B-13
(M/P/UP)

充電式



オーデオ B-R
(M/P/UP)

外部レシーバにより、高音質・小型化を実現した RIC タイプ。

ボレロ B (耳かけ型標準タイプ)



ボレロ B-M



ボレロ B-P



ボレロ B-SP


充電式



ボレロ B-PR

幅広い聴力に対応し、操作のしやすい耳かけ型標準タイプ。

< 価格表 (オーデオ B / ボレロ B) >

クラス	チャンネル数	電池式	充電式	充電式 内訳	
				補聴器 (非課税)	充電器 (税込)
B90 プレミアムクラス	20ch	片耳 500,000 円*	片耳 580,000 円*	568,000 円*	チャージャーケース  12,000 円
B70 アドバンスクラス	16ch	片耳 350,000 円*	片耳 430,000 円*	418,000 円*	
B50 スタンダードクラス	12ch	片耳 250,000 円*	片耳 320,000 円*	308,000 円*	
B30 エッセンシャルクラス	8ch	片耳 180,000 円*			

*:オーデオ BのUPIにはSPシェルが必要です。M、Pの場合、SPシェルはオプションで選択が可能です(いずれも別途、代金10,000円(非課税)がかかります。補聴器と同時購入の場合は10,000円(非課税)、別購入の場合はレシーバー代金含め15,000円(非課税))。

バート B- チタン (耳あな型)



バート B- チタン
(M/P/SP)

フォナック史上最も小さく目立たない耳あな型補聴器。

< 価格表 (バート B- チタン) >

クラス	チャンネル数	電池式
B90 プレミアムクラス	20ch	片耳 550,000 円
B70 アドバンスクラス	16ch	片耳 390,000 円

●補聴器は両耳装用をおすすめします。 ●補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：フォナック オーデオ B 228ABBZX00130000 フォナック ボレロ B 229ABBZX00032000
フォナック バート B 229ABBZX00047000

フォナック・ジャパン株式会社

(2017.07)